

Madrasser



www.invacare.no



Yes, you can.

Vi kan madrasser!

- Invacare er en ledende leverandør av tekniske hjelpemidler, og har lang erfaring med store og små leveranser til det norske markedet.

I denne katalogen presenterer vi hele bredden i vårt madrass-sortiment som vil kunne dekke mange av de behov som finnes i ulike helseinstitusjoner.

Valg av riktig madrass er viktig for å sikre god pasientkomfort, og for å forebygge og behandle trykksår. Du vil også kunne lese mer om hva som forårsaker trykksår, hvordan trykksår kan forebygges samt madrasskontroll. Vi har madrasser som ivaretar behovene til pasienter som har fra lav til høy risiko for å utvikle trykksår. Sortimentet er sammensatt av produkter som er fremstilt av skum, statisk- og dynamisk luft.

Dersom du vil vite mer om oss og hva vi kan gjøre for deg, om våre madrasser eller andre produkter, last ned produktbrosjyrer, brukermanualer og reservedelskataloger fra vår hjemmeside www.invacare.no eller ta kontakt med vår representant i ditt distrikt for råd og veiledning.

Vi håper du gjennom denne katalogen vil bli bedre kjent med vårt madrass-sortiment.

Vi gleder oss til å hjelpe deg!

Med vennlig hilsen fra oss i Invacare

Kontaktinformasjon

Distrikt	Kontaktperson	E-post	Telefon
Hele Norge	Kundeservice - forespørsler, support etc.	norway@invacare.com	22 57 95 00
Hele Norge	Teknisk service	teknisk@invacare.com	22 57 95 00
Oslo og Øst-Viken	Aina Evensen	aevensen@invacare.com	976 09 418
Innlandet	Bjørn Sæther	bsaether@invacare.com	917 33 399
Buskerud, Vestfold, Telemark, Bærum og Romerike	Line Bjerved	lbjerved@invacare.com	934 34 396
Agder	Jens Aspås	jaspas@invacare.com	913 80 353
Rogaland	Oddmar Byberg	obyberg@invacare.com	907 43 640
Vestland	Trond Langeland	tlangela@invacare.com	907 40 097
Møre og Romsdal	Ødegaard Engros AS	ode@norengros.no	70 10 92 92
Trøndelag (sør)	Arild Nordgaard	anordgaa@invacare.com	415 22 260
Trøndelag (nord)	Kathrine R. Pedersen	krokkepe@invacare.com	911 53 091
Nordland	Knut Hagen	khagen@invacare.com	917 73 709
Nordland	Helseservice Engros AS	hs@norengros.no	76 11 75 00
Troms og Finnmark	Helseservice Engros AS	hs@norengros.no	76 11 75 00
Salgssjef Region Øst	Karianne Nyrud Jansen	knjansen@invacare.com	915 42 478
Salgssjef Region Nord-Vest-Sør	Rune Sandbakk	rsandbakk@invacare.com	909 38 220

Innhold

Hva forårsaker trykksår	4
Klassifisering av trykksår	6
Madrasskontroll	7

Våre madrasser

Statisk - Skum

Invacare Dacapo-serien	9
Invacare Essential Touch	26
Invacare Softform® Premier	30

Hybrid (statisk/dynamisk) - Skum og luft

InvaSoft Hybrid	32
Invacare Softform® Premier Active 2 RX	38

Dynamisk - Luft

Invacare SoftCloud™ Top (overmadrass)	42
Invacare SoftCloud™ Air	42
Invacare SoftCloud™ Ace	42
Invacare SoftCloud™ Pro	42

Tilbehør

Invacare Soft Tilt™ 2.0	48
Invacare Maxxcare® Heel Pro hælavlaster	52

Hva forårsaker trykksår?

Et trykksår er skader på huden og det underliggende vev, som regel på huden hvor det er benfremspring. Skadene er oftest forårsaket av trykk, eller trykk i kombinasjon med skyvkrefter eller friksjon.

Trykksår varierer i alvorlighetsgrad fra misfarging av huden til alvorlige, åpne sår der muskler og ben er synlige.

Trykk

- ▶ Trykk er en direkte (vertikal) kraft som oppstår når huden vår er i kontakt med en overflate, f.eks. når man sitter på en stol eller ligger på en madrass. Trykket mot huden fører til nedsatt blodsirkulasjon. Oksygen og næringsstoffer fraktes til huden vår via blodet, men trykk mot vevet, som utgjør huden vår, hindrer dette. Resultatet er at vevet blir skadet.

Skyvkrefter

- ▶ Skyvkrefter er også en kraft, men det virker i en annen retning enn trykk. Skyvkrefter er en parallell eller horisontal kraft som fører til at huden og underliggende vev strekkes. Skyvkrefter kan oppstå når pasienten sklir ned i sengen eller stolen. Dersom huden henger fast i madrassen eller puten, vil dette forvrenge det underliggende vevet.

Friksjon

- ▶ Friksjon er når huden gnisser mot en annen overflate og kan inntreffe når en sklir ned i en stol eller seng. Denne typen skade er vanligvis ganske overfladisk og bør leges uten problemer. Imidlertid kan kroppens evne til å hele sår være nedsatt for syke eller eldre mennesker, og selv grunne sår kan utvikle seg til noe mer alvorlig.

Temperatur

- ▶ Økt kroppstemperatur er også antatt å øke risikoen for utviklingen av trykksår.

Hvordan oppdage trykksår?

På lys hud, se etter vedvarende røde flekker som ikke forsvinner etter at trykket er fjernet fra området (figur 1). Se etter blå-lilla flekker på mørkere hud.



Figure 1

Du bør også se etter:

- Hevelser
- Tørre områder
- Blemmer eller områder av sprukken hud etter blemmer
- Harde eller myke hudflekker som føles uvanlig røe eller svampete å ta på
- Endring i hudfarge
- Varme eller kalde områder over benfremspring

Hvordan redusere risikoen for trykksår?


1. Sjekk huden for tegn på skader minst én gang om dagen hvis pasienten ligger eller sitter i lange perioder. Hvis det er mulig, anbefales det å reise seg og gå rundt i fem minutter hver time for å få i gang blodsirkulasjonen.
2. Bevegelse: Sørg for at pasienten snur seg og endrer posisjon regelmessig for å avlaste huden over de mest benete områdene på kroppen. Hvis pasienten ligger i sengen, kan han eller hun for eksempel oppfordres eller hjelpes til å rulle fra side til side hver halve time. Dette reduserer trykket og øker blodsirkulasjonen.
3. Det anbefales å bytte stilling i rullestol hvert 15. til 30. minutt. Dette kan gjøres ved å vugge fra side til side, lene seg fremover eller presse seg selv opp ved hjelp av armlenene for å avlaste presset på baken.
4. Hvis pasienten sitter eller ligger over lengre perioder, er det avgjørende å ha pute og madrass med trykkfordelende/trykkavlastende egenskaper for å redusere skaderisikoen.
5. Et balansert kosthold og rikelig med væske er viktig.
6. Beskytt huden: Hold huden ren og tørr og bruk milde såper som ikke tørker den ut. Tørk forsiktig uten å gni hardt. Hvis pasienten lider av inkontinens, vask huden med en mild såpe umiddelbart og klapp huden forsiktig tørr.

Områder som er utsatt for trykksår?



Pasienter kan være i faresonen for å utvikle trykksår på svært kort tid dersom ikke reposisjonering og trykkavlastning finner sted.

Tilleggseffekten av skyv- og friksjonskrefter


Delvis liggende stilling

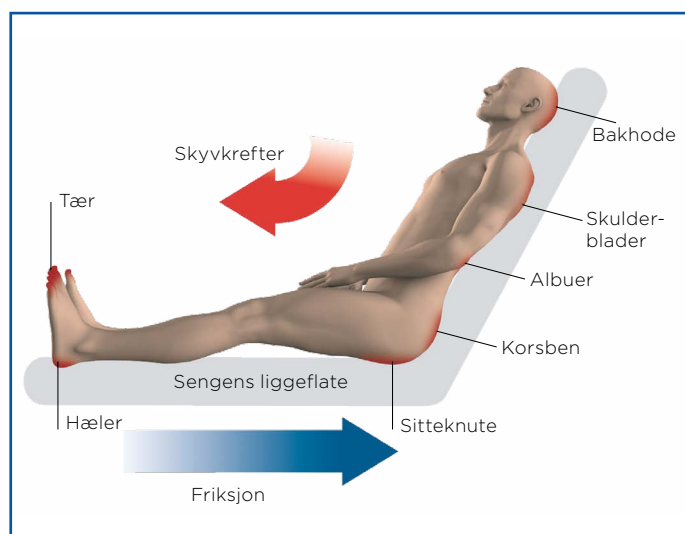

Sittende stilling

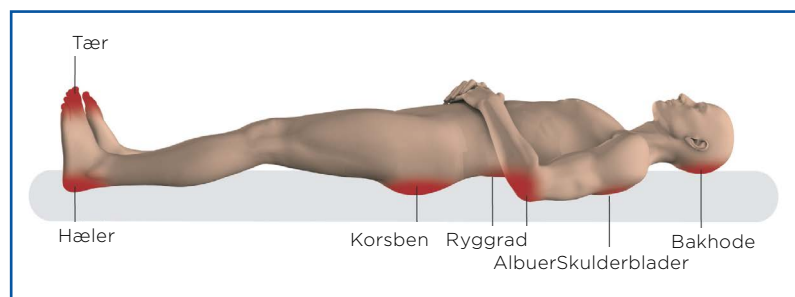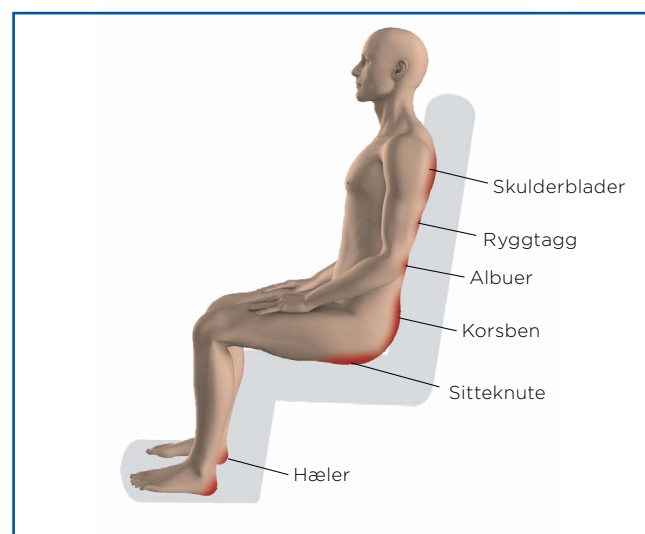

Liggende stilling

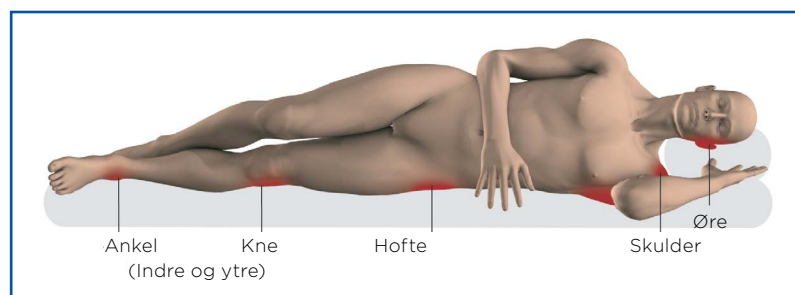


Sideleie

Klassifisering av trykksår




Kategori/stadium 1:

Intakt hud med rødhet som ikke blekner på et lokalisert område, ofte over et benfremspring. Området kan være smertefult, fast, bløtt, varmere eller kaldere sammenlignet med nærliggende vev. Kategori 1 kan være vanskelig å oppdage på personer med en mørkere hudtone. Symptomene ovenfor kan antyde risiko for å utvikle trykksår.

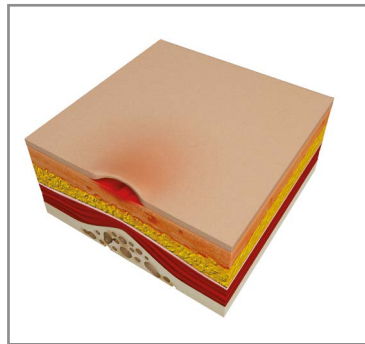


Kategori/stadium 2:

Delvis tap av dermis (lær huden) som ser ut som et overfladisk åpent sår med rød-rosa sårbunn, uten dødt vev. Kan også se ut som en intakt eller revnet serumfylt eller blodfylt blemme. Ser ut som et skinnende eller tørt overfladisk sår uten dødt vev eller blåmerker.

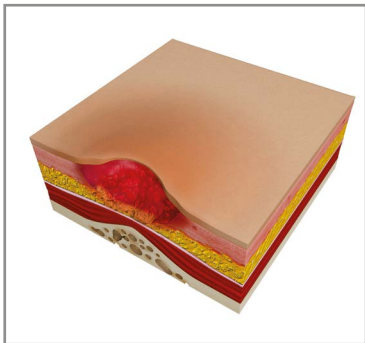

Kategori/stadium 3:

Tap av hele hudlaget. Underhudsfett kan være synlig, men ben, sener eller muskler er ikke eksponert. Dødt vev kan forekomme, men skjuler ikke dybden av vevstap. Kan inkludere underminering og tunneldannelse.

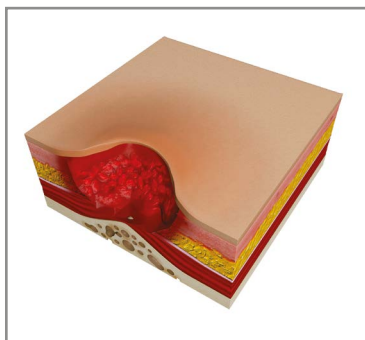

Kategori/stadium 4:

Gjennomgående tap av vev med eksponerte ben, sener eller muskulatur. Dødt vev eller sårskorpe kan forekomme. Omfatter ofte underminering og tunneldannelse. Kategori 4 trykksår kan omfatte muskel- og/eller støttestrukturer som for eksempel hinner, sener eller leddkapsel.

Dette utdraget er hentet fra "Pressure Ulcer Prevention and Treatment EPUAP Review guideline" som er skrevet av European Pressure Ulcer Advisory Panel (2009). Denne oversikten er utformet kun som en veiledning. Invacare er ikke ansvarlig for eventuell medisinsk feilvurdering som følge av feiltolkning av innholdet i dette dokumentet.

Madrasskontroll

Følgende informasjon er ment som en veiledning til hva man bør tenke på ved kontroll av madrasser.

Hvordan kontrollere madrassen?

1. Madrasstype

Identifiser madrasstype og sjekk om madrassen har spesifikke eller særegne egenskaper av betydning for kontrollens utførelse og utfall.

2. Madrassdybde

Mål madrassdybden ved bruk av linjal. Skummadrasser (ekskludert eventuell overmadrass) bør ha en dybde på minst 12 cm.

3. Tilstanden på trekket

Ved kontroll skal man sjekke trekket både på utsiden og innsiden, og se etter synlige tegn på slitasje. Dette kan omfatte:

- Skade som f.eks. kutt og punktering
- Ødlagte sømmer
- Misfarging på glidleås
- Misfarging på innsiden av trekket eller på skummet
- Misfarging på utsiden av trekket*
- Sjekk at trekket passer til selve madrassen

*Husk å være ekstra oppmerksom når du leter etter flekker på mørkt eller mønstret trekk.

Hvis trekket er forurensset, skal madrassen tas ut av bruk inntil trekket er erstattet. For å unngå risiko for at pasient skal oppleve friksjon, er det viktig at det nye madrasstrekket passer til madrassen. Ta kontakt med Invacare om det usikkerhet rundt rett størrelse.

Hvis skummet og trekket er forurensset, bør hele madrassen erstattes. Dersom dette ikke gjøres, kan det være økt risiko for infeksjon for både pasient og pleier.

Tips

Hver nye madrass bør bli tildelt et nummer og en merkelapp med dagen den ble tatt i bruk.



Alle madrasser fra Invacare har egne felt for merking.


4. Skummets tilstand

a) Bunning

Det er viktig å sjekke om skummet har bunnet ut. Dette er tilfelle dersom man kjenner sengebunnen gjennom madrassen under testingen. Den anbefalte metoden for å avklare hvorvidt madrassen bunner er «knyttneve-test».

Gjennomføring av «knyttneve-test»

- 1) Kontroller at toppen av madrassen er på høyde med den som utfører kontrollen (ved hoftebenet)
- 2) Sørg for at madrassen ligger godt på plass
- 3) Stå på siden av sengen
- 4) Fold hendene sammen slik at du står med samlet knyttneve, hold albueene strake
- 5) Len deg forover med kroppsvekten og trykk knyttneven ned i madrassen på de syv punktene vist under

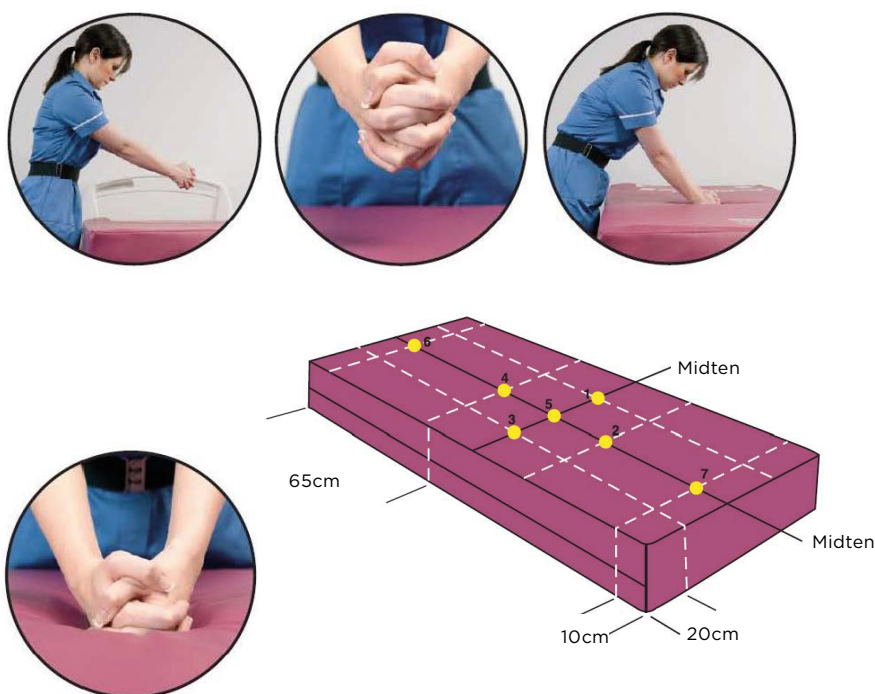

I tilfeller hvor madrassen bunner, bør madrassen tas ut av bruk umiddelbart. Dersom dette ikke gjøres kan pasienten utsettes for høy risiko for trykkskade.

b) Indre skumkjerne


Ta av madrassstrekket og undersøk skumkjernen, og se etter følgende:

- Fuktighet med misfarging på innsiden av trekket
- Misfarging
- Lukt

Dersom noe av dette er tilfelle, anbefales det å bytte madrass. En forurenset skumkjerne kan utgjøre en betydelig risiko for smitte for både pasient og pleier.

Dacapo

Forebyggende trykksårbehandling

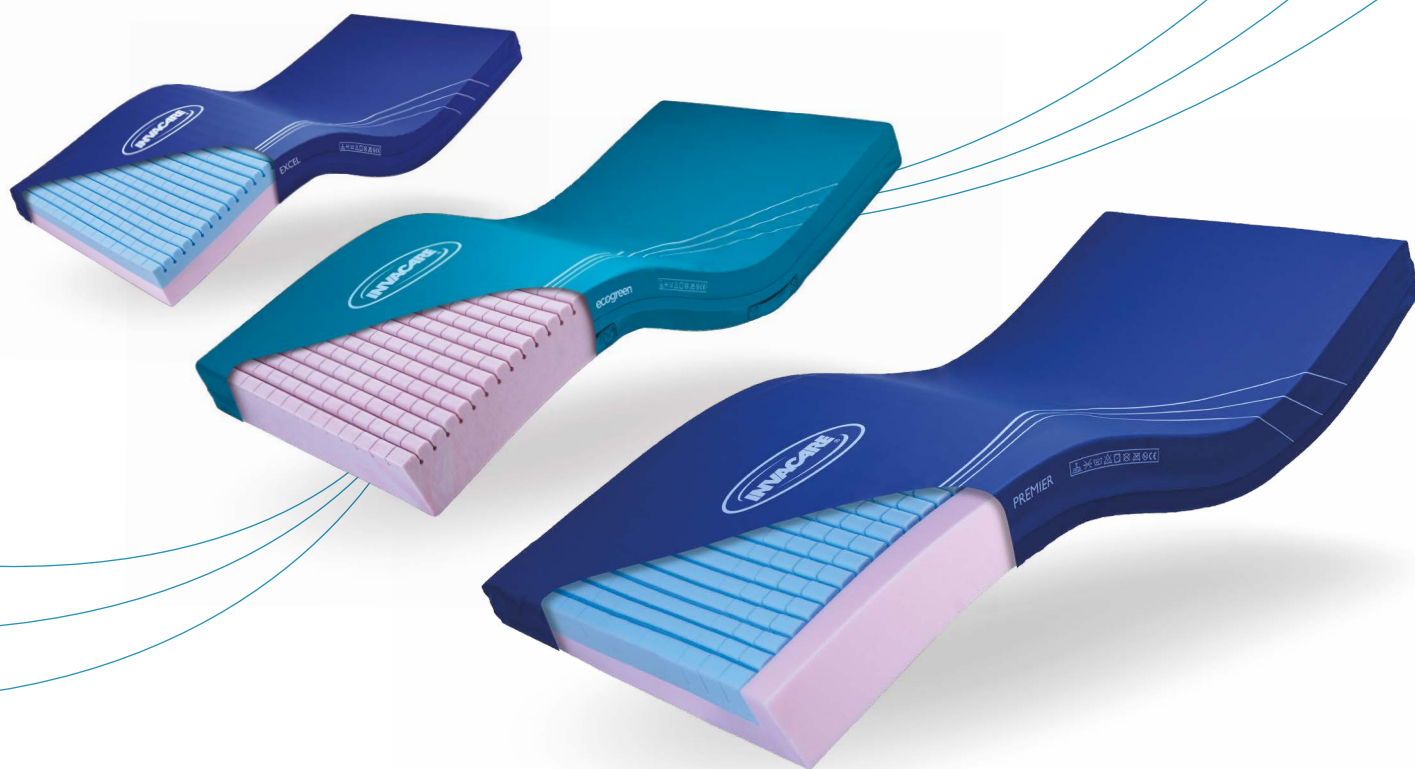

Komfort og valgmuligheter

Støtte. Overflate. Løsninger.



Yes, you can.®

Oppdag vår Dacapo-serie

Et omfattende utvalg av trykkfordelende skummadrasser

I over 20 år har vårt pålitelige utvalg av trykkfordelende madrasser bidratt med komfort og støtte til de som er utsatt for trykksår.

Designet med klinisk innsikt og ekspertise, i kombinasjon med vår designinnovasjon, representerer Dacapo et komplett utvalg av madrasser med avlastende egenskaper og løsninger.



Premier



Excel



Ecogreen



2 sided



Basic



Top



Top Pro



Ampla




Dacapo Kid



Trykkfordeling

Alle våre kliniske madrasser bidrar med effektiv trykkfordeling uansett hvordan pasienten ligger eller sitter i sengen.

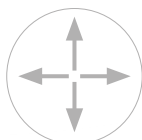

Redusert shear og friksjon

Vårt flerveis stretchstoff bidrar til å redusere shear og friksjon.



Mikroklimahåndtering

Skumstrukturer med god lufting sikrer optimal mikroklimahåndtering.




“Utviklet for å
tilby optimal
avlastning og
trykkfordeling”

Trykkfordeling


I Invacare bruker vi standardisert trykkartleggingsteknologi for å informere og øke forståelsen for effektiviteten av trykkfordeling på våre ulike madrasser

Vi er trygge på at hver eneste madrassmodell har gjennomgått grundige analyser og tester. I tillegg til trykkartleggingen gjennomfører vi uavhengige holdbarhetstester, cytotoksisitetstesting*, branntesting og akselert aldring.

Vi kan derfor forsikre deg om at alle våre kliniske madrasser er kvalitetssikret og gir optimal komfort og støtte til pasienten

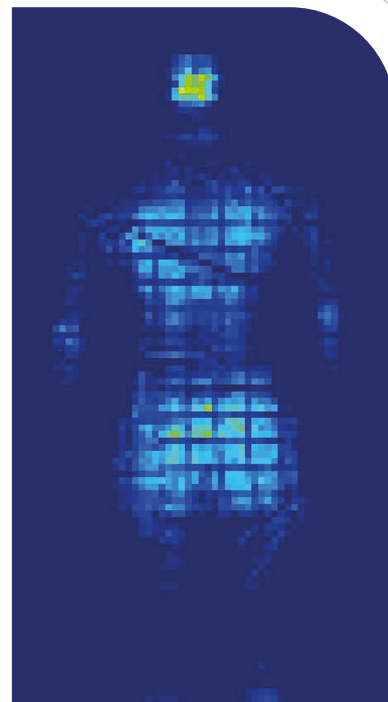

Bildet over viser Dacapo Excel med pasient i ryggeleie

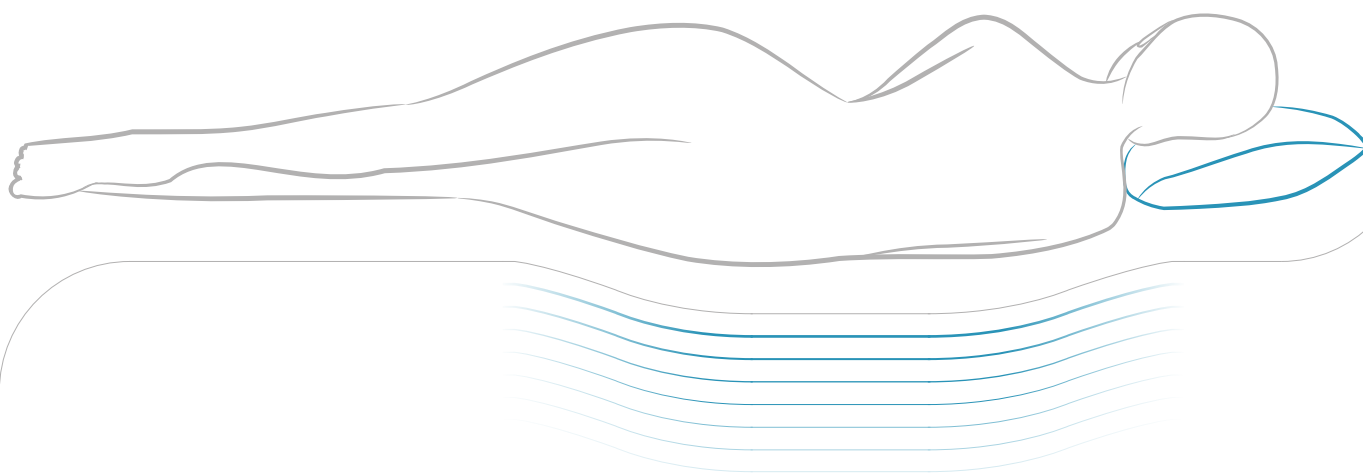

Egenskaper du kan forvente av en Dacapo-madrass:



Kvalitetssikret høyspesifisert skum



Mykt skum som gir god støtte



Slitesterkt og pustende materiale

*Et stoffs evne til å skade celler eller vev

Dacapo Premier

Vårt flaggskip, med u-kjerne med høy skumtetthet er svært anerkjent for sin positive påvirkning på kliniske utfall

U-kjerne-designet gir stabilitet for de som beveger seg inn og ut av sengen og øker følelsen av å være trygg under forflytning. Det skårede skummet bidrar samtidig til effektiv trykkfordeling.

Det skårede skummet følger kroppens kurver og konturer i hver posisjon. Dette øker kontaktområdet med huden og minimerer overflatetrykk og shear.


Dacapo Premier har enestående respons- og gjenopprettingsegenskaper, der det høye motstandsdyktige skummet restituerer svært godt etter bruk, gir pasienten god støtte og bidrar til å redusere risikoen for trykksår.



> **Flerlags**
høyeplastisk skum.



> **Støtter opptil 180 kg**
kroppsvekt.

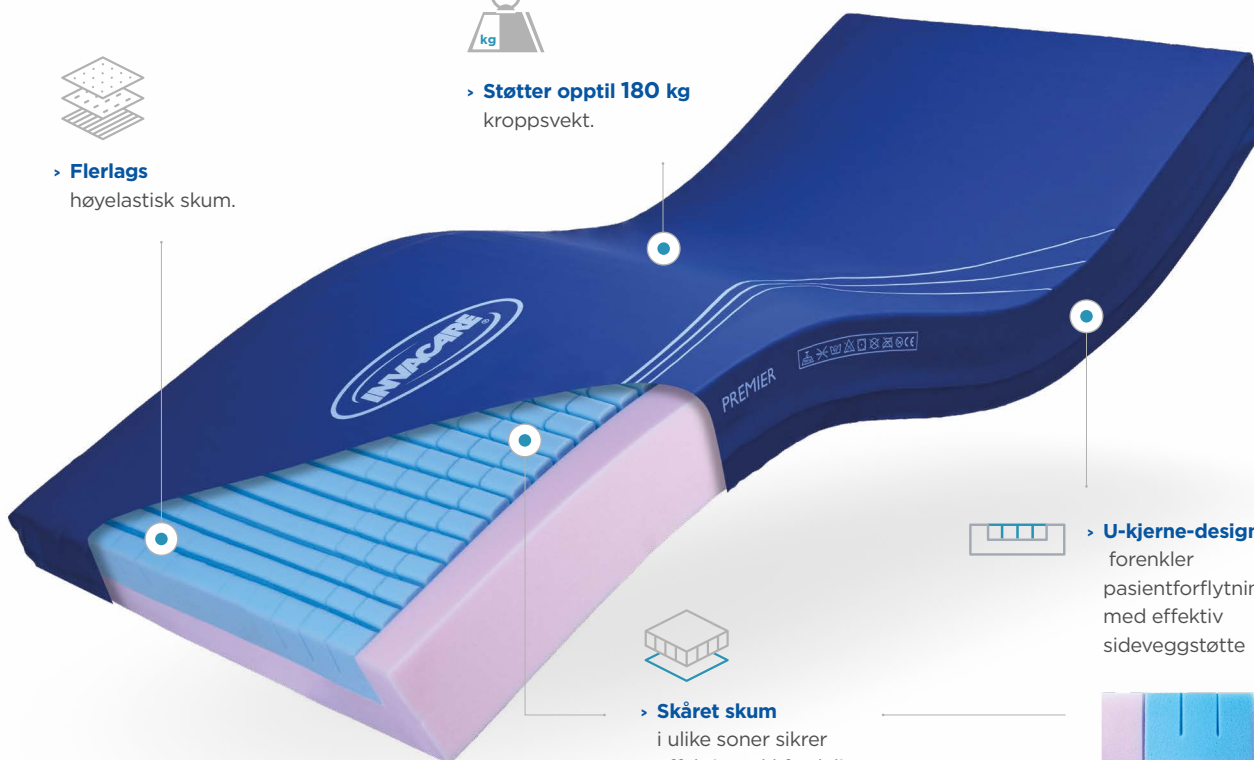

> **U-kjerne-designet**
forenkler pasientforflytninger med effektiv sideveggstøtte



> **Skåret skum**
i ulike soner sikrer effektiv trykkfordeling og håndtering av mikroklima.



Flerveis
stretchstoff



Hygiensk trekk som
kan vaskes i maskin




Leveres
komprimert

Dacapo Excel

Vår nyeste trykkavlastende madrass har en flerlags overflate som bidrar til effektiv trykkavlastning og mikroklimahåndtering.

Madrassen er spesialdesignet for å tilpasse seg pasientens kropp og samtidig sikre optimal håndtering av mikroklima. Dacapo Excel gir enestående respons- og gjenopprettingsegenskaper. Pasientens kropp synker ned og omslutes av madrassen, noe som reduserer trykket mot huden.

Skummets høye kvalitet sikrer at madrassen restituerer seg svært godt etter bruk, og gir optimal støtte ved langtidspleie. Madrassen gir optimal støtte for de som er i risikosonen eller har høy risiko for å utvikle trykksår.

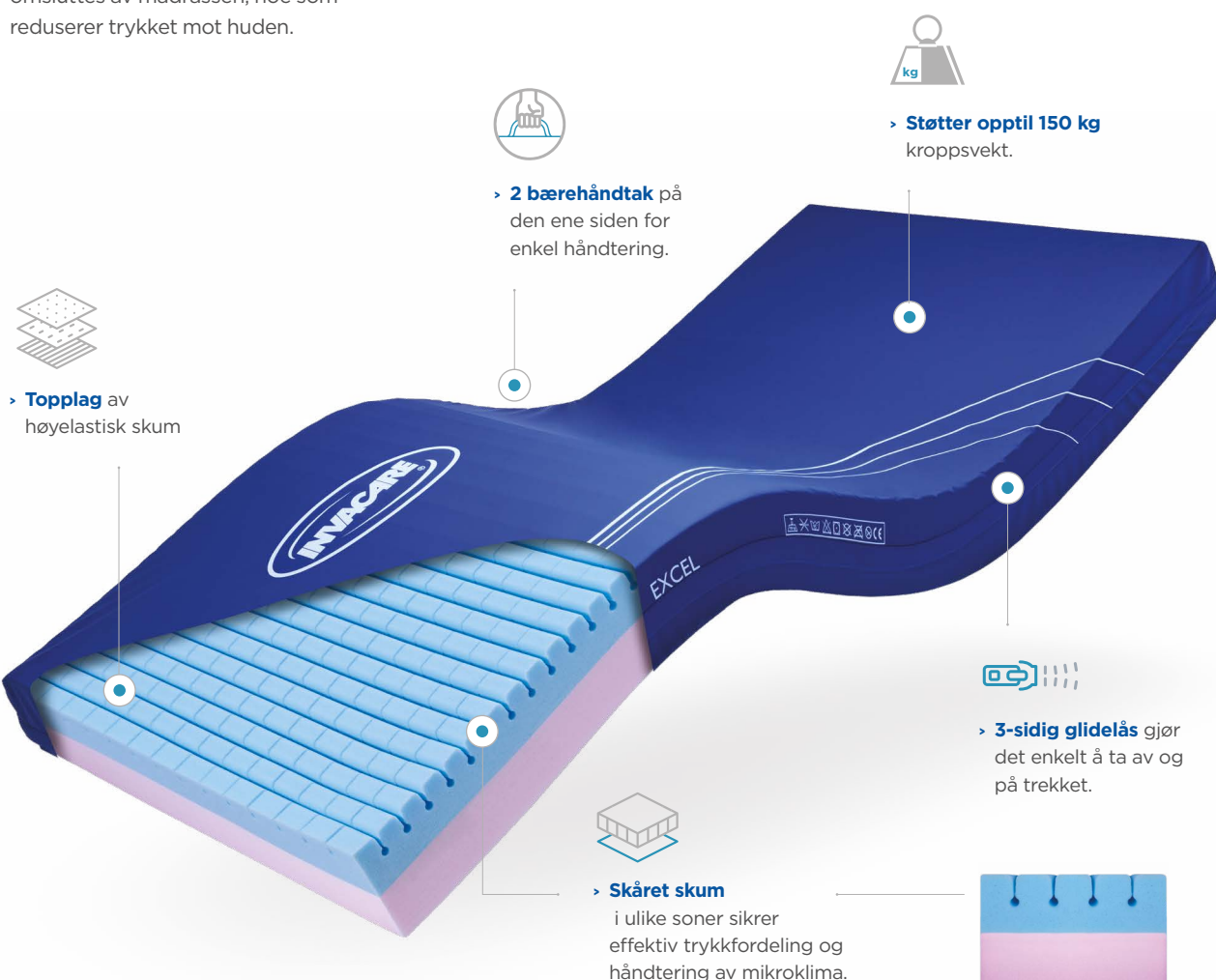

Egenskaper du kan forvente av en Dacapo-madrass:


Kvalitetssikret
høyspesifisert skum


Mykt skum som gir
god støtte


Slitesterkt og pustende
materiale

Dacapo ecogreen

Med et ansvarlig og bærekraftig design, oppnår vår nye trykkfordelende madrass klinisk foretreffelighet på en bærekraftig måte. Oppdag fremtiden.

Madrassen er utformet for å innfri de kliniske kravene og resultatene som kreves av helsepersonell. Madrassen gir optimal trykkfordeling, reduserer shear og friksjon, har god holdbarhet og gir pasienten høy grad av komfort.

Alt dette på en bærekraftig måte som tar vare på planeten vår.

Dacapo Ecogreen samsvarer også helt med anbefalingene til EPUAP for høyspesifiserte skummadrasser.




- > **Plantebasert høyelastisk skum** har mindre miljøpåvirkning sammenlignet med annet skum.



- > **Støtter opptil 150 kg** kroppsvekt.



- > **Naturlig bambusstoff** reduserer syntetiske stoffer med 50 %.

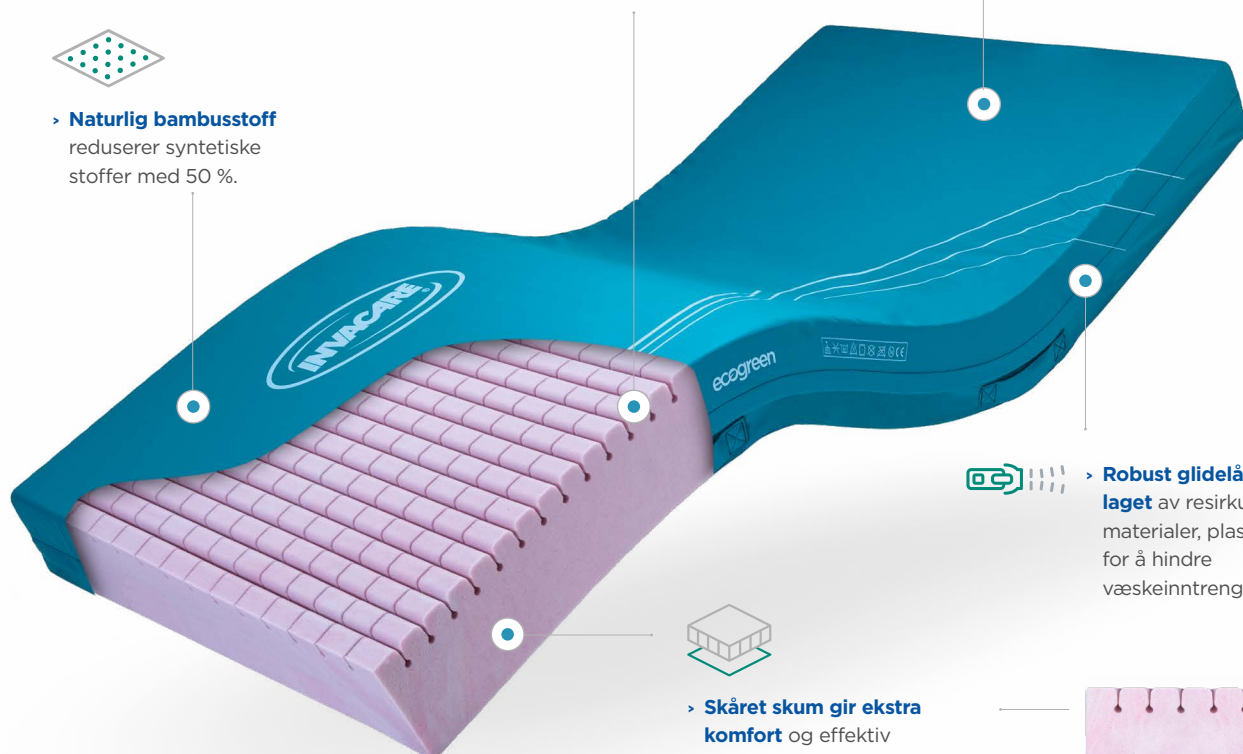

- > **Robust glidelås laget** av resirkulerte materialer, plassert for å hindre væskeinntrengning.



- > **Skåret skum gir ekstra komfort** og effektiv trykkfordeling



Flerveis stretchstoff



Hygiensk trekk som kan vaskes i maskin



Leveres komprimert

Dacapo 2 Sided

Kombinasjonen av høy elastisitet og viskoelastisk skum, gir utmerkede nedsenkingsegenskaper som letter trykkfordelingen.

Det unikt skårede skummet gjør at madrassen tilpasser seg pasientens kropp i hver posisjon. Kroppen omslutes av madrassen og gir økt kontakt med huden. Dette bidrar igjen til å redusere shear og friksjon, samtidig som den gir pasienten optimal støtte.


Dacapo 2 Sided er allsidig og vendbar, og gjør at du kan velge mellom en høyelastisk skumside eller en viskoelastisk side.



> **Den kombinerte skumløsningen** gir optimal trykkfordeling.



> **Støtter opptil 130 kg** kroppsvekt.

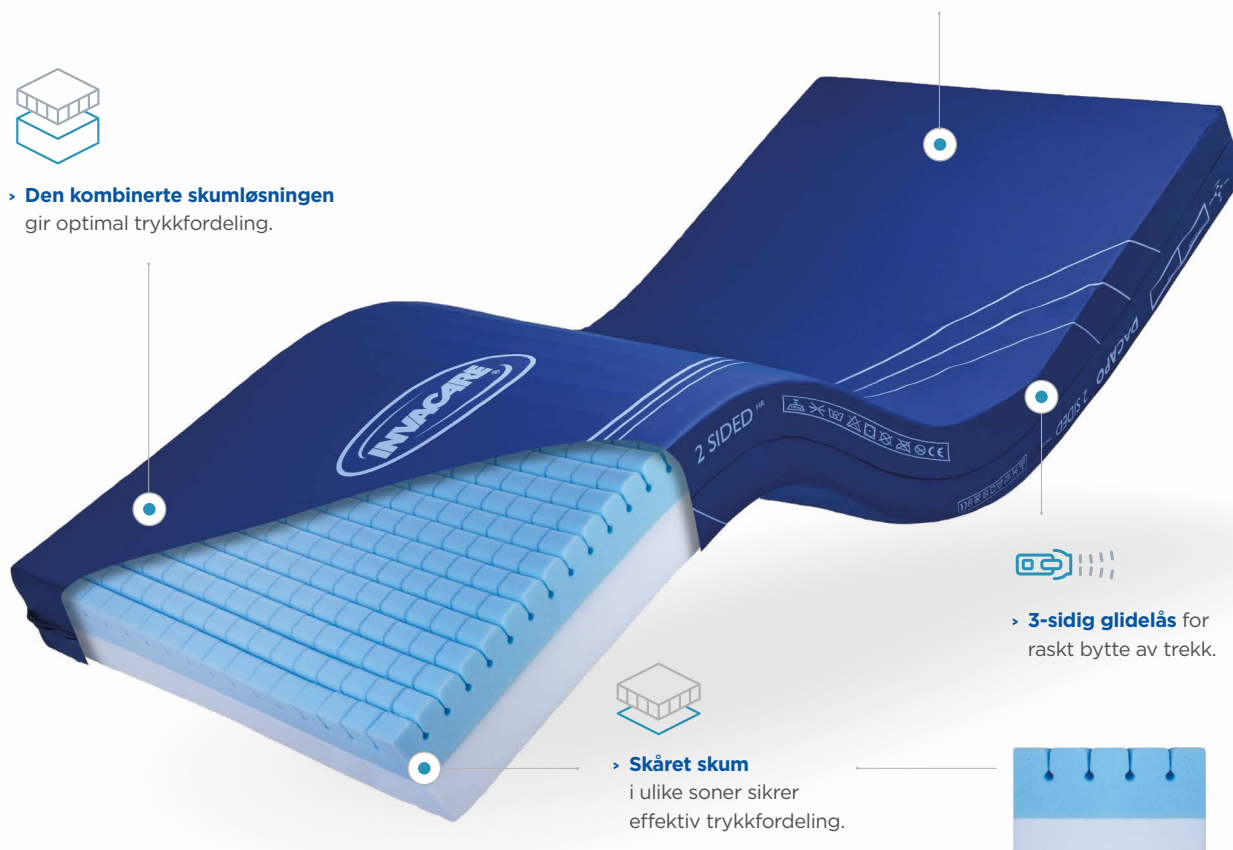

> **3-sidig glidelås** for raskt bytte av trekk.



> **Skåret skum** i ulike soner sikrer effektiv trykkfordeling.



Egenskaper du kan forvente av en Dacapo-madrass:



Kvalitetssikret høyspesifisert skum



Mykt skum som gir god støtte



Slitesterkt og pustende materiale

Dacapo Basic

Gir pasienten en komfortabel og støttende overflate samtidig som den bidrar til å redusere shear og friksjon.

Vårt høyelastiske høykvalitetsskum gir en effektiv støtteoverflate for pasienten. Gode respons- og restitusjonsegenskaper sikrer at madrassen gjenoppretter og beholder formen etter hver bruk, noe som forlenger pasientens grad av støtte ved bruk av madrassen.


Beskyttet av vårt multistretch, pustende og vanntette trekk, er madrassen designet for å være skånsom mot huden ved å redusere shear og friksjon.



> **Støtter opptil 120 kg**
kroppsvekt.



> **Tilgjengelig som overmadrass, Dacapo low - 6 cm.** Fungerer som støttende base for dynamiske overmadrasser eller lignende.

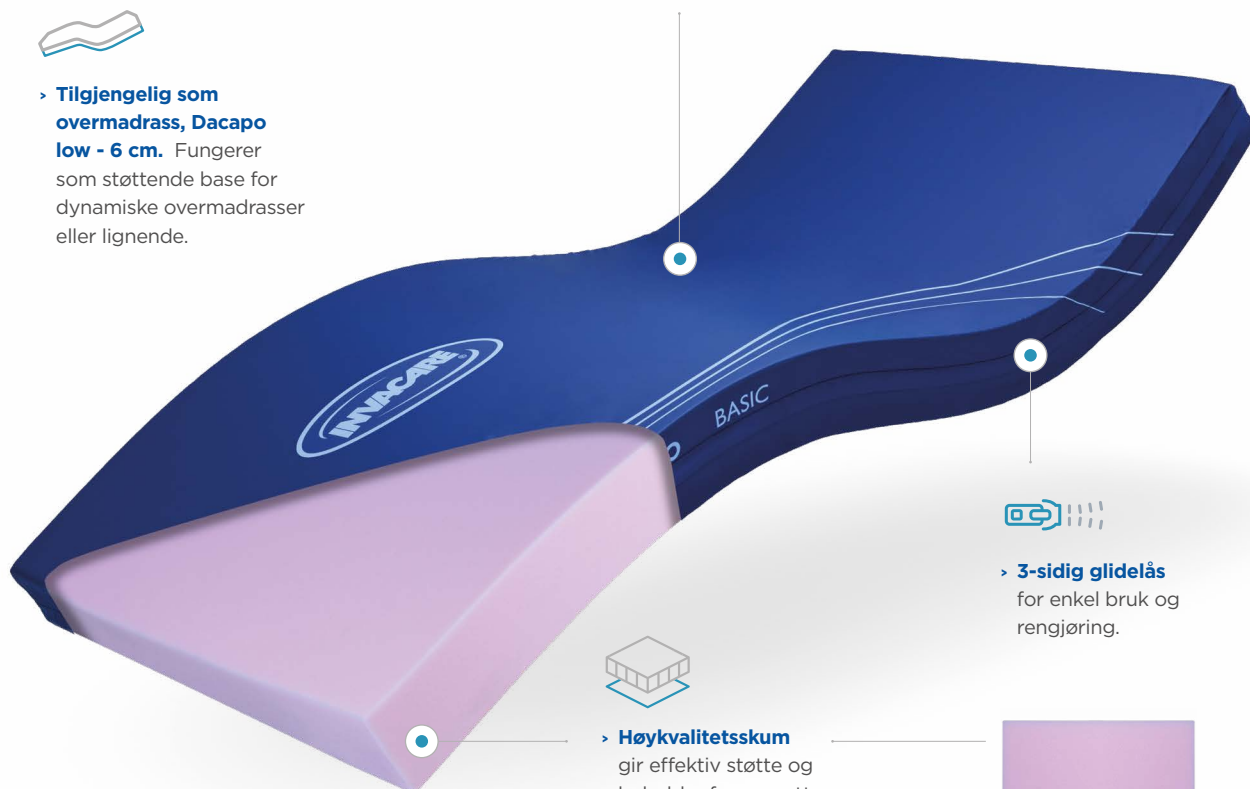

> **3-sidig glidelås**
for enkel bruk og rengjøring.



> **Høykvalitetsskum**
gir effektiv støtte og beholder formen etter hver bruk.



Flerveis stretchstoff



Hygiensk trekk som kan vaskes i maskin



Leveres komprimert

Dacapo Top

Våre høykvalitets-, viskoelastiske overmadrasser gir økt støtte når de brukes i kombinasjon med våre Dacapo Basic-madrasser.

Det temperatursmarte skummet tilpasser seg pasientens temperatur og kroppskontur. Med en åpen cellestruktur er skummet godt ventilert og reduserer oppbygningen av varme og fuktighet for effektiv mikroklimahåndtering.

Med vårt flerveis elastiske og pustende trekk tilbyr Dacapo Top en avansert overmadrass for Dacapo Basic-madrasser.




> Elastiske bånd

i hvert hjørne sikrer en fast posisjonering til madrassen under.



> Støtter opptil 130 kg
kroppsvekt.

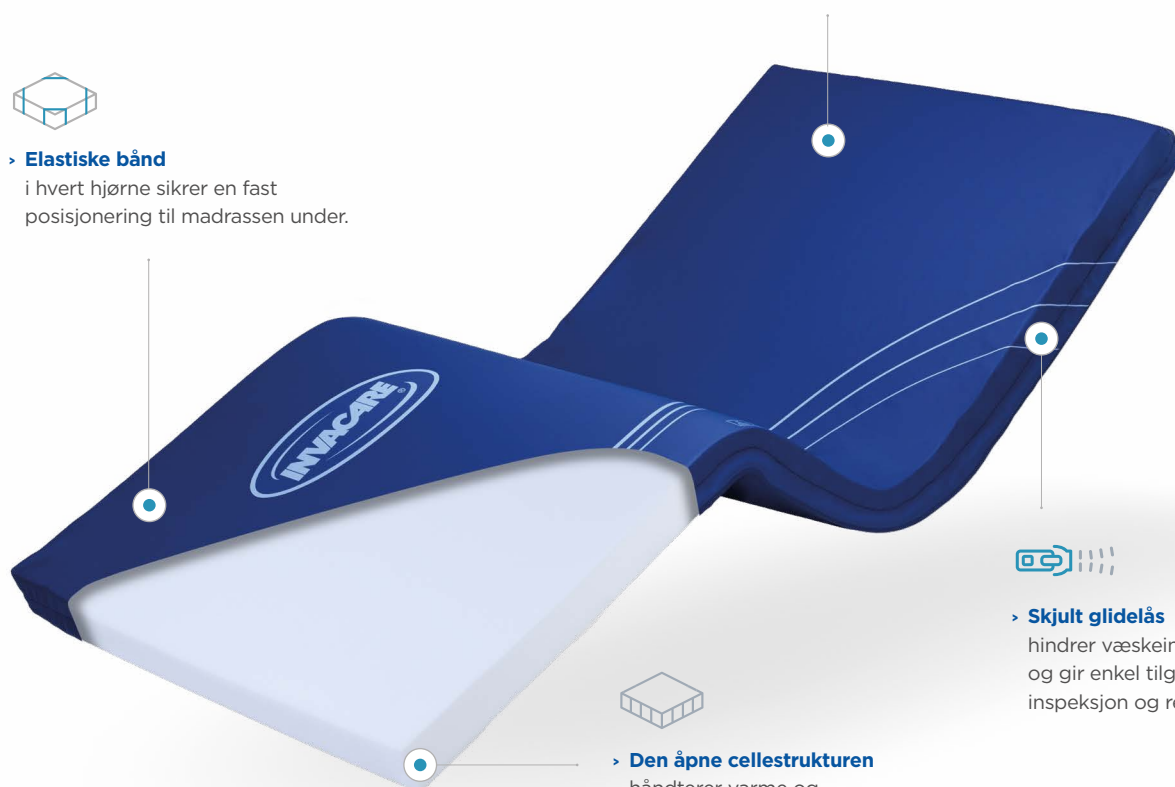

> Skjult glidelås

hindrer væskeinntrenging og gir enkel tilgang ved inspeksjon og rengjøring.



> Den åpne cellestrukturen

håndterer varme og kroppsfuktighet.

Egenskaper du
kan forvente av en
Dacapo-madrass:



Kvalitetssikret
høyspesifisert skum



Mykt skum som gir
god støtte



Slitesterkt og pustende
materiale

Dacapo Top Pro

Overmadrass med høy tetthet som bidrar til forbedring av kliniske resultater når den brukes med en hvilken som helst annen madrass som base

Skåret skum i 3 anatomiske soner gjør at kroppen tilpasser seg kroppen og øker kontaktflaten med huden. Dette minimerer shear og overflatetrykk som igjen gir enestående trykkfordeling

Den dampgjennomtrengelige cellestrukturen sikrer god ventilering. I tillegg til det pustende og vanntette trekket, bidrar Dacapo Top Pro positivt til mikroklimaet i huden.




> **Dampgjennomtrengelig cellestruktur**
gir naturlig luftstrøm.



> **Elastiske bånd**
i hvert hjørne sikrer en fast posisjonering til madrassbunnen.



> **Støtter opptil 150 kg**
kroppsvekt.

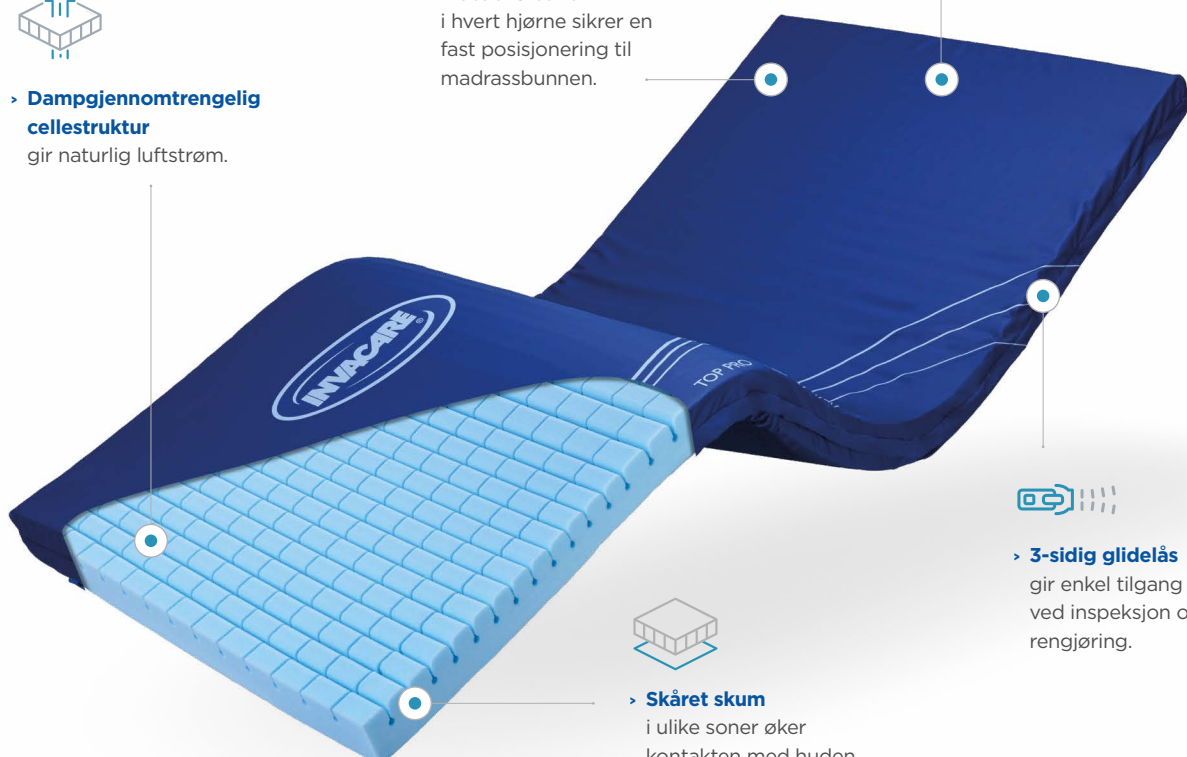

> **3-sidig glidelås**
gir enkel tilgang ved inspeksjon og rengjøring.



> **Skåret skum**
i ulike soner øker kontakten med huden.



Flerveis stretchstoff



Hygiensk trekk som kan vaskes i maskin




Leveres komprimert

Dacapo Ampla

Vår nye høyspesifikasjonsmadrass gir effektiv trykkfordeling og mikroklimahåndtering for plus-size-pasienter

Madrassen er designet for å oppnå de kliniske resultatene som kreves og forventes av helsepersonell. Dette inkluderer optimal nedsenkning og omhylling, trykkfordeling og reduksjon av shear og friksjonskrefter.

Madrassens bredere dimensjoner bidrar til god og verdig støtte og sikrer maksimal komfort for pasienten i alle stillinger.

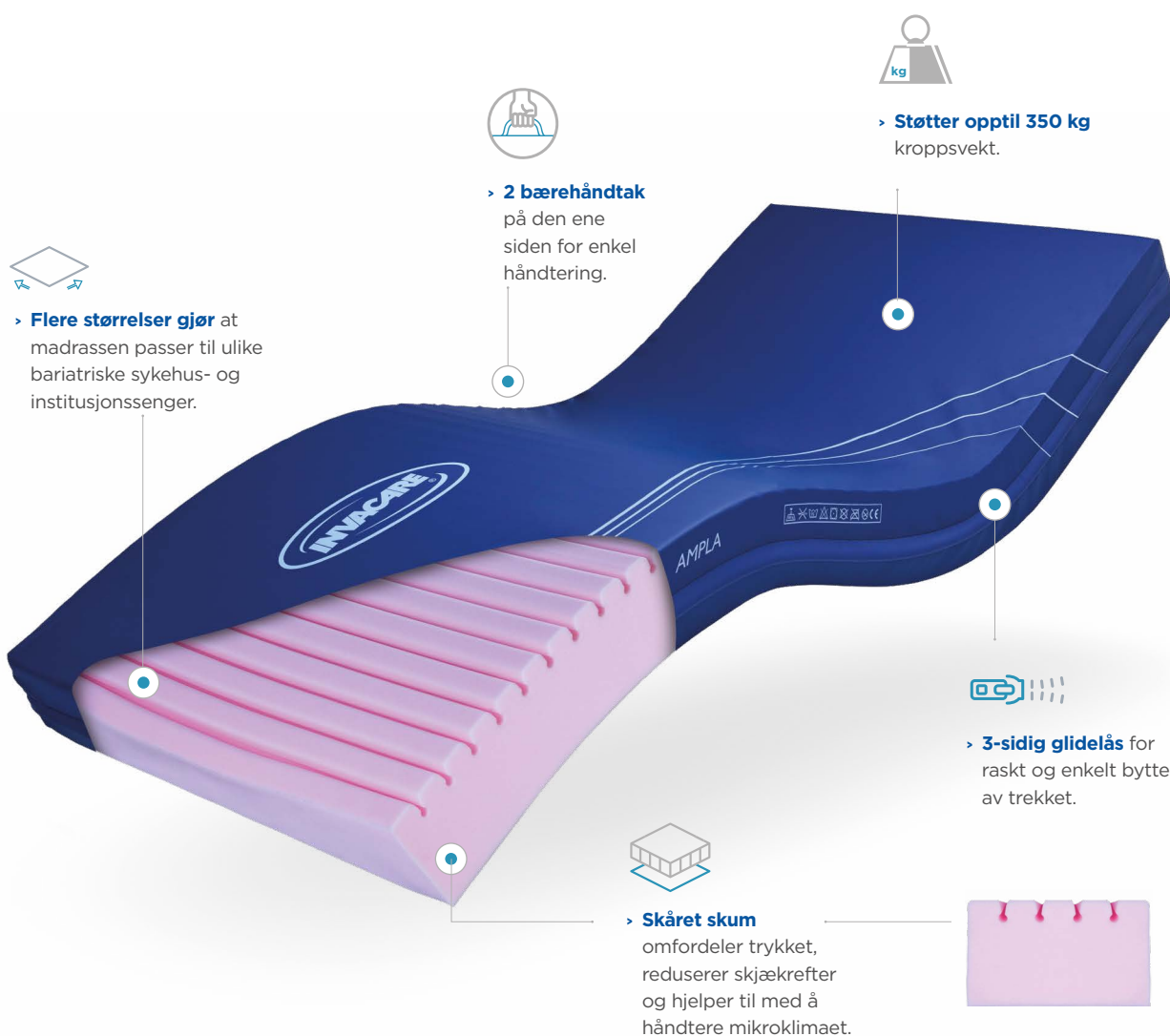

Egenskaper du kan forvente av en Dacapo-madrass:


Kvalitetssikret høyspesifisert skum


Mykt skum som gir god støtte


Slitesterkt og pustende materiale

Dacapo Kid

Vår spesialdesignede madrass for barn gir maksimal støtte og komfort i kombinasjon med vår medisinske barneseng NordBed Kid

Et enkeltlags høyelastisk skum med firkantede utskjæringer sikrer økt kontakt med huden for effektiv trykkfordeling. Det skårede skummet følger barnets kroppskonturer for økt komfort og støtte i alle posisjoner.


Det inntrengningssikre inkontinestrekke er designet med de høyeste standarder for kvalitet og hygiene. Dette gjør Dacapo Kid til en komfortabel og god madrass for alle barn.



► **Tilgjengelig i 6 størrelser** for å passe til de ulike NordBed Kid-sengene.





► **Støtter opptil 70 kg** kroppsvekt.

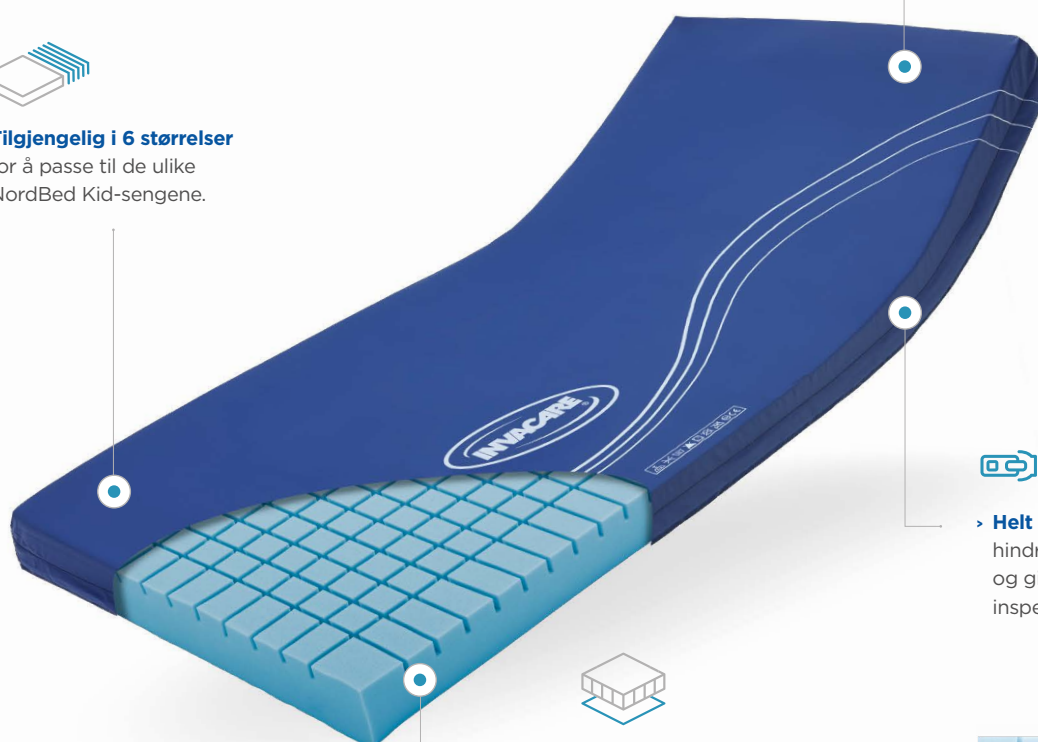

► **Helt skjult glidelås** som hindrer vanninntrenging og gir enkel tilgang ved inspeksjon og rengjøring.



► **Skåret skum** som følger kroppens konturer og reduserer shear og friksjon.

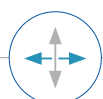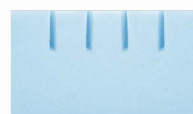

Flerveis stretchstoff



Hygiensk trekk som kan vaskes i maskin



Leveres komprimert

Klinisk guide

Alle Dacapo-madrassene er designet for å dekke ulike behov og ulike grader av risiko for trykksår.

Diagrammet nedenfor viser madrassene som dekker enten lav, middels eller høy risiko for trykksår.

Oversikten under er et fint utgangspunkt når man skal velge madrass ved forebygging av trykksår.



Lav



Medium



Høy


Lav risiko




Dacapo Top




Dacapo Top Pro

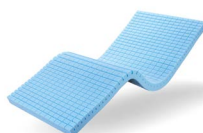

Dacapo Basic

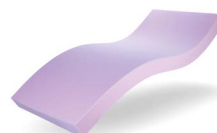

Dacapo 2 Sided

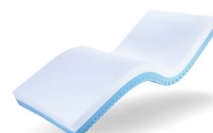

Trykk



Shear



Friksjon



Fuktighet



Temperatur



Stabilitet



Kg

130

150



130

130

Risikonivå

Komfort og forebygging

+ Enten man trenger en lavirisiko overmadrass eller en mer avansert trykkavlastende madrass, finnes det noe for enhver smak. Med Dacapo-serien kan du trygt stole på at du får en madrass med nødvendige funksjoner, som aktivt bidrar til forebygging av trykksår. Eksempler på slike funksjoner er slitesterke og pustende materialer, flerveis stretchstoff og positiv og effektiv håndtering av mikroklima.

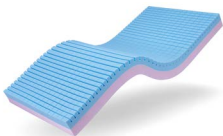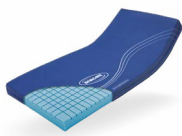Høyere risiko			Spesifikke segmenter	
Dacapo Excel	Dacapo ecogreen	Dacapo Premier	Dacapo Ampla	Dacapo Kid
				
				
				
				
				
				
				
150	150	180	350	70

Høyere grad av forebygging

Kvalitetssikret




Vi sikrer at alle våre kliniske madrasser leverer optimal kvalitet. I tillegg til trykkartlegging, inkluderer vår testing uavhengig holdbarhetstesting, cytotoksitetstesting, branntesting og akselerert aldring.

Tekniske data ▼

For mer informasjon om produktet, inkludert brukermanual, besøk vår hjemmeside [invacare.no](https://www.invacare.no)



Bredde ▼

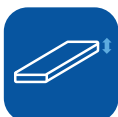

Høyde ▼



Lengde ▼



Vekt ▼



Brukervekt ▼



Vasketemperatur ▼

Dacapo Premier	800 – 1200 mm	150 mm	2000, 2100 mm	14 kg	180 kg	95 °C
Dacapo Excel	800 – 1200 mm	120, 140 mm	2000, 2100, 2200 mm	10 – 15 kg	130, 150 kg	95 °C
Dacapo Ecogreen	800-830-850-880-900-1050-1200 mm	150 mm	2000 mm	14 kg	150 kg	95 °C
Dacapo 2 Sided	800, 850 mm	150 mm	2000, 2050 mm	11.5 – 17 kg	130 kg	95 °C
Dacapo Basic	800, 850, 900 mm	120 mm	2000 mm	8.5 – 12 kg	130 kg	95 °C
Dacapo Top	800 – 1200 mm	70 mm	1800 – 2150 mm	5 – 7.5 kg	130 kg	95 °C
Dacapo Top Pro	800 – 1200 mm	70 mm	2000, 2150, 2200 mm	4.5 – 5 kg	150 kg	95 °C
Dacapo Ampla	850 – 1200 mm	150 mm	2000, 2050 mm	10 – 14 kg	350 kg	95 °C
Dacapo Kid	600 – 800 mm	100 mm	1358, 1800 mm	5 – 6.5 kg	70 kg	95 °C

Artikel-nummer ▼	Madrass ▼	Størrelse ▼
60131888	Madrass Dacapo Premier	85x200x15 Inkotrekk
1632249E	Madrass Dacapo Premier	90x200x15 Evactrekk
60131889	Madrass Dacapo Premier	90x200x15 Inkotrekk
60131046	Madrass Dacapo Premier	90x210x15 Inkotrekk
60131887	Madrass Dacapo Premier	80x200x15 Inkotrekk
60130941	Madrass Dacapo Excel	85x200x12 Inkotrekk
60130944	Madrass Dacapo Excel	90x200x12 Inkotrekk
60130946	Madrass Dacapo Excel	105x200x12 Inkotrekk
60130948	Madrass Dacapo Excel	120x200x12 Inkotrekk
60130942	Madrass Dacapo Excel	85x200x14 Inkotrekk
60132097	Madrass Dacapo Excel	85x210x14 Inkotrekk
60130943	Madrass Dacapo Excel	88x200x14 Inkotrekk
60130945	Madrass Dacapo Excel	90x200x14 Inkotrekk
60130951	Madrass Dacapo Excel	90x210x14 Inkotrekk
60130953	Madrass Dacapo Excel	90x220x14 Inkotrekk
60130947	Madrass Dacapo Excel	105x200x14 Inkotrekk
60130949	Madrass Dacapo Excel	120x200x14 Inkotrekk
60131807	Madrass Dacapo Ecogreen	80x200x15 Inkotrekk
60132328	Madrass Dacapo Ecogreen	83x200x15 Inkotrekk
60131808	Madrass Dacapo Ecogreen	85x200x15 Inkotrekk
60132329	Madrass Dacapo Ecogreen	88x200x15 Inkotrekk
60131809	Madrass Dacapo Ecogreen	90x200x15 Inkotrekk
60131810	Madrass Dacapo Ecogreen	105x200x15 Inkotrekk
60132991	Madrass Dacapo Ecogreen	120x200x15 Inkotrekk
60130985	Madrass Dacapo 2 sided	80x200x15 Inkotrekk
60130986	Madrass Dacapo 2 sided	85x200x15 Inkotrekk
1630612	Madrass Dacapo 2 sided	90x200x15 Inkotrekk
60130988	Madrass Dacapo 2 sided	85x205x15 Inkotrekk
60131582	Madrass Dacapo Top	105x200x7 Inkotrekk
60131583	Madrass Dacapo Top	120x200x7 Inkotrekk
60133243	Madrass Dacapo Top	120x220x7 Inkotrekk
60133241	Madrass Dacapo Top	75x190x7 Inkotrekk
60133220	Madrass Dacapo Top	75x200x7 Inkotrekk
60131580	Madrass Dacapo Top	80x200x7 Inkotrekk

Artikel-nummer ▼	Madrass ▼	Størrelse ▼
60131579	Madrass Dacapo Top	85x180x7 Inkotrekk
60131581	Madrass Dacapo Top	85x200x7 Inkotrekk
60133221	Madrass Dacapo Top	85x220x7 Inkotrekk
60131578	Madrass Dacapo Top	90x200x7 Inkotrekk
60133242	Madrass Dacapo Top	90x210x7 Inkotrekk
60131584	Madrass Dacapo Top	90x215x7 Inkotrekk
60133222	Madrass Dacapo Top	90x220x7 Inkotrekk
60131591	Madrass Dacapo Top pro	105X200X7 Inkotrekk
60131590	Madrass Dacapo Top pro	105X200X7 Inkotrekk
60131587	Madrass Dacapo Top pro	80X200X7 Inkotrekk
60131588	Madrass Dacapo Top pro	85X200X7 Inkotrekk
60131589	Madrass Dacapo Top pro	90X200X7 Inkotrekk
60130967	Madrass Dacapo Ampla	85x200x15 Inkotrekk
60130968	Madrass Dacapo Ampla	90x200x15 Inkotrekk
60130970	Madrass Dacapo Ampla	116x200x15 Inkotrekk
60130971	Madrass Dacapo Ampla	120x200x15 Inkotrekk
60130972	Madrass Dacapo Ampla	116x205x15 Inkotrekk
1632978	Madrass NordBed Kid	77x136x10 bomullstrekk til polster
1632979	Madrass NordBed Kid	77x156x10 bomullspolster
1632980	Madrass NordBed Kid	77x175x10 bomullstrekk til polster
1632975	Madrass NordBed Kid	79x136x10 bomullstrekk
1632853	Madrass NordBed Kid	77x136x10 inkotrekk til polster
1632151	Madrass NordBed Kid	79x136x10 inkotrekk
1632854	Madrass Nordbed Kid	77x156x10 Inkotrekk til polster
1632152	Madrass Nordbed Kid	79x156x10 Inkotrekk
1632976	Madrass NordBed Kid	79x156x10 bomullstrekk
1632855	Madrass NordBed Kid	77x175x10 Inkotrekk til polster
1632977	Madrass NordBed Kid	79x175x10 bomullstrekk
1632153	Madrass NordBed Kid	79x175x10 inkotrekk

Essential Touch

Vendbar og trykkavlastende skummadrass

Nøkkelhullsformede utskjæringer i ulike anatomiske soner - for økt komfort og optimal trykkavlastning.



En komfortabel investering

For forebygging av trykksår



Yes, you can.®

En komfortabel investering



Profilering på begge sider

- Madrassen har tosidig profilering og kan vendes og brukes på begge sider. Dette bidrar til å øke produktets levetid.



1



Høy komfort

- Utskjæringene i skummet gjør at brukeren synker godt ned i madrassen som igjen bidrar til økt komfort.
- De identiske utskjæringene på begge sidene av madrassen gjør at madrassen kan snus inni trekket og brukes på begge sider. Dette bidrar igjen til økt levetid på madrassen.
- Slitesterkt inkontinenstrekk med 2 robuste håndtak, samt glidelås på 3 sider, bidrar til enklere håndtering ved bruk, inspeksjon og vask.

2



Redusert shear og friksjon

- De unike utskjæringene i skummet bidrar til redusert shear og friksjon ved reposisjonering i seng.
- Vannresistent inkontinenstrekk i polyuretan og flerveis stretch bidrar til redusert shear og friksjon, og der igjen økt komfort for bruker.
- Passer godt for ulike pleiemiljøer.

3



God trykkfordeling

- De nøkkelhullsformede utskjæringene gir skumfirkanter som beveger seg uavhengig av hverandre.
- De unikt utskårede skumfirkantene gjør at brukeren synker godt ned i madrassen og omslutes av det komfortable og trykkfordelende skummet.
- Ulike anatomiske soner med små utskjæringer i fot- og hodeende, og større skumfirkantener omkring rygg og sete, bidrar til best mulig trykkfordeling- og avlastning for den sengeliggende brukeren.

På anbud med NAV



Glidelås på tre sider

- 3-sidig glidelås gjør det enkelt å undersøke madrassen og fjerne trekket for vask. Den gode og kraftige dryppkanten over glidelåsen beskytter i tillegg mot væskeinntrengning.

Tekniske data ▼



Tilgjengelige størrelser ▼

200 × 83 × 15 cm

200 × 85 × 15 cm

200 × 88 × 15 cm

200 × 103 × 15 cm

200 × 118 × 15 cm

205 × 88 × 15 cm

220 × 90 × 15 cm



Maksimal brukervekt ▼

150 kg



Maksimal vasketemperatur på trekk ▼

95°


Artikkelnummer ▼	HMS-nummer ▼	Størrelse ▼	Beskrivelse ▼
1631831	313849	88 x 200 x 15 cm	Essential Touch skummadrass, med polyuretanbelagt inkotrekk
1631830		83 x 200 x 15 cm	Essential Touch skummadrass,, med polyuretanbelagt inkotrekk
1631885		90 x 200 x 15 cm	Essential Touch skummadrass,, med polyuretanbelagt inkotrekk

Manufactured to: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS EN 7177: Crib Source 5

God sykepleie er essensielt i behandlingen av trykksår. Essential Touch trykkavlastende madrass kan bidra positivt inn i en målrettet behandlingsplan som har til hensikt å forebygge eller behandle trykksår - i kombinasjon med relevant utdanning, kliniske vurderinger og aktive handlinger som alle er grunnleggende faktorer i forebyggingen av trykksår. En rekke ulike vurderingsskalaer kan brukes som formelle metoder for å vurdere risikoen for utviklingen av trykksår, og bør brukes i kombinasjon med en uformell vurdering (sykepleievurdering) som en del av en helhetlig og individualisert plan.

Softform

Premier

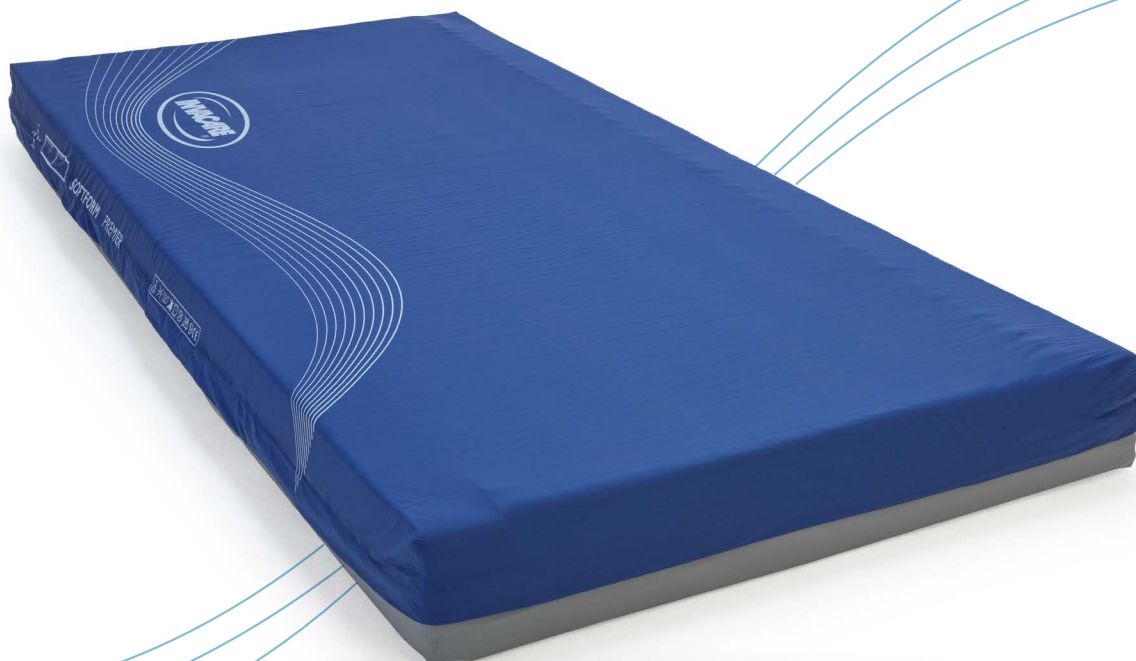

Trykfordelende skummadrass



Yes, you can.®



Softform Premier FS
(med helsveiset trekk)

Invacare **Softform Premier** er en antidecubitusmadrass som er utviklet for å oppnå god trykkfordeling og komfort. Under utformingen av **Softform Premier** er det lagt spesielt vekt på trykkreduksjon ved hælene. En praktisk og holdbar madrass som tilpasser seg godt sengens innstillinger.

Forebygging av trykksår

- Invacare Softform Premier er en todelt madrass som består av et u-formet underlag og en skumkjerne som er skåret i ulike store firkanter for tilpasset trykkfordeling. Den nøkkelhullsformede skjæringen av firkantene gir økt effekt med tanke på reduksjon av skyvkreftene.

Helsveiset trekk -SRT

- Softform Premier finnes også i en utgave med helsveiset trekk spesielt utviklet for miljøer som stiller høye krav til kvalitet, som sykehus eller helsehus (Softform Premier FS). Trekket er laget av høyresistent polyuretan og sveisede sømmer i stedet for glidelås, som gir en ekstra beskyttelse og minimerer risikoen for at væske skal trenge inn. Trekket kan fåes med Crib5 eller Crib7.

Leveres med inkontinenstrekk

- Trekket er elastisk og fremstilt av vannavstøtende polyuretan. Det har sveisede sømmer, og glidelåsen er dekket med en dryppkant. Trekket beskytter madrassen og forlenger dens levetid.

Standard trekk tilfredsstiller Crib 5 for brannhemming.



Egenskaper ▼




Formet overflate ved hælene

- Skummet i fotenden er formet for å avlaste brukerens hæler, ettersom det ofte er høy risiko for å få trykksår her.



Praktiske bærehåndtak

- To bærehåndtak gjør madrassen enkel å transportere.

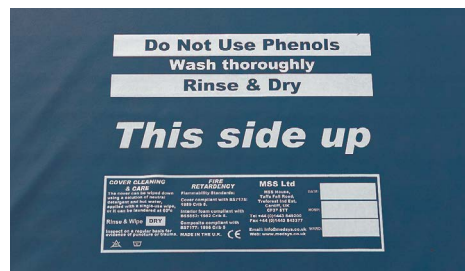

Trekk og skum er merket med «This side up»

- Madrassen krever ikke vending eller rotering. Dette gjør madrassen enkel å håndtere for helsepersonell.

Tekniske data ▼



Bredde:
830, 850, 880, 900,
1050, 1200 mm



Lengde:
2000 mm



Høyde:
152 mm



Vekt:
13 kg




Maks. brukervekt:
240 kg



Vask: 95°

Madrassen oppfyller følgende standarder:

BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match.
Innvendig skum: BS 5852: 1990 Crib Source 5;
Trekk: BS7175: 1989 Crib Source 5.

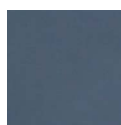

Baltisk
blå

Art. nr.	Skum- og luftmadrass	Madrassmål cm	Materiale
1486846	SOFTFORM PREMIER	83X200X14 cm	Inkotrekk
1486847	SOFTFORM PREMIER	85x200X14 cm	Inkotrekk
1486915	SOFTFORM PREMIER	88X200X14 cm	Inkotrekk
1486848	SOFTFORM PREMIER	90X200X14 cm	Inkotrekk
1629058	SOFTFORM PREMIER	105x200x15 cm	Inkotrekk
1632289	SOFTFORM PREMIER	120x200x15 cm	Inkotrekk

InvaSoft™ Hybrid

avansert hybrid teknologi



Hybrid madrass uten pumpe

Håndterer trykk, friksjon og mikroklima



Yes, you can.®

Revolusjonerende Hybrid madrass uten pumpe

Vår nye InvaSoft™ Hybrid madrass har avanserte funksjoner innenfor hybridteknologi for å bedre håndtere kritiske faktorer knyttet til trykksår.

InvaSoft™ Hybrid bruker en innovativ kombinasjon av materialer og teknologi for å forbedre trykkavlastning, redusere skyvekrefter og friksjon, samt sikre en effektiv håndtering av mikroklima.

Gjennom dedikert forskning og designprogram inkludert et samarbeid med eksperter innen

levedyktighet for vev, er InvaSoft™ Hybrid en enkel og effektiv løsning designet for å møte de mange utfordringer vi møter i forskjellige omsorgsmiljøer.

Uavhengige testresultater bekrefter også at Invasoft er svært effektiv ved å håndtere de viktigste eksterne faktorene ved utvikling av trykksår.



Trek




- > **Slitesterk medisinsk materiale** med høy luftgjennomtrengelighet.



- > **Materiale som er elastisk i flere retninger** reduserer forskyvning og friksjon.


1

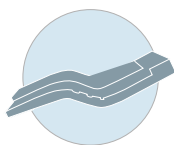

Trykkfordeling

Vår innovative **auto-justeringsteknologi** gir god trykkfordeling i alle posisjoner, uten behovet for en pumpe.

2

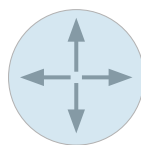

Redusering av skyvekrefter og friksjon

InvaSoft™ Hybrid har **innovative materialer** som reduserer skyv- og friksjonskrefter.

5°

- > **Skrånende helseksjon og beskyttende lag** som flytter vekten fra det sårbare hælområde



- > **Mykt, fleksibelt topplag** gir brukeren maksimal komfort og støtte.



- > **Åtte horisontale luftceller** for individualisert reaktiv trykkfordeling.



- > **Reduksjon av overflødig varme** og fuktighet gjennom spesialutformede utskjæringer.

3



Mikroklima Regulering


En **banebrytende luftstrøm uten pumpe (N.P.A.T.)**, InvaSoft™ Hybrid gir en kontinuerlig regulering av mikroklima.



- › **Eksepsjonell luftsirkulasjon** med et åpent strukturert og støttende nudelmateriale.



- › **Profilert skum** for ekstra komfort og trykkfordeling.

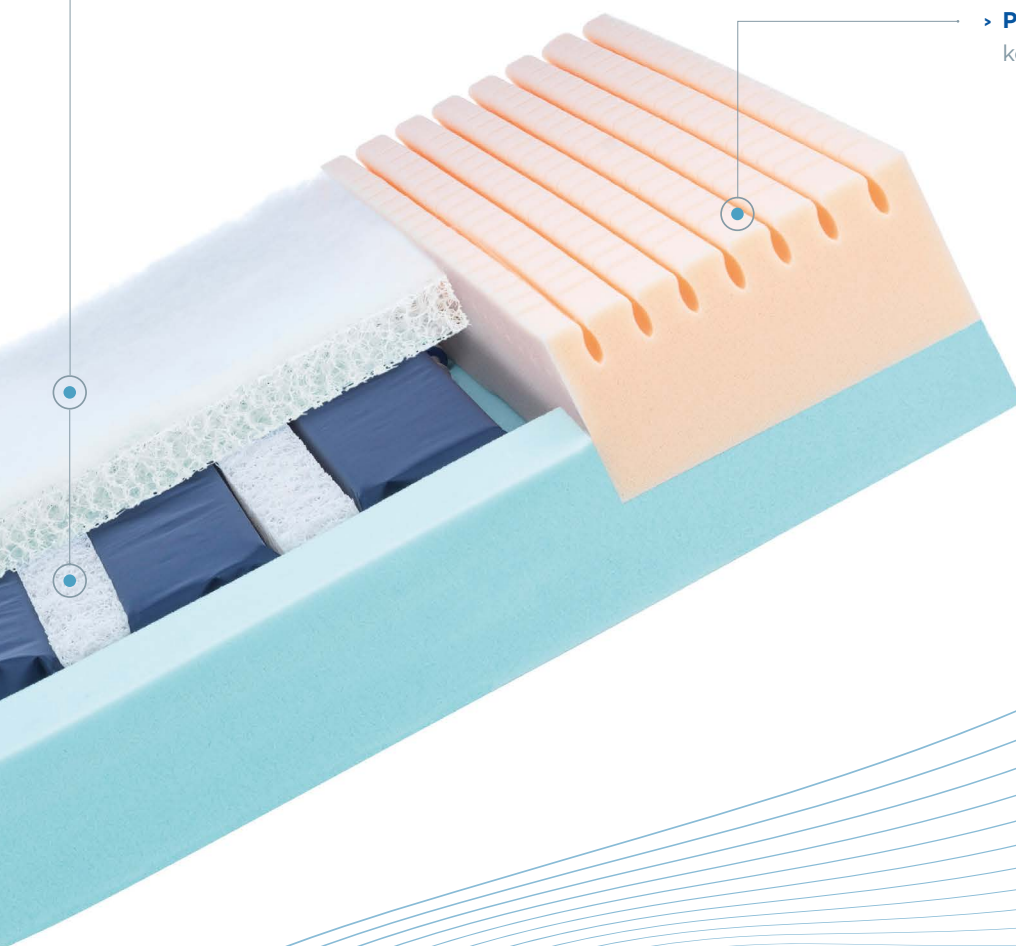

Brukerens komfort



- › **Ultramyk og støttende** lag for ekstra komfort og stabilitet.



- › **230 kg brukervekt** gir god støtte.

Brukervennlig Effektiv Vedlikehold

Kostnadseffektiviteten og de kliniske fordelene med hybridmadrasser blir stadig mer anerkjent. Den modulære designen og komponentene til InvaSoft™ Hybrid er alle utskiftbare, noe som maksimerer produktets levetid, reduserer kostnader og minimerer miljøpåvirkningen.



Brukervennlig

Enkel å bruke, ingen komplisert installasjon er nødvendig.

Enkel å rengjøre, noe som garanterer en rask rotasjon mellom pasientene.

Lett å vedlikeholde, hovedkomponentene kan enkelt byttes ut uten behov for spesialverktøy eller spesialkunnskap



Effektiv

Effektiv og uavhengig påvist **omfordeling av trykk**.

Effektiv og uavhengig påvist **reduksjon av forskyvning og friksjon**.

Effektiv og uavhengig påvist **mikroklimahåndtering**.



Vedlikehold

Ingen forebyggende vedlikehold nødvendig.

Ingen elektrisk pumpe nødvendig og bidrar derfor til et miljøvennlig system med et lavt karbonutslipp.



Modulær design betyr at hovedkomponenter kan individuelt erstattes.

Kostnadseffektivitet

Kliniske fordeler

Enkel løsning



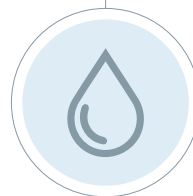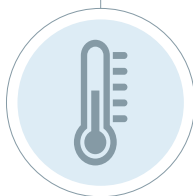


Uavhengige tester

InvaSoft™ Hybrid har gjennomgått streng testing via Berlin Cert, et uavhengig testanlegg med spesifikk erfaring innenfor madrasser. Testene sammenlignet InvaSoft™ Hybrid med tre ledende hybridmadrasser innenfor områdene trykk, friksjon og håndtering av mikroklima.


Klinisk Excellens

InvaSoft™ Hybrid viste overlegen prestasjon innen temperatur og fuktighetshåndtering - utkonkurrerte alle konkurransedyktige hybridmadrasser.

TEMPERATUR

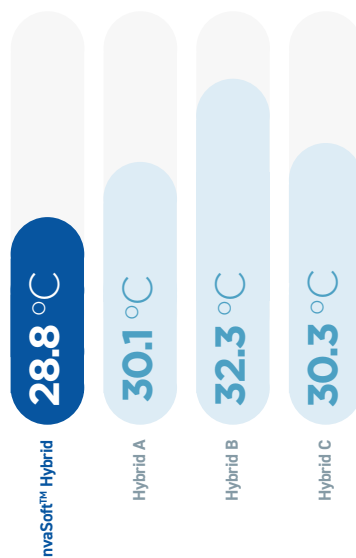

FUKTIGHET

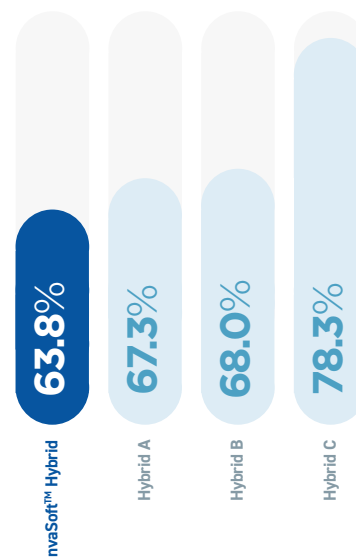

*Sammenlignende tester med tre ledende hybridmadrasser.


Tekniske data ▼

For mer informasjon om dette produktet, inkludert bruksanvisningen, besøk vår hjemmeside: www.invacare.no



Bredde ▼

83, 85, 88 cm

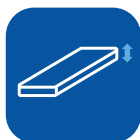

Høyde ▼

17 cm



Lengde ▼

200, 210 cm



Vekt ▼

18 kg



Brukervekt ▼

230 kg



Vasketemperatur ▼

95 °C

Art nr. ▼

1633301	Madress InvaSoft Hybrid	83x200x17
1633302	Madress InvaSoft Hybrid	85x200x17
1633303	Madress InvaSoft Hybrid	88x200x17

Softform Premier

Active 2 RX



Statisk og dynamisk trykkfordelende skummadrass

ENKEL OG TRYGG I BRUK | DIGITAL PUMPE | MODULÆR OPPBYGNING



Yes, you can.®

Invacare® **Softform Active® 2 RX** er en hybridmadrass som har et innlagt vekseltrykk mellom et lag profilert- og et lag stabiliserende høykvalitetsskum. Madrassen brukes med eller uten aktivering av vekseltrykk. Uten vekseltrykk aktivert, beholder den posisjon som en statisk skummadrass for pasienter med middels risiko for trykksår. Dersom bruker har behov for en dynamisk madrass, kan man enkelt koble til pumpen, som gir madrassen en overflate med vekslende trykk. Dette kan gjøres uten å flytte brukeren, slik at pasientens komfort ivaretas.



Statisk overflate

- Spesialskummet tilbyr en komfortabel og effektiv trykkfordelende overflate for pasienter med middels risiko for utvikling av trykksår, samt for de med skader i huden. Skummet er soneinndelt i ulike firkanter, for tilpasset trykkfordeling. Dette gir madrassen helt spesielle mikroklimatiske og trykkfordelende egenskaper.

Dynamisk overflate

- Pumpen aktiveres enkelt og gir brukeren ytterligere terapeutisk behandling via de bueformede luftcellene som ligger mellom de to skumlagene. Luftcellene veksler i sykluser på 10 minutter og gir trykkavlastning under vekslingene.

Hybridteknologi

- Kombinasjonen av spesialskum og de spesialdesignede bueformede luftcellene, gir en komfortabel overflate som øker trykkfordelingen og egner seg til de fleste pasientgrupper. Hybrid-terapi er egnet for de aller fleste behov, fra intakt hud til alvorlige trykksår. Ved aktivering eller deaktivering av RX-pumpen, kan type behandling tilpasses raskt etter individuelle behov og ønske om komfort, uten å måtte flytte brukeren.

Egenskaper ▼



Luftceller

- Invacares bueformede luftceller vinkler ergonomisk pasientens konturer og sørger for god støtte under hele kroppen og gir en optimal vekslende trykkfordeling.



Tildekket slange

- Slangen har et trekk rundt seg av sikkerhets- og hygienehensyn.



Kabelhåndteringssystem

- Et enkelt knappesystem langs kanten av madrassen sikrer at strømkabelen er trygt sikret mens madrassen er i bruk.

Egenskaper ▾



«Plug 'n' play» Digital pumpe

- Koble til, slå på, og pumpen er klar til bruk! Pumpen er stille i bruk og vil ikke forstyrre pasientens søvn.



Modulær konstruksjon

- Madrassen er konstruert slik at det er enkelt å skifte ut de ulike bestanddelene.



Innovativ glidemekanisme

- Shear-krefter er en av hovedårsakene til utvikling av trykksår (EPUAP Clinical Practice Guidelines, 2014). **Softform Premier Active 2 RX** tilbyr en innovativ glidemekanisme, som signifikant reduserer shear-kreftene ved bruk i en profilert seng.



Spesialsikum

- Dersom det skulle oppstå strømbrydd, kan brukeren forbli liggende godt og trygt på madrassens spesialsikum, uten behov for akutt hjelp eller forflytnig.

En komplett løsning

- **Softform Premier Active 2 RX** kombinerer trykkfordelende kvaliteter fra det oppskårede og sone-inndelte spesialsikumet, samt fra luftcellene i midten av madrassen. Luftcellene aktiveres etter eget ønske og behov for ytterligere terapi. Dette sikrer at brukeren alltid har god støtte og trykkfordelende egenskaper i madrassen.

For å bekjempe kostbare og tidkrevende problemer som oppstår ved skadede madrassstrekk har Invacare utviklet et «gjennomtrengningsbestandig» trekk (SRT). Dette spesialtrekket er utviklet for å kunne møte rengjøringsregimene som er påkrevd i et helsemiljø. For mer informasjon om SRT, se www.thinkpressurecare.co.uk/clinical-papers/strikethrough-resistant-clinical-articles/



Tekniske data ▼

	Bredde	Lengde	Høyde	Vekt	Maks brukervekt	Vask	Farge
Softform Premier Active 2 Madrass	830 - 900 mm	1810 - 2100 mm	152 mm	14 kg	247,6 kg	80°	Baltisk blå
Flere størrelser kan produseres ved forespørsel							

	Bredde	Lengde	Høyde	Vekt	Pumpe	
Active 2 RX pumpe	105 mm	275 mm	155 mm	1,75 kg	Støynivå = 24 dB	
						Produsert i henhold til: European Standard: BS EN 597-1 Cig European Standard: BS EN 597-2 Match BS7177:1996 Crib 5.

- Oppskåret, soneinndelt spesialsukum i madrassens overflate
- Aktiv luftcelle-behandling ved behov
- Klinisk bevist at madrassen passer til alle kategorier av trykksår
- Gjennomtrengningsbestandig (SRT) madrassstrekk
- Egnet for høyrisikopasienter
- Trekk med brannhemmende egenskaper, velg mellom: Crib 5 eller Crib 7
- Maksimal brukervekt 247,6 kg
- Brannhemmende trekk egenskaper, velg mellom: Crib 5 eller Crib 7
- Maksimal brukervekt 247,6 kg

Artikkelnummer	Hybrid madrass - Luft og Skum	Madrass mål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
1630033	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	83x200x15,2	Spesialsukum/ polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/ dynamisk med pumpe
1630034	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	85x200x15,2	Spesialsukum/ polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/ dynamisk med pumpe
1630035	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	88x200x15,2	Spesialsukum/ polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/ dynamisk med pumpe
1630036	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	90x200x15,2	Spesialsukum/ polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/ dynamisk med pumpe
1629800	Pumpe Softform Premier Active 2 RX			

Selv den aller beste madrassen kan ikke alene forhindre eller helbrede trykksår, den skal alltid inngå i en komplett pleieplan.

For mer informasjon om produktene og produktenes brukermanual, vennligst se www.invacare.no.



SoftCloud™

Dynamiske vekseltrykkmadrasser



ALLSIDIG | INTUITIVT DESIGN | KOMFORT



Yes, you can.®

Invacare SoftCloud-serien

Vekseltrykk-teknologi anbefales for å oppnå forebygging og håndtering av trykksår døgnet rundt, kombinert med individuell overvåkning, reposisjonering og sårpleieprogram.

Helsepersonell møter ofte situasjoner hvor pasienten ikke selv er i stand til reposisjonering. Under disse omstendighetene anbefaler EPUAP å bruke et aktivt støtteprogram som en del av trykksårforebyggingen.

Invacare SoftCloud madrasser og overmadrasser består av aktive støtteflater av høy kvalitet, designet for pasienter med svært høy risiko for å utvikle trykksår. Det vekslende trykket er designet for å omfordele trykk flere ganger hver time, selv om pasienten ikke beveger seg.



"Bruk en aktiv støtteoverflate (overmadrass eller madrass) for personer med høy risiko for trykksår når hyppig manuell reposisjonering ikke er mulig" (EPUAP,2014)

NYE

EGENSKAPER

1

Intuitivt design

- En moderne og intuitiv kontrollenhet



2

Automatisk justering

- Sørger for klinisk riktig støtte for å sikre pasientens komfort





3

Maksimal fast-knapp

- Gir en fast overflate for enklere sengetøyskift og reposisjonering av pasient.

► Håndtak

For enkel madrasshåndtering og transport.

► Sikkerhetsremmer

Tillater sengen å være løst festet til madrassen samtidig som tilgangen til HLR-sikringen er fri.

► Trekk med glidelås

360-graders glidelås på toppen av trekket forenkler fullstendig fjerning av trekket ved vask.

► Hengslet rygg

Madrassen er konstruert for å hindre at luftcellene glir ned når hjertebrettet heves, og for å motvirke friksjon (gjelder kun SoftCloud Pro).

► Permanent avlastning av hælen

De fem hælcellene på SoftCloud Pro tillater permanent avlastning av pasientens hæl. Denne funksjonen er ideell for de fleste pasienter med eksisterende hælår.

► Kabelstyringssystem

Ingen etterfølgende strømkabler.

► CPR-stropp

Dersom det oppstår en situasjon hvor det er behov for HLR, skal man dra i den gule stroppen merket CPR. Madrassen tømmes da umiddelbart for luft i bryst- og hodedelen.

► Transportmodus

En transportklemme kan festes på slangen under transport, for å sikre at luften holder seg i madrassen når den er frakoblet pumpen.



SoftCloud-serien

Serien består av fire alternativer, som alle er enkle i bruk:

Delkontrakt 4

På anbud
med NAV



SoftCloud Top

- ▶ Overmadrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 12 minutter
- ▶ 1 av 2 Syklus
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

SoftCloud Air

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 12 minutter
- ▶ 1 av 2 Syklus
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

SoftCloud Ace

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 10 minutter
- ▶ 1 av 3 Syklus
- ▶ Dampgjennomtrengelig trekk med sveisede sømmer
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

SoftCloud Pro

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 10 minutter
- ▶ 1 av 3 Syklus
- ▶ Permanent oppblåste luftvegger gir fast sidestøtte med en stabil forflytningsplattform
- ▶ Egen hældel for sensitive hæler
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

Intuitive kontrollenheter

Kontrollenhetene til SoftCloud har et intuitivt display som kan brukes til å justere komfortnivåer ved å gi enten en 1 av 2 eller 1 av 3 vekslende trykkmodus sammen med et statisk alternativ.

Videre tillater en automatisk detekteringsfunksjon i kontrollenheten å automatisk registrere trykk fra kroppen, og justerer trykknivået deretter. Kontrollenhetene har både visuelle alarmer og lydalarmer som aktiveres ved lavt trykk eller strømbrudd. Det er også mulig å skru av alarmene ved rengjøring.



Tekniske data ▼

For mer informasjon om produktet samt produktets brukermanual, se www.invacare.no



Bredde ▼



Lengde ▼



Høyde ▼



Maks.
brukervekt ▼

SoftCloud Top

På anbud
med NAV

83-88 cm

200 cm

13 cm

200 kg

SoftCloud Air

83-88 cm

200 cm

18 cm

200 kg

SoftCloud Ace

83-88 / 103-116 cm

200 cm

20 cm

220 kg/ 350 kg

SoftCloud Pro

83-88 cm

200 cm

20 cm

220 kg



Dybde ▼



Bredde ▼



Høyde ▼

Kontrollenhet 1

12 cm

25 cm

24 cm

Kontrollenhet 2

12 cm

29 cm

25 cm

Farge ▼



Mørk blå

Fargen kan variere litt fra
fargen vist ovenfor.

Regulatoriske data ▼

Madrasen er produsert i henhold til:

European Standard: BS EN 597-1 Cig
European Standard: BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5.

Kontrollenhet

Lydnivå: ≤ 30 dB

Annen informasjon ▼


Denne madrassen vil bidra positivt i en komplett
pleieplan for trykksårforebyggende omsorg.

Tekniske data ▼

Art.nr ▼	HMS-nr ▼	Beskrivelse ▼	Madrassmål ▼	Materiale ▼
1630814	278302	Softcloud Top, overmadrass inkl.pumpe	83x200x13 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
1630815	278303	Softcloud Top, overmadrass inkl.pumpe	88x200x13 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
SP1630834	278305	Pumpe SoftCloud Top overmadrass		
SP1631166	278304	Bag SoftCloud Top overmadrass		
1630822		Softcloud Pro, madrass inkl.pumpe	83x200x20 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
1630823		Softcloud Pro, madrass inkl.pumpe	88x200x20 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
1630816		Softcloud Air, madrass inkl.pumpe	83x200x18 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
1630817		Softcloud Air, madrass inkl.pumpe	88x200x18 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
1630818		Softcloud Ace, madrass inkl.pumpe	83x200x20 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
1630819		Softcloud Ace, madrass inkl.pumpe	88x200x20 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
1630820		Softcloud Ace, madrass inkl.pumpe	103x200x20 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
1630821		Softcloud Ace, madrass inkl.pumpe	116x200x20 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk

Maxxcare Pro Evolution hælvavlaster tilgjengelig som tilbehør

På anbud med NAV

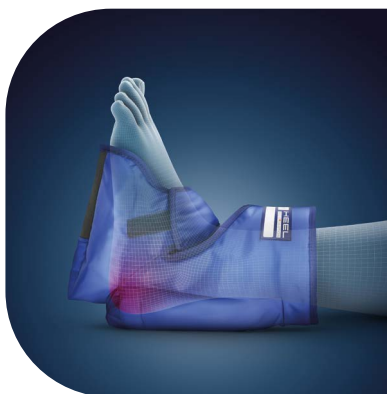

Maxxcare Pro Evolution hælvavlaster er nå tilgjengelig som tilbehør hos NAV. 100 % avlastning. Enkelt og effektivt.


[Les mer om Maxxcare](#)

Maxxcare®

Artikkelnummer ▼	HMS-numbers ▼	Størrelse ▼	Materiale ▼
060004	301470	S	Luftceller (Vicair SmartCells)
1578539	202746	Standard (M-L)	Luftceller (Vicair SmartCells)
060003	269681	XL	Luftceller (Vicair SmartCells)

Soft Tilt™

2.0

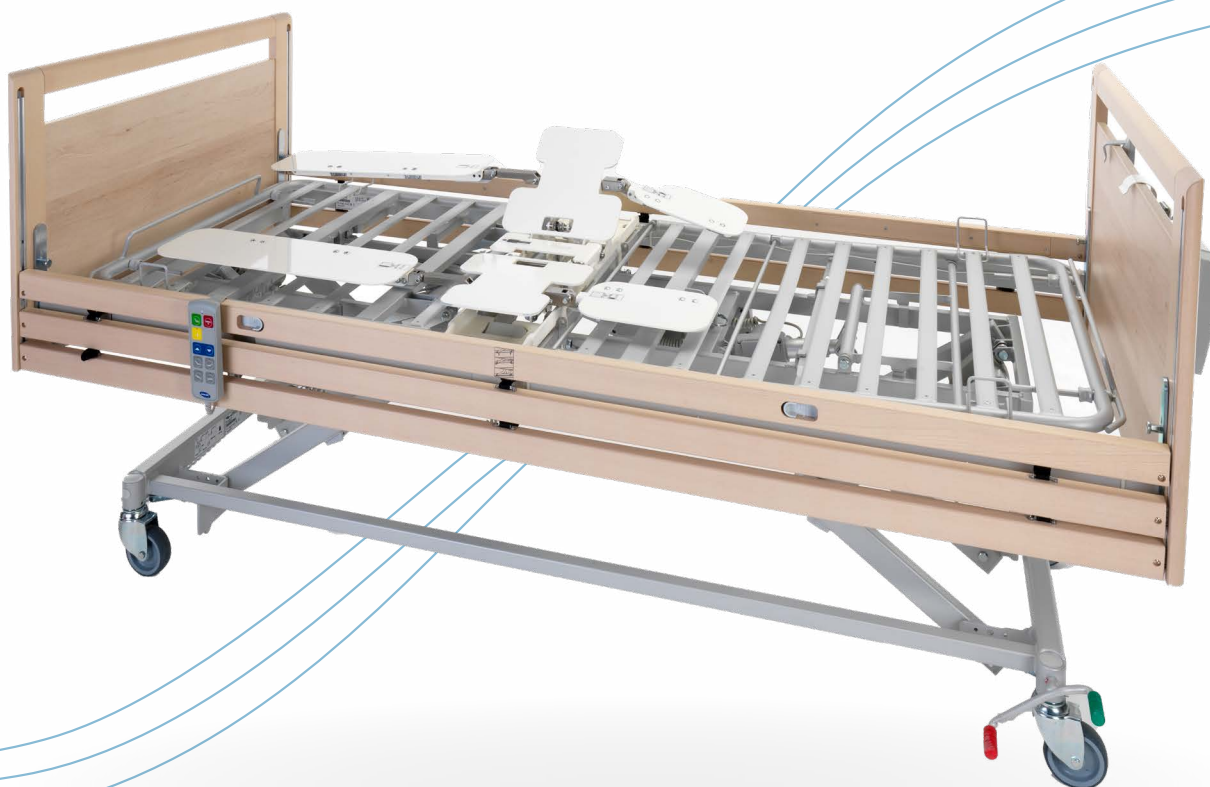

Innovativt vendesystem – verdifull støtte ved forflytning og posisjonering



Yes, you can.®

Invacare **Soft Tilt 2.0** er et unikt, innovativt vendesystem utviklet for automatisk vending og reposisjonering av bruker, samt for å hjelpe pleiepersonalet ved daglig stell av bruker.

Soft Tilt 2.0 er enkel å montere på sengene **SB755**, **NordBed** og **Etude Plus**. Den beveger seg smidig sammen med sengens bevegelige deler og madrassen.

- ▶ Automatisert trykkavlastning som forebygger trykksår
- ▶ Forenkler pleiarbeidet, ideelt for pleiere som jobber alene
- ▶ Økt komfort for bruker og pleier



Automatisert og manuell trykkavlastning og forflytning

Soft Tilt 2.0 består av to vinger som monteres langs pleiesengens liggeflate. Hevingen av vingene gjøres enten manuelt ved bruk av håndkontroll eller et automatisert program. Ved behov for automatisert og kontinuerlig trykkavlastning brukes en programmerbar kontrollboks. **Soft Tilt 2.0** kan programmeres til å automatisk heve pasienten i ulike intervaller og vinkler.

Forenkler pleiarbeidet

Soft Tilt 2.0 kan betjenes av én pleier alene. Ved hjelp av håndkontrollen kan vingene heves opptil 80°. Dette gjør det enkelt å komme til med forflytningshjelpemidler, sette på seil eller slynge, og utføre personlig pleie.

Soft Tilt 2.0 kan også brukes til å gi støtte ved inn- og utstigning av sengen. Dette beskytter pleieren mot potensielle belastningsskader i ryggen.

Komfort og sansestimulering

Soft Tilt 2.0 har utomatiserte bevegelser som er svært stille og smidige. Bevegelsene er sansestimulerende og gir en beroligende effekt. Dette gjør at **Soft Tilt 2.0** bidrar til en behagelig og uforstyrret søvn. Ved automatisk innstilling kan vingene heves til maks. 40°, slik at brukerens sikkerhet og komfort ivaretas.



Egenskaper og tilbehør




◀ Komfortabel, automatisert trykkfordeling

Når **Soft Tilt 2.0** er innstilt på et automatisert program, skjer endringen i posisjon på en måte som gir god støtte og komfort: før den første vingen heves til ønsket posisjon (maks. 40°), heves vingen på motsatt side en anelse. Når ønsket posisjon er oppnådd, går denne vingen tilbake til horisontal posisjon.

▲ Følger liggeflatens bevegelser

Soft Tilt 2.0 er enkel å montere og følger liggeflatens bevegelse på en svært smidig måte. Dette sikrer god posisjonering av brukeren og gir verdifull hjelp i forbindelse med forflytning.

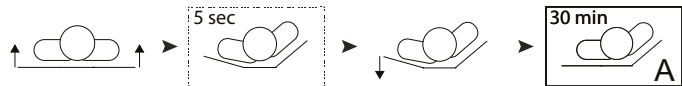

◀ Programmerbar kontrollboks

Kontrollboksen leveres med ett forhåndsprogrammert auto-program. I tillegg kan man lage to individuelt tilpassede programmer. De lagrede programmene kan aktiveres med kun ett tastetrykk.

▲ Manuell betjening

Når **Soft Tilt 2.0** styres manuelt ved bruk av håndkontrollen, kan vingene heves opp til 80°. Dette gir mulighet for enklere håndtering av bruker, for eksempel i forbindelse med pleie og ved bruk av forflytningshjelpemidler.



▲ Sansestimulering

Soft Tilt 2.0 kan programmeres til å vende liggeflaten rolig fra side til side mens begge vingene er hevet. Denne "vugge"-funksjonen kan virke beroligende.

▲ Enkel håndkontroll

Den brukervennlige håndkontrollen gjør det enkelt å styre **Soft Tilt 2.0** manuelt.

▲ Trekk

Blått trekk med elastiske stropper som sikrer at madrassen holdes på plass. Kan maskinvaskes på 80°.

Soft Tilt 2.0 - kompatibel med Invacare-senger



► Invacare® **SB 755**



NordBed-familien:

- Invacare® **NordBed Optimo,**
- Invacare® **NordBed Ultra**



► Invacare® **Etude Plus**

Tekniske data ▼

Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.



Maks. vinkel i
manuell modus ▼



Maks. vinkel i
automatisert
modus ▼



Tidsintervall i
automatisert
modus ▼



Maks. brukervekt ▼



Tyngste
enkeltdel ▼



Vask av trekk ▼

Soft Tilt

80°

40°

0-180 minutter

116-165 kg*

SWL 145-185 kg*


18 kg

80°

Samsvarer med IEC 60601-2-52

* Maks. brukervekt avhenger av hvilken seng Soft Tilt 2.0 brukes sammen med. Se brukermanualen til Soft Tilt 2.0 for mer informasjon.

Stål-farge ▼

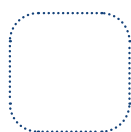

Hvit

NB: Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år eller pasienter med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Soft Tilt 2.0 er produsert av GDV Technology på vegne av Invacare.

Produkt

Art. nr.

SOFT TILT 2.0 NORDBED

1651469

SOFT TILT 2.0 SB755

1651473

Maxxcare Heel Pro Evolution hælavlaster

For optimal hælavlastning og posisjonering



Optimal komfort

100 % trykkavlastning



Yes, you can.®

Maxxcare

Maxxcare Heel Pro Evolution hælavlaster gir perfekt komfort og effektiv trykkavlastning i hælområdet for pasienter med høy risiko for utvikling av trykksår.

For pasienter med allerede utviklede trykksår på hælene kan Maxxcare Heel Pro Evolution være et effektivt supplement i behandlingen. Det unike designet gir 100 % trykkavlastning av hælene, noe som er anbefalt i de Europeiske retningslinjene fra 2019 (EPUAP 2019).

Reduserer trykk- og skyvekrefter

I klinisk planlegging og praksis er det svært viktig å ha et gjennomgående fokus på å redusere trykk- og skyvekrefter (shear) på pasientens hæler. Den bakre og fremtredende delen av hælen utsettes ofte for høyt trykk, selv ved bruk av trykkavlastende støtte (EPUAP 2019).

Basert på Vicair-teknologi!

Maxxcare Heel Pro Evolution er utviklet av Vicair, kjent for sine unikt utformede og trykkavlastende SmartCells. Hælavlasteren er laget av et slitesterkt lavfriksjonsmateriale, med et mykere materiale på innsiden for best mulig komfort. Vicair-teknologien kombinert med det unike designet bidrar dermed til optimal trykkfordeling, posisjonering og komfort.






Perfekt passform og trykkfordeling

Maxxcare Heel Pro Evolution er enkel, praktisk og effektiv å bruke, og kan benyttes både i liggende, sittende og gående posisjon (ved kortere avstander).

- ✓ Kan brukes for å forebygge trykksår for brukere med økt risiko for trykksår på og rundt hæler og ankler.
- ✓ Kan brukes ved behandling av allerede utviklede trykksår.
- ✓ Reduserer smerte ved lang tids sengeleie.
- ✓ Kan bidra til å forhindre droppfoot.
- ✓ Vedlikeholdsfritt produkt som kan maskinvaskes på 60 grader.
- ✓ Gir 100 % avlastning av hælen.

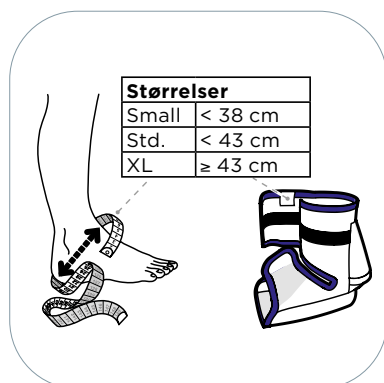

► **Maxxcare** er tilgjengelig i tre ulike størrelser for å passe flest mulig brukere. Brukere med vristmål på mer enn 43 cm anbefales bruk av XL. Se illustrasjon over for hvordan dette skal måles.



► **Maxxcare** har to praktiske og justerbare borrelåsbånd for individuell tilpasning og optimal komfort.

► **Maxxcare** kan brukes ved forflytning over kortere avstander, som f. eks. mellom seng og stol. Det sklisikre materialet på undersiden av sålen gjør forflytningen enda tryggere.



Tekniska data ▼



Vekt ▼

0,1 kg



Rengjøring ▼

60°C



Tørketrommel ▼

Skal ikke brukes i
tørketrommel



3 størrelser ▼

Small
Standard
XL



Garanti ▼

1 år

Art. nr.	Produkt	Størrelser	Materiale
060004	Hælavlaster	S	Luftceller
1578539	Hælavlaster	Standard (M-L)	Luftceller
060003	Hælavlaster	XL	Luftceller

For ytterligere informasjon om produktet, som eksempelvis produktets brukermanual, se vår hjemmeside www.invacare.no



Madrasshøyder

IEC 60601-2-52, den nye globale standarden for senger, krever en minimumsavstand fra toppen av madrassen til toppen av sidegrinden med minimum 220 mm når grinden er oppreist og en minimum avstand fra toppen av madrassen ned til toppen av grinden med 20 mm når grinden er nede.

Her finner du en oversikt over Invacare sine senger med compatible madrasshøyder og sidegrinder.

Invacare® SB 755																																	
Madrass høyde mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310			
Torill - Lang og kort											120 - 160																						
Line/Line Forlengbar											120 - 180																						
Britt V/Britt V Forlenget											120 - 180																						
Scala Basic 2							80 - 150																										
Scala Basic Plus 2							80 - 150																										
Scala Medium 2							80 - 200																										
Scala Decubi 2																				210 - 290													

Invacare® Octave																																
Madrass høyde mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310		
Line/Line Forlengbar														150 - 210																		
Britt V/Britt V Forlenget														150 - 210																		

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo

