

**rea**<sup>®</sup>

# Azalea<sup>®</sup>-familien



**Komfortstoler - en stor familie**

REA Azalea vinner i delkontrakt 8











**INVACARE**  
Yes, you can.<sup>®</sup>

*Invacare Rea* komfortstoler tilbyr brukerne den perfekte passform og komfort samt et bredt utvalg av modeller, tilleggsutstyr og kompatibilitet på tvers av *Rea*-produktene. For at brukeren kun skal behøve én type komfortstol, har *Rea* utviklet et sortiment av nisjemodeller. Alle **Azalea**-modeller bygger på samme chassis, noe som gir mulighet til variasjon for å møte brukerens behov. **Azalea** kan enkelt justeres for å gi best mulig støtte og komfort, ettersom både seteområdet og ryggen kan justeres i bredde og dybde. Stolene har også Dual Stability System® (DSS) (kroppslengdekompensasjon+ vektfordeling).

## Kroppslengdekompensasjon

De høye omdreiningspunktene rundt bekken og kneledd er viktig når man justerer sittestillingen. Omdreiningspunktene sørger for at kroppen beveger seg med normalt bevegelsesmønster ved regulering av sete og benstøtter. *Rea Azalea* er designet for å minimere skyvkrefter og virke trykkavlastende, noe som resulterer i en forbedret sittestilling. Hodestøtten og sidestøtten forblir i samme høyde uavhengig av om ryggen er vinklet eller ikke - noe som er avgjørende for god komfort for brukeren. Definer behovet du er ute etter, og du kan finne passende støtte med *Rea Azalea*-familien.

# Anbefalinger for valg av rygg. Matrix, ryggplate eller velcroygg

Ryggplate/Matrx (Velcroygg)	Ryggplate/Matrx (Velcroygg)	Ryggplate/Matrx Velcroygg	Ryggplate/Matrx (Velcroygg)	(Ryggplate/Matrx) Velcroygg
				
<b>Kort</b>	<b>Høy</b>	<b>Gjennomsnittlig</b>	<b>Bred</b>	<b>Bred overkropp</b>
Alle tilpasninger på innerste nivå	Forlenget høyde på rygg og setedybde	Rygg - og setetilpasninger i standard posisjon	Rygg og sete så bredt som mulig	Øvre del av ryggstøtten bred, sete smalt
(Ryggplate/Matrx) Velcroygg	(Ryggplate/Matrx) Velcroygg	Velcroygg	Velcroygg	(Ryggplate/Matrx) Velcroygg
				
<b>Bred underkropp</b>	<b>Bredere foran</b>	<b>Bredere bak</b>	<b>Kyphosis</b>	<b>S-formet rygg</b>
Nedre del av rygg er like bredt som setet	Øvre del av ryggen snus opp ned for å gi bedre plass rundt skuldrene	Nedre del av ryggen vendes opp ned for å gi bedre plass til brukerens sete	Midtre del av ryggen åpnet opp, strammere støtte i den nedre del av støtten	Nedre midtdel er stramm mens resten av støtten følger den S-formede ryggraden



### ◀ Valg for rygg

Flex 3 velcroygg (standard på Azalea) har borrelåsbånd som kan høyde- og breddejusteres samt vinkles og utvides. Kombineres med ryggoverdrag eller -pute. Hele ryggen kan også bli snudd opp ned.



Flex 3 ryggplate gir en fast og stabil støtte kombinert med en ryggpute. Ryggplaten er individuelt høyde- og breddejusterbar.

## Tilbyr utmerket sittekomfort og mange justeringsmuligheter

**Rea Azalea** er det naturlige valget for den moderate aktive bruker samt for de mer passive. Det komfortable setesystemet tillater brukeren å endre sittestilling, noe som sikrer maksimal komfort til enhver tid. Dette kombinert med gode kjøreegenskaper gjør **Azalea** til det ideelle valget.



### ◀ Rea Azalea

Den originale med store drivhjul, som brukeren kan kjøre selv.

## Setilt og ryggregulering gjør det mer komfortabelt

**Rea Azalea** og **Rea Azalea Assist** har 25° setilt og 30° ryggvinkling. Både tilt og ryggvinkling kan reguleres manuelt eller elektrisk ved hjelp fra en ledsager, og den med el-funksjon kan brukeren selv regulere.



### ◀ Rea Azalea Assist

Transportversjonen med små drivhjul.

## Tekniske data ▼


Se [www.invacare.no](http://www.invacare.no) for brukermanual og mer informasjon om produktet.

<b>Azalea / Assist</b>	390-440/ 440-490/ 490-540 (390-490/ 440-540/ 490-590 mm)	430 - 500 mm	400/450 mm	Fast rygg: 560-790 mm Regulerbar velcroygg: 540-715 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1°-23° (+1°-25°)	0°-30°
<b>Azalea / Assist</b>	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	900-1250 mm	950 - 1035 mm	34 kg (SB 44 kg)	Maks 135 kg	16,5 kg <sup>1</sup>	ISO 7176-19	7°

## Rammefarge ▼



## Trekk ▼

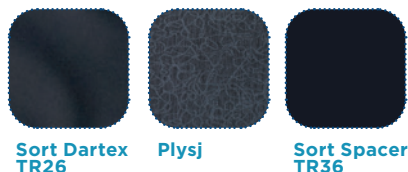

1. Elektrisk tilt og ryggregulering øker transportvekten med 4,2 kg



## Rea Azalea Base

Utformet for brukere som ønsker et skreddersydd sete kombinert med en førsteklasses rullestolbase. **Rea Azalea Base** er videreutviklet fra vår modell **Rea Azalea** og er en robust rullestol med samme egenskaper; f.eks. tilt og glidende balansepunkt. En nøkkelegenskap er at basen er utstyrt med «tilt in space function» – en vektfordelingsmekanisme som gir stabilitet for brukeren.



### ◀ Rea Azalea Base

Ideell for de som trenger en stabil og sikker stol med skreddersydd sete eller skall. Base kan anvendes sammen med alle deler og tilbehør til de øvrige Rea Azalea-modellene (utenom sidestøtte).

## Rea Azalea og Alber viamobil V25

I motsetning til mange andre drivaggregat, hindrer ikke **viamobil V25** tiltningsfunksjonen hos **Rea Azalea** (med en sittehøyde på 450 mm). Samtlige funksjoner på rullestolen forblir tilgjengelig. Det er derfor **viamobil V25** kan forbli montert på rullestolen etter at den har vært i bruk, uten at rullestolens funksjoner begrenses.



















### ◀ Rea Azalea & Alber viamobil V25

For full produktbeskrivelse av hjelpemotoren **viamobil V25**, trykk her for å se brosjyren på side 24.

## Tekniske data ▼

Se [www.invacare.no](http://www.invacare.no) for brukermanual og mer informasjon om produktet.

								
<b>Azalea Base</b>	340/390/ 440/490 mm (+ 50/100 mm)	380 - 450 mm <sup>1</sup> 430 - 500 mm	400/450 mm	600 <sup>1</sup> / 700 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1°-23° (22 / 24") (+1°-25°) (16")	0° - +30°
								
<b>Azalea Base</b>	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	1300 <sup>1</sup> / 1400 mm	950 - 1035 mm	20 kg	Max 135 kg	15 kg <sup>3</sup>	ISO 7176-19 <sup>2</sup>	7°

## Rammefarge ▼



1. For setebredde 340 mm
2. Krasjtestet i spesifikke konfigurasjoner
3. Elektrisk tilt og ryggregulering øker transportvekten med 4,2 kg





## Rea Azalea Minor - Utviklet for små voksne og tenåringer

Rea Azalea Minor er utformet for brukere som har bruk for en kortere setedybde og smalere sittebredde enn en standard komfortrullestol. Rea Azalea Minor fås med fast ryggplate eller velcroygg. Den regulerbare velcroyggen gir brukeren god støtte for optimal sittestilling.



### ◀ Rea Azalea Minor

Kjørehåndtakene er vinklet utover for å gi bedre komfort for ledsager.

## Rea Azalea Tall - Ingen begrensninger når det gjelder komfort for høye brukere

Rea Azalea Tall er utviklet for å møte behovene til høye brukere som har behov for lengre setedybde og høyere rygg høyde enn på en standard komfortrullestol. Tilpasset Rea Azalea, har Rea Azalea Tall alle de samme fordelene når det gjelder sikkerhet ved tilting av rullestolen, og tilbyr dessuten en unik vektfordelingsmekanisme.











### ◀ Rea Azalea Tall









Rea Azalea Tall er av aller høyeste kvalitet når det gjelder komfort og stabilitet. Det tilbys Azalea Tall ombygginsett til Azalea

## Tekniske data ▼

Se [www.invacare.no](http://www.invacare.no) for brukermanual og mer informasjon om produktet.

								
<b>Azalea Tall</b>	390-450/440-500/490-550 mm (390-490/440-540/490-590 mm)	480 - 550 mm	500 mm	Fast rygg: 560 - 790 mm Velcroygg: 540 - 715 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1°-23° (+1°-25°)	0° - 30°
<b>Azalea Minor</b>	340 - 440 mm	380 - 450 mm	400/450 mm	550 - 650 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	+1° to 25°	0° - 30°


  

								
<b>Azalea Tall</b>	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	1000 - 1300 mm	950 - 1085 mm	34 kg (SB 440 mm)	Maks. 135 kg	18,7 kg <sup>1</sup>	ISO 7176-19	7°
<b>Azalea Minor</b>	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	900 - 1250 mm	900 - 970 mm	32 kg	Maks. 75 kg	14,5 kg <sup>1</sup>	ISO 7176-19	7°

## Rammefarge ▼



## Trekk ▼

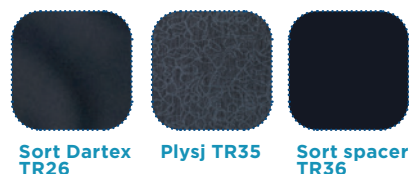

1. Elektrisk tilt og ryggregulering øker transportvekten med 4,2 kg



## En skreddersydd løsning for tyngre brukere

Rea **Azalea Max** er utviklet for å møte behovene til brukere med ekstra vekt (maks. 180 kg).

**Rea Azalea Max** utfyller den øvrige Rea **Azalea**-familien fra Invacare.

## Kompatibilitet

Rea **Azalea Max** tilbyr samme funksjoner som de øvrige rullestolene i Rea Azaleafamilien; f. eks. glidende balansepunkt og Dual Stability System (kroppslengdekompensasjon+vektfordeling). Stabiliteten i denne rullestolen kommer fra kroppslengdekompenseringen i ryggen samt benstøtten. Dette er en fordel for brukere som har liten eller begrenset bevegelighet samt for brukere som har vanskelig for å endre posisjon.



### ◀ Rea Azalea Max

Designet for å gi støtte og komfort til brukere med høy vekt.



### ◀ Vendbar velcroygg

Den øvre og nedre delen av ryggen har ulik form og er vendbar. Dette gir brukeren mulighet for mer plass i sete- eller brystområdet.

## Tekniske data ▼

Se [www.invacare.no](http://www.invacare.no) for brukermanual og mer informasjon om produktet.


	Setebredde ▼	Setedybde ▼	Setehøyde ▼	Rygghøyde ▼	Høyde armlener ▼	Lengde kne til hæl ▼	Setevinkel ▼	Ryggvinkel ▼
<b>Azalea Max</b>	550; 610 + 50 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 627 mm	1° - 20°	0°-30°
<b>Azalea Max Assist</b>	550; 610 + 100 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 627 mm	1° - 20°	0°-30°

	Total bredde ▼	Total høyde ▼	Total lengde inkl. fotstøtter ▼	Total vekt ▼	Maks. brukervekt ▼	Transportvekt fra ▼	Maks. helling ved bruk av parkeringsbrems ▼	
<b>Azalea Max</b>	SB + 250 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1135 mm	54 kg	maks. 180 kg	33 kg <sup>1</sup>	7°	1. Elektrisk tilt og ryggregulering øker transportvekten med 4,2 kg
<b>Azalea Max Assist</b>	SB + 220 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1135 mm	54 kg	maks. 180 kg	37 kg <sup>1</sup>	7°	

## Rammefarge ▼



## Trekk ▼

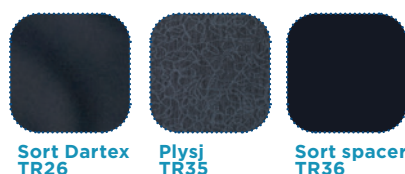

Rea, Rea design and DSS (Dual Stability System) design are registered trademarks of Invacare International. The Rea Azalea is designed with DSS (Dual Stability system). It provides the user with enhanced stability and safety when being tilted or the backrest is reclined.