

rea | *Clematis*[®]



Pålitelighet møter komfort

Hos Invacare[®] forstår vi at alle er forskjellige og at brukere har individuelle behov når det gjelder rullestolens innstillinger. Spesielt er det viktig at rullestolen kan tilpasses i sete – og ryggområdet for å bidra til at brukeren opprettholder optimal stabilitet. Dette er det tatt hensyn til i den nye modellen av Rea **Clematis**.

rea
Confidence in posture solutions

INVACARE
Yes, you can.[®]




Jevn vektfordeling

Rullestolen er utstyrt med tilt, noe som gir brukeren en rekke posisjonsmuligheter. Når setet tiltes vil trykkområdet skifte mellom setet og ryggen, og dermed virke forebyggende mot decubitus.

Stabil sitteposisjon

Rea **Clematis** er også utstyrt med en vinkelregulerbar rygg som gir bedre rom ved hofteområdet for økt komfort. For best mulig posisjon bør dette brukes sammen med setetiltet for å hjelpe brukeren til å stabilisere holdningen, og for å gi større rom for andre bevegelser.

Egenskaper og valg

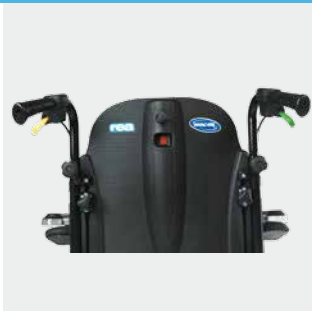

Det er to farget spaker for å betjene ryggvinkling og setetilt. Begge spakene er nært håndtaket slik at de er lette å nå for ledsager.



Armlen med vinkel

Formen på armlensputene gir mulighet til full setetilt og for god armstøtte når setet er tiltet.



Ryggør

Ryggen er festet til avrundet ryggør med klemmer. Ryggen kan tas av ved å løsne fire skruer.

Egenskaper og valg



Vinkelregulerbare benstøtter
med justerbare fotplater.
Lengdekompanserende ved
vinkling av benstøtten.



Dybdejusterbart sete
Setedybden er justerbar.

**Flo-formet setepute**

Det avrundede Flo-form setet er laget av Dartex® og gir optimal støtte når du sitter.

**Sidestøtte i et nytt design**

Sidestøtten er nå utformet for å passe bedre. Den er også tilgjengelig som utsvingbar.

**Forlengelse av setebredde**

Setebredden kan justeres maks. 2 cm ved hjelp av avstandsstykker.

Tekniske data



Rea **Clematis** 390, 440, 490 mm
+ 20 mm med avstandsstykker



420 - 480 mm



400 - 450 mm ¹



600 - 710 mm ^{1,2}



230 - 340 mm ¹



400 - 520 mm



-1° - +19°



Rea **Clematis** Setebredde
+ 210 mm



960 - 1120 mm ²



1120 - 1480 mm



-1° - +32°



Max 125 kg



Transportvekt
20,5 / 21 / 21,5 kg ³



30 / 32 / 33,5 kg



Rea **Clematis** Transport
Dimensjoner ⁴

- 1/ Målt fra seteplate
- 2/ Inkluderer ikke nakkestøtte eller kjørehåndtak
- 3/ Inkluderer ikke bakhjul, nakkestøtte, armstøtte, benstøtte, sidestøtte eller pute
- 4/ Bredde 390 (h 595 x L 840 x 585 mm)
Bredde 440 (h 595 x L 840 x 635 mm)
Bredde 490 (h 595 x L 840 x 685 mm)

Rea **Clematis** overholder ISO 7176-19 spesifikasjoner. Bemerk at det kan være spesielle betingelser med hensyn til tilbehør. For detaljerte opplysninger om transport i bus eller bil sittende i rullestolen vennligst konsulter følgende sider på våre nettsider: www.invacare-rea.com under Rea.

Rammefarge



Grå

Overtrekk



Sort dartex

Standard konfigurasjon:

- Setetilt og vinkelregulerbar rygg med gassfjær
- Høydejusterbar rygg med formet ryggpute Laguna
- Høydejusterbar nakkestøtte
- Justerbar setedybde
- Lengdejusterbar og vinkelregulerbar benstøtte
- Dybde- og vinkeljusterbare fotplater med hælklapper
- Drivhjul 24" kompakte dekk
- Svinghjul 8" medium hard
- Høydejusterbare kjørehåndtak
- Høydejusterbare armlen med mykt langt polster, Ducktail
- Løftepunkter er avmerket
- Rammefarge: Grå