



Alber® e-pilot®



Sett fart på din manuelle rullestol



E-pilot monteres raskt og enkelt, og din manuelle rullestol blir forvandlet til et **sporty og funksjonelt kjøretøy**.

E-pilot tar deg raskt og sikkert frem og tilbake til jobb, besøk hos venner og familie eller rundt i byen.

Med **E-pilot** kommer man seg rundt både komfortabelt og miljøvennlig.



Perfekt i hverdagen

E-pilot er perfekt for daglige rutiner, enten man skal på jobb, en tur til byen, besøke venner og familie eller luften hunden. **E-pilot** kan gjøre hverdagen enklere, morsommere og gi mer overskudd. **E-pilot** gjør lengre turer over ujevnt terreng, grus og i oppoverbakker mulig. Den kobles enkelt av etter bruk, slik at den manuelle rullestolen kan brukes på vanlig måte.

Moderne, innovativ og lydløs

E-pilot er laget i moderne design. Den er testet og godkjent hos TÜV og er full av innovative funksjoner. Motoren er ekstra kraftig med unik akselerasjon og gode kjøreegenskaper - og den kjører helt lydløs. Batteri og kabler er integrert i et smart design. **E-pilot** er utstyrt med kraftige hydrauliske skivebremses som kan brukes med høyre eller venstre hånd.

E-pilot har USB-inngang og en flyttbar 2,4" multifunksjonell skjerm med farger og nyttig informasjon om hastighet, rekkevidde, batterikapasitet, servicemeldinger osv.





Drivenheten

En elegant drivenhet designet i aluminium. **E-pilot** er utstyrt med sikker og robust stativfunksjon, slik at det er enkelt å komme til når den skal kobles på eller av, i tillegg til at den er enkel å oppbevare når den ikke er i bruk. Batteriet og kablene er integrert i et smart og funksjonelt design. **E-pilot** er utstyrt med store, brukervennlige funksjonsknapper.



Batteri

Kraftig 13,8 Ah batteri som gir en rekkevidde på 50 km, avhengig av hvor og hvordan det kjøres, brukerens vekt og temperaturen i omgivelsene. Batteriet kan lades både når det er montert på **E-pilot** og når det ikke er montert.



Lader

Laderen kobler automatisk fra når batteriet er fulladet. Et utladet batteri lades opp på ca. 4 timer.



Multifunksjonelt display

Avtakbar 2,4" multifunksjonell fargeskjerm for nyttig informasjon om hastighet, rekkevidde, batterikapasitet, servicemeldinger osv.

Tilbehør ▼



Farger

E-pilot drivenheten er sort, og leveres med hvite deksler som standard. Deksler i andre farger kan leveres som tilbehør. Kontakt oss for mer informasjon om fargedeksler.



Klickfix® beslag

E-pilot kan leveres med Klickfix® beslag og forskjellige former for tilbehør.



Supernova frontlys

Supernova frontlys i aluminium, som gir et kraftig hvitt lys på 205 lumen.

Tilbehør ▼



Baklykter

Rød batteridrevet baklykt til montering på rullestolens ryggør. Forventet batterilevetid er ca. 50 timer.



Sidespeil

Sammenleggbart sidespeil for montering på venstre side. Speilet er enkelt å justere og tilpasse.



Easy-grip gass

Easy-grip krever mindre krefter og gjør det enklere å vri på gasshåndtaket.



Forsterkede drivhjul

Forsterkede drivhjul designet for kjøring med høyere fart.

Tekniske data ▼

For mer informasjon om dette produktet, vennligst kontakt din lokale invacare representant eller se www.invacare.no.



Maks. brukervekt ▼

Maks. 100 kg



Maks. totalvekt ▼

Maks. 135 kg



Maks. høyde på hindringer ▼

Opp til 10 %



Maks. helling ▼

Opp til 15 %



Drivhjulstørrelse ▼

Hjul 16 x 3.00



Motor ▼


250 W / maks. 650 W

Alber e-pilot



Volt ▼

36 V

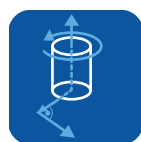

Maks. dreiningsmoment ▼

40 Nm



Hastighet ▼

10 km/t



Batterikapasitet ▼

36 V, 13.8 Ah



Batterieffekt ▼

496 Wh



Rekkevidde ▼

Opp til 50 km

Alber e-pilot

●●● MADE IN GERMANY



Complies with Medical Device Directive 93/42/EEC

Tel.: 22579500
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo
Norway

