



SENGER NORDBED™

ERGOMOVE™ TEKNOLOGI | SIKKERHET | SELVSTENDIGHET



Yes, you can.®

Vi kan senger!

Invacare er en totalleverandør av tekniske hjelpemidler, og har lang erfaring med å levere kvalitetsprodukter til hjemmepleie, institusjoner og sykehus i Norge. Vårt mål er å hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne med å gjenopprette og opprettholde en aktiv livsstil. Dette oppnår vi ved å ha gode produkter og faglig dyktige ansatte som engasjerer seg for å finne den beste løsningen for hver enkelt kunde og sluttbruker.

Invacare legger ned store ressurser for å utvikle senger som skal gjøre hverdagen enklere og bedre for både pasient og pleier.

Invacare er nå stolte over å kunne tilby **NordBed** - en helt ny serie med bl.a. **ErgoMove Teknologi** og et bredt tilbehørs sortiment.

NordBed har mange nye funksjonaliteter som gir pasienten økt selvstendighet og sikkerhet. Vi håper du gjennom denne katalogen vil bli bedre kjent med **NordBed**.

Invacare har salgs- og supportrepresentanter over hele landet, og vi bidrar gjerne med vår kunnskap og assistanse ved produktvalg og service.

Distrikt	Kontaktperson	E-post	Telefon
Hele Norge	Kundeservice	norway@invacare.com	225 79 500
Hele Norge	Teknisk service	teknisk@invacare.com	225 79 500
Salgssjef Region Øst	Karianne Nyruud Jansen	knjansen@invacare.com	915 42 478
Salgssjef Region Nord-Vest-Sør	Rune Sandbakk	rsandbakk@invacare.com	909 38 220
Oslo og Viken Øst	Aina Evensen	aevensen@invacare.com	976 09 418
Innlandet	Bjørn Sæther	bsaether@invacare.com	917 33 399
Vestfold,Telemark, og Viken Vest, Sykehus Norge	Tom Inge Paulsen	tipaulse@invacare.com	915 14 513
Aust- og Vest-Agder	Jens Aspås	jaspas@invacare.com	913 80 353
Rogaland	Oddmar Byberg	obyberg@invacare.com	907 43 640
Hordaland og Sogn og Fjordane	Trond Langeland	tlangela@invacare.com	907 40 097
Møre og Romsdal	Ødegaard Engros AS	ode@norengros.no	701 09 292
Sør-Trøndelag	Arild Nordgaard	anordgaa@invacare.com	415 22 260
Nord-Trøndelag	Kathrine R. Pedersen	krokkepe@invacare.com	911 53 091
Nordland	Knut Hagen	khagen@invcare.com	917 73 709
Nordland	Helseservice Engros AS	hs@norengros.no	761 17 500
Troms og Finnmark	Helseservice Engros AS	hs@norengros.no	761 17 500

Innhold

NordBed Ultra 4

NordBed Ultra Dement 8

NordBed Optimo..... 10

NordBed ErgoMove Teknologi.... 16

NordBed Tilbehør 18

Soft Tilt 2.0 - Vendesystem..... 26



NordBed Ultra



ERGOMOVE™ TEKNOLOGI | SIKKERHET | SELVSTENDIGHET



Innovative NordBed Ultra

Pasienter med særlige behov og som er avhengige av hjelp, trenger produkter som enkelt kan tilpasses deres behov. Dette gjelder spesielt personer med demens. **NordBed Ultra** er et utmerket valg grunnet de mange tilpasningsmulighetene som sengen tilbyr. Den har et gjenkjennelig estetisk design, som er ideelt for å gi pasienten følelsen av å være hjemme. Ved hjelp av automatisk tilpasning av liggeflaten, reduseres risikoen for forskyvning i sengen når pasienten skal endre stilling.

ErgoMove-teknologi

Invacare **NordBed Ultra** har **ErgoMove-teknologi** som gir pasienten aktiv sittestilling med rygglenstilbakeføring ved hjelp av et tastetrykk. I aktiv sittestilling kan pasienten enkelt spise, drikke og lese, samtidig som trykkfordelingen opprettholdes.

Løftemotorene bidrar til en naturlig bevegelse av liggeflaten i samspill med kroppens fasong. Den automatiske liggeflatereguleringen, sikrer at pasienten forblir i den samme stillingen og reduserer friksjon og forskyvning. Dette reduserer behovet betraktelig for pleierassistanse ved forflytning i sengen.



Sikkerhet, selvstendighet og bevegelighet

Laveste høyde på bare 25 cm:

- ▶ Øker sikkerheten og minsker risikoen for pasienter som er utsatte for fall
- ▶ Forebygger fallskader for ekstra utsatte pasientgrupper, som pasienter med demens, uten bruk av sidegrinder
- ▶ Lettere for pasienten å stige inn og ut av sengen

Sidegrinder og støttehåntak til ulike behov:

Delte og heldekkende sidegrinder

- ▶ For å sikre at pasienten ikke faller ut av sengen
- ▶ For enklere forflytning eller vending i sengen

Ut- og innstigningshjelp

- ▶ Støtte ved inn- og utstigning av sengen

Up-and-Out™

- ▶ For en trygg og smidig forflytning, samt økt selvstendighet og bevegelighet, er pasientene i stand til å manøvrere **Up-and-Out**-funksjonen kun ved hjelp av et tastetrykk. Ved hjelp av innstillingene vil liggeflaten automatisk justeres til en passende posisjon for å forenkle inn- og utstigning av sengen, i tillegg til å forebygge friksjon og forskyvning.



4

UNIKE EGENSKAPER

1

ErgoMove-teknologi

- ▶ Pasienten repositioneres komfortabelt til en aktiv sittestilling og senkes ned igjen til en behagelig liggstilling, uten å skli i sengen og uten behov for forflytning.
- ▶ Reduserer skyv og friksjon

2

Up-and-Out

- ▶ Sikrer en trygg og smidig forflytning samt økt selvstendighet



3

25 cm liggeflatehøyde

- ▶ Ved bruk av 100mm hjul blir sengens liggeflate kun 25cm, som gir en sikrere forflytning og økt forebygging mot fallskader.

4

Optimalisert madrass understøttelse

- ▶ Optimalisert etter måling av kroppssammensetningen, som gir økt komfort og god madrassunderstøttelse

Øvrige egenskaper

- ▶ **RememberMe™:**
 - Programmerbar håndkontroll med LCD-skjerm
 - **ErgoMove** og **Up-and-Out** kan tilpasses den enkelte pasienten
- ▶ **Integrert liggeflateforlenger**
 - Forlengbar med opp til 10 cm ved hode- og fotenden, 20 cm tilsammen
- ▶ **Anti-Trendelenburg og Trendelenburg-funksjon**
 - Anti-Trendelenburg gir økt komfort for pasient ved god redistribusjon av trykket i aktiv posisjon
 - Trendelenburg kan benyttes ved medisinsk behandling og sikre god pleie ved akutte situasjoner
- ▶ **Under-bed-light**
 - Lyset kan enkelt slås av og på med håndkontrollen
 - Forebygger mot fall og uhell
 - Et Out-of-bed-light kan også slå seg på automatisk ved utstigning



Håndkontroll ▲

Lette gjenkjennelige farger for svaksynte pasienter

- ▶ De oftest brukte knappene har lett gjenkjennelige farger, som er nøye valgt ut av eksperter, for enkelt å skille mellom funksjonene.
- ▶ Hver enkelt knapp lyser når den blir trykket på, for å hjelpe pasienten både på dagtid og kveldstid.
- ▶ Hovedknappene er plassert øverst på håndkontrollen for enkel manøvrering. Øvrig justering gjøres enkelt med de andre knappene.
- ▶ Håndkontrollen er låsbar som standard.
- ▶ For flere alternativer, se mer informasjon under Tilbehør s. 7.

Tekniske data ▼

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

Bredde utvendig Madrasbredde ▼	Lengde utvendig Madraslengde innvendig ▼	Høyderegulerbar med 100mm hjul ▼	Inndeling liggeflate ▼	Frihøyde med 100mm hjul ▼	Lårvinkel ▼	
NordBed Ultra	100 / 90 cm	213 / 200 cm	25 - 85 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°
Leggvinkel ▼	Anti-Trendelenburg / Trendelenburg ▼	Maks. brukervekt ▼	Vekt (uten gavel og grinder) ▼	Sengens tyngste del ▼	Maskinvaskbar ▼	
NordBed Ultra	19°	+/- 15°	200 kg / SWL 235 kg	105 kg	55 kg	Ja

NB: Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år, eller med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Rammefarge ▼



Aluminiumsgrå

Treverk ▼



Bøk




Eik



Umbr



Bøk/lyseblå

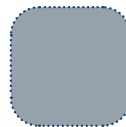

Lyseblå



Hvit

* Farge og treverk kan avvike noe fra katalogen til virkeligheten.

Artikkeloversikt (Ta kontakt for å få art. nr på alternative kombinasjoner)

Art. nr.	Produktbeskrivelse	Materiale	Madrassmål (cm)
1649885_S3	NordBed sykehjemsseng hel sengegrind	Bøk	90x200
1649885_S4	NordBed sykehjemsseng hel sengegrind	Umbr	90x200
1649885_S5	NordBed sykehjemsseng hel sengegrind	Hvit	90x200
1649885_S3_TORILL	NordBed sykehjemsseng delt sengegrind	Bøk	90x200
1649885_S4_TORILL	NordBed sykehjemsseng delt sengegrind	Umbr	90x200
1649885_S5_TORILL	NordBed sykehjemsseng delt sengegrind	Hvit	90x200

NordBed™ Ultra

Designet for pasienter med demens



ERGOMOVE™ TECHNOLOGY | SIKKERHET | FALLFOREBYGGENDE



Perfekt for pasienter med demens

NordBed Ultra kan konfigureres for å oppfylle de spesielle kravene til pasienter som lider under demens. For å gi en pasient med demens høy grad av sikkerhet er det viktig at pleiesengen tillater selvstendighet og mobilitet.

Den lave høyden på bare 25 cm i kombinasjon med lys under sengen (under-bed-light), reduserer risikoen for at pasienten blir skadet ved inn- og utstigning av sengen om nettene.

For å gi gode arbeidsforhold til omsorgspersonalet er **NordBed Ultra** i stand til å nå en topphøyde på 85 cm. Med **NordBed Ultra** kan sengen hele tiden tilpasses de ulike dementstadiene til pasienten.

Hjemmekoselig estetikk

Til **NordBed Ultra** er det også tilgjengelig ekstra myke trekk til langsider og endegavler i ulike farger: blå, rød, grønn. Dette gir **NordBed Ultra** et ekstra hjemmekoselig og rolig preg. Det myke trekket har en myk tekstilstrukuroverflate som gir en sensorisk stimulering. Personer som lider av demens kan ha vanskeligheter med å gjenkjenne nye omgivelser.

NordBed Ultra tilbyr et bredt spekter av gavler, langsider og sidegrinder i ulike trefarger, for å kunne gjenspeile et så gjenkjennelig og normalt miljø som mulig for pasienten.



- ▶ Den lave høyden tillater trygge miljøer for pasienter som er mobile
- ▶ Den svært konfigurerbare sengen kan tilpasses:
 - For å se ut som den mer tradisjonelle sengen
 - For å passe inn i et mer moderne hjem
 - For å gi et ekstra koselig, trygt og gjenkjennelig miljø - ekstra myke trekk
 - For å reduserer risikoen for at pasienten blir skadet ved ut/inn stigning av sengen - Lys under sengen

NordBed™ Optimo-serien



ERGOMOVE™-TEKNOLOGI | UTMERKET TIL GJENBRUK | SELVSTENDIG



Sengene fra **NordBed Optimo-serien** er ideelle for bruk i hjemmepleie og kommunale korttidslager. Med komfort i særklasse og enkel bruk, fremmer **NordBed Optimo** selvstendighet og sikrer pasientene bevegelse. Trykkavlastning er kjernen for **ErgoMove-teknologien**. **NordBed Optimo 90** sin enkle utforming gjør at både pasienten samt pleiere og teknikere med enkelhet kan betjene sengen. **NordBed Optimo Wide** sikrer pasienter med høyere kroppsvekt ekstra plass og egner seg godt for dem som trenger mer plass til å bevege seg i sengen.

ErgoMove-teknologi

NordBed Optimo har **ErgoMove-teknologi** som gir pasienten aktiv sittestilling med rygglenstilbakeføring ved hjelp av et tastetrykk. I aktiv sittestilling kan pasienten enkelt spise, drikke og lese samtidig som trykkfordelingen opprettholdes.

Løfteegenskapene bidrar til en naturlig bevegelse av liggeflaten i samspill med kroppens fasong. Sammen med den automatiske liggeflatereguleringen, sikrer det at pasienten forblir i den samme stillingen og motvirker friksjon og forskyvning.



Up-and-Out™

For en trygg og smidig forflytning, samt økt selvstendighet og bevegelse, er pasientene i stand til å manøvrere **Up-and-Out**-funksjonen kun ved hjelp av et tastetrykk. Ved hjelp av innstillingene vil liggeflaten automatisk justeres til en passende posisjon for å forenkle inn- og utstigning av sengen, i tillegg til å forebygge friksjon og forskyvning.



6

UNIKE EGENSKAPER

1

ErgoMove-teknologi

- ▶ Løfter pasienten komfortabelt til en aktiv sittestilling.

2

Enkel håndtering

- ▶ Demonteres enkelt for frakt og lagring. Ideell for gjenbruk.

3

Flere størrelser

- ▶ Tilgjengelig i bredde 90, 105 og 120 cm.



4

Up-and-Out

- ▶ Sikrer en trygg og smidig forflytning

6

Optimalisert madrass understøttelse

- ▶ Ifølge antropometrisk måling, for økt komfort

5

Design

- ▶ Bredt utvalg av endegavler med treutførelser og farger.

Øvrige egenskaper og tilbehør

▶ RememberMe™:

- Programmerbar håndkontroll med LCD
- **ErgoMove** og **Up-and-Out** kan tilpasses pasientens behov

▶ Integriert liggeflateforlenger

- Forlengbar med opp til 10 cm ved hode- og fotenden

▶ Anti-Trendelenburg og Trendelenburg-funksjon

- Anti-Trendelenburg gir økt komfort for pasient ved god redistribusjon av trykket i aktiv posisjon
- Ved tilvalg av Trendelenburg-funksjon kan dette benyttes ved medisinsk behandling og sikre god pleie ved akutte situasjoner

▶ Under-bed-light

- Lyset kan enkelt slås av og på med håndkontrollen
- Forebygger mot fall og uhell
- Et Out-of-bed-light kan også slå seg på automatisk ved utstigning

Egenskaper og fordeler



◀ Transport og lagring

NordBed Optimo 90 og 105 cm kan demonteres i kun 5 deler. På **Optimo** 90 veier ingen av delene mer enn 20 kg. Dette sikrer enkel og praktisk frakt og håndtering for pleiere og teknisk personale. Monteringen er enkel og intuitiv, og sengen kan flyttes uten behov for transportstativ. **NordBed Optimo** 120 cm kan demonteres i tre deler og enkelt flyttes med en tralle.



◀ Laget for gjenbruk

Sengene i **NordBed Optimo-serien** kan tilpasses maskinvask.






◀ Håndkontroll

- De oftest anvendte knappene har forskjellige farger, som er nøye valgt ut av eksperter, for enkelt å skille mellom funksjonene.
- Hver enkelt knapp lyser når den blir trykket på, for å hjelpe pasienten både på dagtid og kveldstid.
- Hovedknappene er plassert øverst på håndkontrollen for enkel manøvrering. Øvrig justering gjøres enkelt med de andre knappene.
- Håndkontrollen er låsbar som standard.

Dette er **NordBed Optimo**-serien




NordBed Optimo er tilgjengelig i forskjellige vekt-kategorier og størrelser


	Demontert	Maks brukervekt	Sengens tyngste del
<p>NordBed Optimo 90</p> <p><i>Gir selvstendighet og sikrer bevegelighet</i></p> 	5 Deler	200 kg	20 kg
<p>NordBed Optimo 105</p> <p><i>Bredere seng tilpasset pasienter som trenger mer plass til forflytning i sengen</i></p> 	5 Deler	200 kg	25 kg
<p>NordBed Optimo 120</p> <p><i>Ekstra komfort for større personer</i></p> 	3 Deler	250 kg	70 kg

En rekke konfigurasjoner som åpner for mange muligheter

Tekniske data ▼


Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

	 Bredde utvendig Bredde innvendig ▼	 Lengde utvendig Lengde innvendig ▼	 Høyde-regulerbar med 100 mm hjul ▼	 Inndeling liggeflate ▼	 Frihøyde med 100mm hjul ▼	 Lårvinkel ▼
NordBed Optimo 90	100 / 90 cm	213 / 200 cm	32 - 81 cm (28 - 77 cm)	80-17-30-65 cm	15°	49°
NordBed Optimo 105	115 / 105 cm	213 / 200 cm	32 - 81 cm (28 - 77 cm)	80-17-30-65 cm	15°	49°
NordBed Optimo 120	130 / 120 cm	213 / 200 cm	32 - 81 cm (28 - 77 cm)	80-17-30-65 cm	15°	49°

	 Leggvinkel ▼	 Anti-Trendelenburg / Trendelenburg ▼	 Maks. brukervekt ▼	 Samlet vekt ▼	 Sengens tyngste del ▼	 Maskinvaskbar ▼
NordBed Optimo 90	19°	+/- 15°	200 kg / SWL 235 kg	100 kg	20 kg	Yes
NordBed Optimo 105	19°	+/- 15°	200 kg / SWL 235 kg	100 kg	25 kg	Yes
NordBed Optimo 120	19°	+/- 15°	250 kg / SWL 285 kg	130 kg	70 kg	Yes

NB: Sengen må ikke benyttes av personer under 12 år, eller personer med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Rammefarge ▼

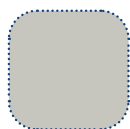

Aluminiumsgrå

Treverk ▼



Bøk



Eik



Umbr



Bøk/lyseblå



Lyseblå



Hvit

* Farge og treverk kan avvike noe fra katalogen til virkeligheten.

Artikkeloversikt (Ta kontakt for å få art. nr på alternative kombinasjoner)

Art. nr.	Produktbeskrivelse	Materiale	Madrassmål (cm)
1649886_S2	NordBed sykehjemsseng endegavl Nora sidegrind Freya	Bøk	90x200
1654207_S1	NordBed sykehjemsseng endegavl Nora sidegrind Freya	Bøk	105x200

ErgoMove™ -Teknologi

SELVSTENDIGHET | TRYKKSÅRFOREBYGGENDE | AKTIV SITTESTILLING

Vi introduserer NordBed ErgoMove™-teknologi

ErgoMove-teknologien har blitt utviklet for å gi pasienten aktiv sittestilling med rygglenstilbakeføring ved hjelp av et tastetrykk. I aktiv sittestilling kan pasienten enkelt spise, drikke og lese, samtidig som trykkfordelingen oppretholdes.



Løfteinnstillingene sikrer at pasienten forblir i den samme posisjonen og motvirker friksjon og forskyvning, som forhindrer at liggesår utvikles.

- ▶ Når pasienten er plassert riktig på liggeflaten, sikrer det at bekkenet ligger stabilt og er riktig plassert for å forhindre glidning mens liggeflaten justeres.
- ▶ Liggeflatene er tilpasset i samsvar med kroppens ergonomi, med de naturlige bevegelsepunktene plassert ved hoften og knærne. I kombinasjon med den automatiske ryggtilbakeføringen, gjør dette at madrassen ikke beveger seg og faren for trykksår reduseres når kroppen løftes opp til aktiv sittestilling.
- ▶ Teknologien gjør at pleieren alene kan hjelpe pasienten til å bytte liggstilling. Liggeflatene er optimalisert i forhold til antropometriske målinger, som gjør at flatene kan tilpasses de fleste voksne pasienter.

Kunnskapsdatabase


Kliniske fortrinn

- ▶ Gir pasienten aktiv sittestilling
- ▶ Delte liggeflater reduserer skyv-, friksjons- og kompresjonsskader.
- ▶ Pasienten forblir i den samme stillingen og forhindrer bevegelse og friksjon.



Fordelene med aktiv sittestilling

- 1** Gjør det enklere å føre bena rundt og ut
- 2** Økt omfordeler av trykk
- 3** Forenkler pleiernes arbeid
- 4** Gir pasienten større frihet til å spise, drikke og lese.

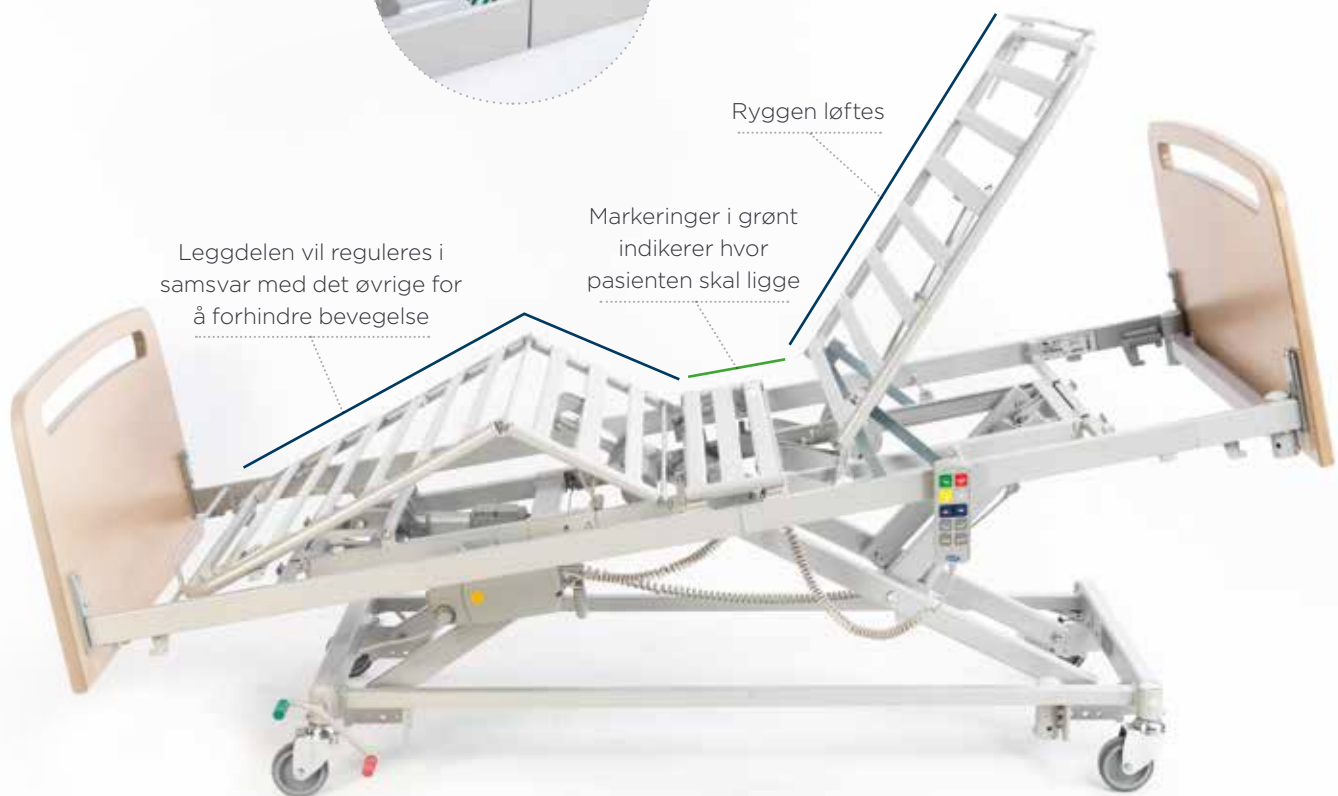

Anti-trendelenburg -innstillingen sikrer en aktiv sittestilling for pasienten.



NordBed™ -Tilbehør



Bredt tilbehørs-sortiment -
Individuell tilpasning



NordBed-serien tilbyr en rekke tilbehør som gir ulike tilpasninger både i form av design og personlige ønsker. Det gjør at sengene kan passe inn i ulike miljøer tilpasset den enkeltes behov.

Endegavler

Moderne endegavler, som gir et hjemlig preg, tilpasset personlige ønsker. Tilgjengelige i en rekke trevarianter og farger. Endegavlene fjernes enkelt uten bruk av verktøy.



Una

Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder, delte sidegrinder eller langsider.



Una / Una Lav

Kan brukes i kobinasjon med langsider.



Nora

Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder i full lengde, delte sidegrinder eller langsider.



Astrid

Avtagbart panel for enklere tilgang. Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder i full lengde, delte sidegrinder eller langsider.



Nanna

Kan brukes i kombinasjon med langsider og Ane sidegrind.



Runa

Kan brukes i kombinasjon med langsider og Ane sidegrind.

Endegavler	Bøk	Eik	Umber	Bøk/ aluminiumsgrå	Aluminiumsgrå	Hvit
Una Endegavl	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nora Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Astrid Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Nanna Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Runa Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓

* Farge og treverk kan avvike noe fra katalogen til virkeligheten.

Kosmetisk langside

Vårt utvalg av langsider gir pasienten følelsen av å være hjemme



Langside 1 i tre

Kan anvendes med endegavlene Una, Astrid og Nora.



Langside 2 i tre

Kan anvendes med endegavlen Runa og sidegrinden Ane.



Langside 3 i tre

Kan anvendes med endegavlen Nanna og sidegrinden Ane.

Sidegrinder

Sidegrindene har en rekke anvendelsesområder: for å sikre at pasienten ikke faller ut av sengen, for enklere forflytning eller vending i sengen, eller som støtte ved inn- og utstigning av sengen.

Sengene fra Invacare er tilpasset alle disse behovene, også med tanke på å avlaste omsorgspersonalet og bidra til et behagelig arbeidsmiljø.



Freya

Sidegrinder i tre, tilgjengelig i lengdene 200cm, 210cm og 220cm.

Art. nr. SP1649812-0703 Freya bøk 200 cm (par)



Embla

Sidegrinder i aluminium, lengde 200cm.



Embla forlengbar

Sidegrinder i aluminium. Trinnløs lengderegulering fra 200 til 220cm.



Torill Kort

Regulerbar i 3 høyder



Torill Lang

Regulerbar i 3 høyder



Ane

3/4-lange sidegrinder i metall

Sidegrinder til tykkere madrasser



Ane Høy

3/4-lange sidegrinder i metall for tykkere madrasser.
Art.nr. SP1653636-0154



Freya sidegrindforhøyer

Freya sidegrinder kan bli forhøyet med 6cm eller 10cm for en trygg bruk av tykkere madrasser.
1648540-(+fargekode)



Embla sidegrindforhøyer

Embla sidegrinder kan bli forhøyet med 6cm eller 10cm for en trygg bruk av tykkere madrasser, samt forlenget fra 200 til 220cm.
1648229-(+fargekode)

Endegavler	Una	Nora	Astrid	Nanna	Runa
Sidegrinder					
Freya	✓	✓	✓		
Embla	✓	✓	✓		
Torill	✓*	✓*	✓*		
Ane				✓	✓

* Endegavler uten skinner for fullengde sidegrinder

Trekk til sidegrind

Vårt utvalg av sidegrindtrekk dekker flere ulike behov: Polstrede trekk hindrer at pasienten skader seg. Nettingtrekket hindrer at pasienten kommer i klem mellom grindene, samtidig som utsynet ikke blir forhindret.

Samtlige trekk er laget for å sitte på sidegrindene mens de justeres eller felles ned.

Trekkene kan enkelt fjernes og vaskes på 90 grader.



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla

Art. nr. 1651557



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla, med høydeforlenger.

Art.nr. 1651560



Nettingtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla

Art. nr. 1651554



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrinden Ane

Art.nr. 1653895

Støtte- og vendehåndtak

Utvalget av stabile støttehjelpemidler gir pasientene frihet og mulighet til å flytte på og vende seg i sengen, samt stige inn og ut av sengen.



Støttehåndtak

H40 x B30 cm

Art. nr. 1651907



Støttehåndtak

H40 x B90 cm

Art. nr. 1651908



Utsvingbart støtte- og utstignings-håndtak

Håndtaket gir god støtte for pasienten og kan felles inn, ved inn- og utstigning. Kan brukes separat eller parvis.

Art. nr. SP1653891 (venstre)

Art. nr. SP1653894 (høyre)



Utsstigningshjelp

Gir støtte ved inn- og utstigning

Art.nr. SP1534684



Oppreisningsstøtte

Gir støtte ved oppreisning samt inn- og utstigning.

Art.nr. SP1653894 (Høyre)

Art.nr. SP1653891 (Venstre)



Søsterhjelp

Løftebøyle til sykehjemsseng. Høyde- og dybderegulerbart håndtak.

Art. nr. 1542093-0154

Øvrig tilbehør



Forlengingsdel til Torill delte sidegrinder



Sengebånd

Sengebånd 150 cm
Art. nr. 60110932



Holder til håndkontroll

Art.nr. 1653872



Avstandsfender

Beskytter veggene når sengen flyttes. Kan monteres på kort- eller langsiden av sengerammen. bestilles i Stk.

Håndkontroller og annet elektronisk tilbehør

Et stort utvalg håndkontroller finnes til **NordBed**-serien, for å passe til ulike behov



Håndkontroll

Med Anti-trendelenburg / med eller uten Trendelenburg.

Art. nr. SP1651017-0700



Håndkontroll

Med Anti-Trendelenburg / med eller uten Trendelenburg og under-bed-light.

Art. nr. SP1651018-0700



Håndkontroll med LCD-skjerm

Med **RememberMe™**-funksjonalitet. Velg mellom 4 ulike håndkontroller. Med eller uten Trendelenburg og under-bed-light.



Under-bed-light

Lys følger med ved bestilling av håndkontroll med under-bed-light.

Optimo & Ultra Madrasshøyde cm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Freya (200 cm, 210 cm og 220 cm)																							
Embla/Embla Forlenget																							
Freya/Embla sidegrind med sidegrindforhøyer + 6 cm																							
Freya/Embla sidegrind med sidegrindforhøyer + 10 cm																							
Ane																							
Ane Høy																							
Torill Lang / Torill Kort																							

Optimo & Ultra Madrasshøyde cm	Total høyde	Høyde over liggeflaten
Una	60,5 cm	45 cm
Una endegavl & Una lav/Fotbrett	60,5 / 20 cm	45 cm
Nora	57,7 cm	42,2 cm
Astrid bed end	66 cm	50,5 cm
Nanna	52,5 / 38 cm	38,5 cm
Runa	52,5 cm	39 cm

Sengemodeller og Tilbehør

*MARK AT ALLE ALTERNATIVER KAN IKKE KOMBINERES, TA
GJERNE KONTAKT FOR HJELP

MODELLER

NordBed Ultra, laveste høyde 25 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo, laveste høyde 32 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo, laveste høyde 28 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 32 cm vaskbar 200*105/120 cm bed
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 28 cm vaskbar 200*105/120 cm bed

HJUL&BREMSESYSTEM

Hjul diameter 100 mm
Hjul diameter 125 mm
Hjul diameter 100 mm m/retningssperre
Hjul diameter 125 mm m/retningssperre

HÅNDKONTROLLER

Håndkontroll, AntiTrend, Standard	SP1647177-0700
Håndkontroll, Trend-og antiTrend	SP1651017-0700
Håndkontroll, antiTrend, Standard m/"under bed light"	SP1651016-0700
Håndkontroll, Trend-og antiTrend, "under bed light"	SP1651018-0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", antiTrend	SP1655055-0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", Trend-og antiTrend	SP1651652-0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", antiTrend, "under bed light"	SP1655055-0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", Trend-and antiTrend, "under bed light"	SP1651652-0700

FARGER

Bøk	-0703
Eik	-0701
Umber	-0702
Hvit malt	-9016
Blå malt	-5024
Bøk/alublå malt	-0704

ENDEGAVLER (PAR)

Una	Alle farger	SP1656756-xxxx
Una m/slisse	Alle farger	SP1655853-xxxx
Una endegavl m/ fotbrett	Alle farger	SP1656789-xxxx
Nora	Bøk,Eik, Umber	SP1657158-xxxx
Nora m/slisse	Bøk,Eik, Umber	SP1657222-xxxx
Astrid	Bøk,Eik, Umber	SP1656967-xxxx
Astrid m/slisse	Bøk,Eik, Umber	SP1656966-xxxx
Nanna	Bøk,Eik, Umber	SP1655962-xxxx
Runa	Alle farger - Bøk/alu blå malt	SP1655963-xxxx

SIDTEGRINDER(PAR)

Freya, tre	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	SP1649812-xxxx
Freya, tre, m/ 10 cm forlengbar	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1649931-xxxx
Freya, tre, m/ 20 cm forlengbar	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	SP1649932-xxxx
Embla, alu	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	SP1649930-xxxx
Embla forlengbar, (200 - 220 cm) alu	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	SP1649934-xxxx
Torill delte grunder tre/alu, 75 cm	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	
Torill delte grunder tre/alu, 96 cm	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	
Ane, stål, (88/90 cm madrass bredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1653634-0154
Ane, stål, (83/85 cm madrassbredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1653637-0154
Ane høy, stål, (88/90 cm madrass bredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1653636-0154
Ane høy, stål, (83/85 cm madrassbredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1653638-0154

Tilbehør

SIDTEGRIND - TILBEHØR

Freya sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm) (stk)	1648540-XXXX
Embla sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm) (stk)	1648229-XXXX

LANGSIDER

Langside 1 i tre	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	SP1657039-XXXX
Langside 1 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	SP1657046-XXXX
Langside 1 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	SP1657049-XXXX
Langside 2 i tre	Komp. m/ Runa og Ane	SP1657041-0703
Langside 2 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Runa og Ane	SP1657048-0703
Langside 2 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Runa og Ane	SP1657053-0703
Langside 3 i tre	Komp. m/ Nanna og Ane	SP1657040-xxxx
Langside 3 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Nanna og Ane	SP1657047-xxxx
Langside 3 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Nanna og Ane	SP1657052-xxxx

TILBEHØR

Søsterhjelp med justerbart håndtak, alu-grå	SP162707-0154
Søsterhjelp svingbart, med justerbart håndtak, alu-grå	3000650.57650P0
Avstandsfender langside Optimo, Ultra	1653857-0154
Avstandsfender kortsiden Ultra	1653861-0154
Avstandsfender kortsiden Optimo	1653864-0154
Fenderhjul 7,5cm Runa gavler	50.59600.00
Fenderhjul 7,5 cm Una, Nora, Astrid gavler	1661856-0154
Støttehåndtak H/L: 40 x 30 cm	SP1651907
Støttehåndtak H/L: 40 x 90 cm	SP1651908
Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, høyre	SP1653716
Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, venstre	SP1653715
Oppreisningsstøtte, høyre	SP1653894
Oppreisningsstøtte, venstre	SP1653891
Utsstigningshjelp	SP1534684
Holder til håndkontroll	1653872
Dekkrør 5 cm, 2stk	AP1527520
Dekkrør 10 cm, 2stk	AP1527521

ELEKTRONISK TILBEHØR

Revmatiker håndkontroll	SP1660471
Trådløst håndsett	1660452
T-kabel ved bruk av to håndkontroller samtidig	SP1655966
Strømforsyning, kun til bruk av servicepersonale	1446180
Batteri back Up	1650045

TREKK TIL SIDTEGRIND 1 STK

Polstret trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	SP1651557
Ekstra polstret trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	1651561
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651558
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651559
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 6 cm sidegrindsforhøyer	Komp. m/ Freya, Embla	1651560
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm sidegrindsforhøyer	Komp. m/ Freya, Embla	1651560
Netting trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	1651554
Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651555
Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651556
Polstret trekk for for Torill delte grinder 76cm	Komp. m/Torill kort	1660466
Polstret trekk for for Torill delte grinder 96cm	Komp. m/Torill lang	1660467
Polstret trekk for metal sidegrinder Ane	Komp. m/Ane	1653895
Ekstra polstret trekk for metal sidegrinder Ane	Komp. m/Ane	1653897

EKSTRA MYKE TREKK TIL SIDTEGRIND

Ekstra myke trekk til til smalt fotbrett 1 stk + Endegavl 1 stk - Una gavler	1660465-xxxx
Ekstra myke trekk til endegavler - par	1660464-xxxx
Ekstra myke trekk til langside- par	1650168-xxxx
Blå	-3009
Grønn	-5015
Rød	-6001

Soft Tilt™ 2.0



Innovativt vendesystem – verdifull støtte ved forflytning og posisjonering



Invacare **Soft Tilt 2.0** er et unikt, innovativt vendesystem utviklet for automatisk vending og reposisjonering av pasient, samt for å hjelpe pleiepersonalet ved daglig stell av pasient.

Soft Tilt 2.0 er enkel å montere på sengene **SB755**, **NordBed** og **Etude Plus**. Den beveger seg smidig sammen med sengens bevegelige deler og madrassen.

- ▶ Automatisert trykkavlastning som forebygger trykksår
- ▶ Forenkler pleiarbeidet, ideelt for pleiere som jobber alene
- ▶ Økt komfort for pasient og pleier



Automatisert og manuell trykkavlastning og forflytning

Soft Tilt 2.0 består av to vinger som monteres langs pleiesengens liggeflate. Hevingen av vingene gjøres enten manuelt ved bruk av håndkontroll eller et automatisert program. Ved behov for automatisert og kontinuerlig trykkavlastning brukes en programmerbar kontrollboks. **Soft Tilt 2.0** kan programmeres til å automatisk heve pasienten i ulike intervaller og vinkler.

Forenkler pleiarbeidet

Soft Tilt 2.0 kan betjenes av én pleier alene. Ved hjelp av håndkontrollen kan vingene heves opptil 80°. Dette gjør det enkelt å komme til med forflytningshjelpemidler, sette på seil eller slynge, og utføre personlig pleie.

Soft Tilt 2.0 kan også brukes til å gi støtte ved inn- og utstigning av sengen. Dette beskytter pleieren mot potensielle belastningsskader i ryggen.

Komfort og sansestimulering

Soft Tilt 2.0 har utomatiserte bevegelser som er svært stille og smidige. Bevegelsene er sansestimulerende og gir en beroligende effekt. Dette gjør at **Soft Tilt 2.0** bidrar til en behagelig og uforstyrret søvn. Ved automatisk innstilling kan vingene heves til maks. 40°, slik at pasientens sikkerhet og komfort ivaretas.



Egenskaper og tilbehør




◀ Komfortabel, automatisert trykkfordeling

Når **Soft Tilt 2.0** er innstilt på et automatisert program, skjer endringen i posisjon på en måte som gir god støtte og komfort: før den første vingen heves til ønsket posisjon (maks. 40°), heves vingen på motsatt side en anelse. Når ønsket posisjon er oppnådd, går denne vingen tilbake til horisontal posisjon.

▲ Følger liggeflatens bevegelser

Soft Tilt 2.0 er enkel å montere og følger liggeflatens bevegelse på en svært smidig måte. Dette sikrer god posisjonering av pasienten og gir verdifull hjelp i forbindelse med forflytning.

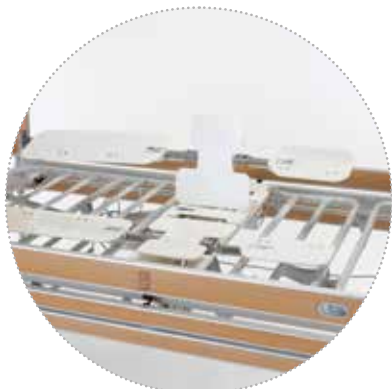

◀ Programmerbar kontrollboks

Kontrollboksen leveres med ett forhåndsprogrammert auto-program. I tillegg kan man lage to individuelt tilpassede programmer. De lagrede programmene kan aktiveres med kun ett tastetrykk.

▲ Manuell betjening

Når **Soft Tilt 2.0** styres manuelt ved bruk av håndkontrollen, kan vingene heves opp til 80°. Dette gir mulighet for enklere håndtering av pasient, for eksempel i forbindelse med pleie og ved bruk av forflytningshjelpemidler.



▲ Sansestimulering

Soft Tilt 2.0 kan programmeres til å vende liggeflaten rolig fra side til side mens begge vingene er hevet. Denne "vugge"-funksjonen kan virke beroligende.

▲ Enkel håndkontroll

Den brukervennlige håndkontrollen gjør det enkelt å styre **Soft Tilt 2.0** manuelt.

▲ Trekk

Blått trekk med elastiske stropper som sikrer at madrassen holdes på plass. Kan maskinvaskes på 80°.

Soft Tilt 2.0 - kompatibel med Invacare-senger



► Invacare® **SB 755**



NordBed-familien:


- Invacare® **NordBed Optimo,**
- Invacare® **NordBed Ultra**



► Invacare® **Etude Plus**

Tekniske data ▼

Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

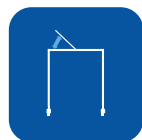

Maks. vinkel i manuell modus ▼



Maks. vinkel i automatisert modus ▼



Tidsintervall i automatisert modus ▼



Maks. brukervekt ▼



Tyngste enkelt del ▼



Vask av trekk ▼

Soft Tilt

80°

40°

0-180 minutter

116-165 kg*
SWL 145-185 kg*


18 kg

80°

Samsvarer med IEC 60601-2-52

* Maks. brukervekt avhenger av hvilken seng Soft Tilt 2.0 brukes sammen med. Se brukermanualen til Soft Tilt 2.0 for mer informasjon.

Stål-farge ▼

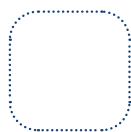

Hvit

NB: Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år eller pasienter med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Soft Tilt 2.0 er produsert av GDV Technology på vegne av Invacare.

Produkt	Art. nr.
SOFT TILT 2.0 NORDBED	1651469
SOFT TILT 2.0 SB755	1651473



Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2019 Invacare International Sàrl. All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. Reproduksjon, bruk av katalogen eller deler av den uavhengig av form er forbudt uten tillatelse fra Invacare International Sàrl.

Senger NordBed - NO - 03/2020

