

Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual-Vip, Ocean E-Vip

Ocean/Ocean XL er en stabil og robust stol. Den er enkel å regulere og har et bredt tilbehørsprogram. Alle **Ocean**-stolene er laget i rustfritt materiale. **Ocean Vip/Ocean Vip XL** er høyderegulerbar, har manuell tilt, og kan i tillegg leveres med regulerbar rygg (**Ocean Dual-Vip**). Stolen er trygg og komfortabel, og godt egnet for brukere med redusert kroppsstabilitet. **Ocean E-Vip** har elektrisk høyderegulering og elektrisk tilt. Dette gir avlastning for pleier ved stell, og brukeren får en trygg sittestilling med mange posisjoneringsmuligheter.

AQUATEC®

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



Aquatec **Ocean**



Aquatec **Ocean XL**

- Stabil, rustfri stålramme
- Enkel justering av setehøyde - uten bruk av verktøy
- Ryggtrekket er justerbart med bånd på baksiden for tilpasning til brukerens ryggform. Båndene har hurtigkobling slik at trekket enkelt kan tas av for vask
- Plassbesparende kjørebøyle gjør stolen lett å plassere over toalettet uten å komme i konflikt med veggen bak
- Ergonomiske, oppfellbare armlener som kan justeres i to høydenivå
- Benstøttene er høydejusterbare, utsving- og oppfellbare og kan tas av for enkel forflytning
- Oppfellbar fotplate med helbånd gir en sikker posisjon
- Leveres med bekkenholder og bekken med lokk

Ocean er tilgjengelig i følgende utgaver:

- Standard versjon med fire svinghjul
- 24" drivhjul slik at brukeren kan kjøre stolen selv
- XL-versjon med svinghjul (maks brukervekt 180 kg og større avstand mellom armlenene)

Egenskaper



Ocean 24" hjul

24" drivhjul med hurtigkopling gir brukeren mulighet til selv å manøvrere stolen. Fire svinghjul er standard.



Enkel justering av setehøyde - uten bruk av verktøy!



Ocean XL

Bredere rygg og maksimal brukervekt 180 kg.



Enkel demontering for transport og lagring.



Stabil, rustfri stålramme.



Aquatec **Ocean Vip**

Aquatec **Ocean Vip**

- Stabil, rustfri stålramme
- Manuell setetilt, tiltvinkel 0° - 35°
- Gassfjær i rustfritt stål
- Meget stabil selv når maksimum tiltet
- Setehøyde kan justeres i 3 nivåer, uten bruk av verktøy
- Meget komfortabelt, ergonomisk formet sete
- Ryggtrekket er justerbart med bånd på baksiden for tilpasning til brukerens ryggform. Båndene har hurtigkobling slik at trekket enkelt kan tas av for vask

Ocean Vip tilbys med følgende:

- Standard versjon med svinghjul
- Standard versjon med svinghjul og bekkenholder
- Standard versjon med svinghjul, bekkenholder og myksete
- **XL**-versjon med svinghjul (større avstand mellom armlenene)

Egenskaper



Hodestøtte

Høyde- og dybdejusterbar hodestøtte er inkludert.



Retningslås

Ett av stolens fire svinghjul er utstyrt med retningssperre for enklere manøvrering over større avstander.



Justerbar setehøyde

Justerbar i 3 nivåer, uten bruk av verktøy.



Ocean Vip i tiltet posisjon



Aquatec **Ocean Dual-Vip**

- Manuell setetilt, tiltvinkel 0° - 35°
- To ekstra gassfjærer for å senke ryggen (vinkel 10° - 50°)
- Håndtak med sikkerhetslås for å senke ryggen
- Meget stabil, selv i maksimalt tiltet vinkel, tippesikringer er inkludert
- Ryggtrekket er justerbart med bånd på baksiden for tilpasning til brukerens ryggform. Båndene har hurtigkopling slik at trekket enkelt kan tas av for vask
- Leveres med bekkenholder og bekken med lokk

Ocean Dual-Vip tilbys med følgende:

- Standard versjon med svinghjul
- **Ocean Dual-Vip** kan tilpasses med XL armlener

Egenskaper



Seteflate 0°, rygg 25°



Maksimal setetilt 35°, rygg 50°



Tippesikringer er inkludert



Aquatec **Ocean E-Vip**

- Setehøyde kan justeres elektrisk fra 500 til 1050 mm
 - Setet kan tiltes elektrisk frem og tilbake (vinkel tilt -5° til 35°)
 - Meget stabil, selv i maksimalt tiltet vinkel og maksimal setehøyde
 - Håndkontroll for enkel justering av setehøyde og setetilt (kun 4 knapper)
 - Forseglede elektriske komponenter: Ideell for bruk i dusjen
- Ocean E-Vip** tilbys med følgende:
- Standard versjon med svinghjul
 - **Ocean E-Vip** kan tilpasses med XL armlener



Ocean E-Vip i posisjon med maksimal tilt og - setehøyde.

Egenskaper



Avtagbar batteripakke



Håndkontroll

Tilbehør Aquatec Ocean



Myksete

Med intimhull.

16341 til **Ocean / Ocean XL / Ocean E-Vip**

1470075 til **Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual-Vip**



Ilegg

For myksete med intimhull.

16343 til alle modellene i **Ocean** serien



Myksete

Med mindre, ovalt hull.

16342 til alle modellene i **Ocean** serien



Sprutskjerm

Forhindrer sprut ved bruk, til myksete med intimhull.

16511 til alle modellene i **Ocean** serien

Tilbehør Aquatec Ocean



Heldekkende myksete
Hel seteoverflate.
1526032 til alle modellene i **Ocean** serien.



Ergonomisk myksete
Ekstra mykt.
1531259 **Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual-Vip**



Vendbart myksete
Vend myksetets åpning i alle fire retninger etter brukerens behov. Monteres enkelt med to klips.
1544469 vendbart myksete til **Ocean, Ocean Vip** og **Ocean Dual Vip**



Fast rygg, avtagbar
1555323 til **Ocean/Ocean Vip/Ocean Dual Vip/Ocean E-Vip**



Ryggpute
For god komfort og ekstra støtte for små brukere.
1558769 til alle modellene i **Ocean** serien



Sikkerhetsbøyle
Ekstra sikkerhet for brukere som lener seg fremover.
10167-10 til alle modellene i **Ocean** serien. Lengde 540 mm.
1470078 XL sikkerhetsbøyle til alle XL modellene i **Ocean** serien. Lengde 620 mm.



XL rygg
Øker avstanden mellom armlen med 80 mm. Ettermontering til **Ocean**.
1534979



Hoftebelte og brystbelte
For sikker posisjonering. Kan justeres individuelt og er enkel å montere. Kan masinvaskes. Til alle modellene i **Ocean** serien.
1470081 Brystbelte, grått
1470082 Hoftebelte, grått



Sikkerhetsbelte
Art. nr.: **1451959** til **Ocean**



Armlenslås
For å låse armlenet.
1470077 til alle modellene i **Ocean** serien.



Bredere XL armlen
Øker avstanden mellom armlen med 4 cm på hver side. Ettermontering til **Ocean Vip, Ocean Dual-Vip** og **Ocean E-Vip**
1470086 Bredere XL armlen (par)



24" drivhjul (sett)
Inkl. bremses og avtagbare aksler.
16379 til **Ocean / Ocean XL**

Tilbehør Aquatec Ocean



Bekken med lokk

Utformet så det enkelt skal kunne settes på plass og tas ut av holderen.

10230 til alle modellene i **Ocean** serien. Lengde 460 mm

Bekkenholder (ikke vist)

16335 til **Ocean / Ocean XL**
1470076 til **Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual-Vip**
1471233 til **Ocean E-Vip**



Hodestøtte

Nakkestøtte

Hode-/nakkestøtte

1531465 Hodestøtte til **Ocean VIP, Ocean Vip XL, Ocean Dual-Vip** og **Ocean E-Vip**
1531608 Nakkestøtte til **Ocean VIP, Ocean Vip XL, Ocean Dual-Vip** og **Ocean E-Vip**



Benstøtte med fotplate

Polstret, både høyde- og vinkelregulerbar. Passer alle produkter i **Ocean**-serien unntatt **Ocean XL**. Monteres og justeres enkelt uten bruk av verktøy.

1546705 (venstre)
1546439 (høyre)



Amputasjonsstøtte

Polstret, både høyde- og vinkelregulerbar. Passer til alle produkter i **Ocean**-serien unntatt **Ocean XL**.

1556893 (høyre)
1556894 (venstre)



Sidestøtte

Monteres i eksisterende hull for armlensinnfestning. Både høyde- og breddejusterbar. Passer til alle **Ocean**-stoler.

1535077



Multijusterbar nakkestøtteholder

Holder med svært mange tilpasningsmuligheter. Leveres uten nakkepute.

1531613 til **Ocean Vip** og **E-Vip**.



Tippesikring - front (par)

Forhindrer at stolen tipper forover.

1525936 til **Ocean Vip/Vip XL** og **Ocean Dual Vip**.

1553395 til **Ocean**.



Hygienepute

Brukes sammen med toalettstolen for å gi trykkavlastning og motvirke fremoverglidning. Med feste til standardsete.

Art. nr.: **LTC3**
 Str. i cm (b x d): 45 x 50



Hygienepute

Brukes sammen med toalettstolen for å gi trykkavlastning og motvirke fremoverglidning..

Art. nr.: **LTC1/LTC2**
 Strl. i cm (b x d): 43 x 43 / 50 x 45

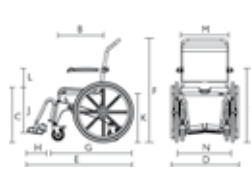
Tekniske data

Produkt	Artikkelnummer						
	Aquatec Ocean	Aquatec Ocean 24" drivhjul	Aquatec Ocean XL	Aquatec Ocean Vip med tilt	Aquatec Ocean Vip XL med tilt	Aquatec Ocean Dual-Vip med tilt og senk	Aquatec Ocean E-Vip
Dusjstol med svinghjul og bekkenholder og bekken m/lokk	1556891		1537787				
Dusjstol med 24" drivhjul og bekkenholder og bekken m/lokk		1534329					
Dusj- og toalettstol med svinghjul og bekkenholder og bekken m/lokk				1470793 (med myksete)	1540261 (stol) + 1470075 (myksete)	1540262 (stol) + 1470075 (myksete)	1521490 (med myksete)
Dimensjoner							
Setebredde	480 mm (A)	480 mm (A)	480 mm (A)	500 mm (A)	500 mm (A)	500 mm (A)	480 mm (A)
Setedybde	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)
Setehøyde	475 - 600 mm (C)	475 - 600 mm (C)	475 - 600 mm (C)	510 - 610 mm (C)	510 - 610 mm (C)	510 - 610 mm (C)	500 - 1050 mm (C)
Total bredde	560 mm (D)	675 mm (D)	640 mm (D)	595 mm (D)	625 mm (D)	625 mm (D)	730 mm (D)
Total dybde	900 mm (E)	1060 mm (E)	900 mm (E)	1060 mm (E)	1060 mm (E)	1060 mm (E)	1010 mm (E)
Total høyde uten justerbar hodestøtte	940 - 1070 mm (F)	940 - 1070 mm (F)	940 - 1070 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1070 - 1620 mm (F)
Dybde uten benstøtte	700 mm (G)	855 mm (G)	700 mm (G)	845 mm (G)	845 mm (G)	845 mm (G)	1010 mm (G)
Dybde fotplate	155 mm (H)	155 mm (H)	155 mm (H)	160 mm (H)	160 mm (H)	160 mm (H)	155 mm (H)
Høyde til armlen	680 - 850 mm (I)	680 - 850 mm (I)	680 - 850 mm (I)	720 - 860 mm (I)	720 - 860 mm (I)	720 - 860 mm (I)	730 - 1320 mm (I)
Høyde, benstøtte til sete	255 - 495 mm (J)	255 - 495 mm (J)	255 - 495 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)
Høyde, gulv til nedre setekant: med holder til bekken	390 - 520 mm (K)	390 - 520 mm (K)	390 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 970 mm (K)
uten holder til bekken	410 - 540 mm (K)	410 - 540 mm (K)	410 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	465 - 1015 mm (K)
Høyde, sete til armlen	210 / 250 mm (L)	210 / 250 mm (L)	210 / 250 mm (L)	215 / 245 mm (L)	215 / 245 mm (L)	215 / 245 mm (L)	230 - 270 mm (L)
Bredde mellom armlen	460 mm (M)	460 mm (M)	540 mm (M)	475 mm (M)	555 mm (M)	475 mm (M)	470 mm (M)
Bredde, intimhull i seteplate	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm
Dybde, intimhull i seteplate	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Tilt setevinkel	-	-	-	0° - 35°	0° - 35°	0° - 35°	-
Tilt ryggvinkel	-	-	-	-	-	10° - 50°	-
Høydejustering	25 mm	25 mm	25 mm	50 mm	50 mm	50 mm	trinnløs
Ø Svinghjul	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Ø Hjul	-	24" (610 mm)	-	-	-	-	-
Bredde mellom 24" drivhjul	-	540 mm (N)	-	-	-	-	-
Annen info							
Vekt	14.5 kg	19.5 kg	14.5 kg	23.5 kg	23.5 kg	28.3 kg	39 kg
Maks brukervekt	150 kg	150 kg	180 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Farge	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit

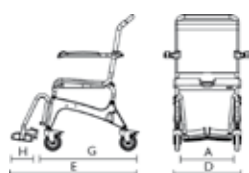
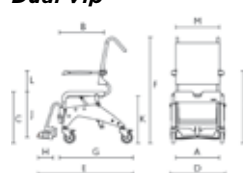
Ocean med svinghjul



Ocean med 24" hjul



Ocean XL


 Ocean Vip/Vip XL/
Dual Vip


Ocean E-Vip

