



Få perfekt støtte - forbli aktiv!

Invacare **XLT** er den ideelle fastrammestolen til daglig bruk. Stolen er utformet for å gi brukeren god støtte, og mulighet for selvstendighet, mobilitet og en aktiv livsstil. **XLT** kan tilpasses brukerens behov, og det finnes et bredt utvalg av tilbehør.

* Prisforhandlet:

- Post 2: Aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte
- Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter



Prisforhandlet i antrasitt sort rammefarge.

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



Perfekt tilpasning

Invacare **XLT** er konstruert med tanke på den enkelte brukers ulike forutsetninger. Rett tilpasset brukerens spesifikke behov, gir XLT de beste forutsetninger for å beholde, gjenvinne eller forbedre bevegelsesfrihet såvel som uavhengighet. *Invacare* **XLT** kan fås i 3 fastrammemodeller: **Aktiv** 75° knevinkel med fast fotbøyle, **Dynamisk** 90° med fast fotbøyle, eller **Swing** med delte benstøtter. Med et bredt og lett tilgjengelig sortiment av tilbehør fra Invacare er det mulig å tilpasse stolen uten problem.

Stabilitet, styrke og et aktivt liv

Invacare **XLT** er konstruert i titan, noe som sikrer optimal tilpasning og styrke uten å gå på kompromiss med den lave vekten. De unike egenskapene, det brede utvalget av tilbehør, og flere konfigurasjonsmuligheter, gjør at **XLT** kan gi brukeren en rullestol med maksimal sikkerhet og støtte som er nødvendig i en travel og aktiv hverdag.

Svensk kvalitet

Invacare, i samarbeid med *Rea*, har vært kompromissløse i utviklingen av nye **XLT**. Stolen er utformet og produsert på Reafabrikken i Sverige. Brukeren vil dra fordeler av

en sterk tradisjon for kvalitet både fra Invacare og *Rea*. Sammen er den ultimate og unike stolen skapt: Den nye *Invacare* **XLT**.

Prisforhandlede XLT-modeller



XLT active 75° - Post 2



XLT dynamic 90° - Post 2

Prisforhandlet i antrasitt sort rammefarge.



XLT Swing - Post 3

Benstøttene kan svinges til side eller inn under stolen for enklere forflytning og ved kjøring i trange omgivelser.

XLT er også tilgjengelig for tyngre brukere opp til 180 kg, **XLT Max**.

Egenskaper og tilbehør



Armlen

① Avtagbart armlen med kort armlenspolster, ② Avtagbart armlen med langt armlenspolster, ③ Oppfellbart og avtagbart armlen med langt armlenspolster, ④ Oppfellbart og avtagbart armlen med kort armlenspolster



Titan fotbøyle

Kan monteres på **Aktiv** (75°) eller **Dynamisk** (90°) ramme.



Tippesikring

Den nye tippesikringen kan enkelt klappes vekk ved bruk av foten. Likeledes kan den vinkles utover for å gi mer plass til ledsageren.



Eikebeskyttere 22" og 24"

Art. nr. 5102800 - 22"

HMS nr. 27113

Art. nr. 5102807 - 24"

HMS nr. 27114




Rammebeskytter



Dekk

① massive, ② luftfylte, ③ lav profil, ④ høytrykksdekk, ⑤ punkteringsfrie, ⑥ sorte Marathon Evolution.

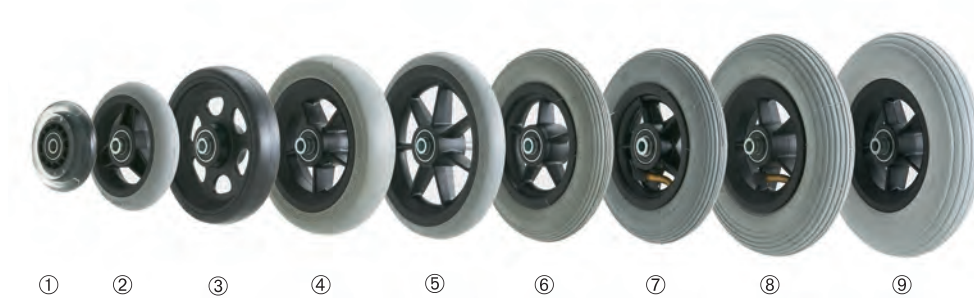

Svinghjul

① 75 x 24 harde (3"),
② 100 x 27 halv massiv (4")
③ 125 x 27 halv massiv (5"),

④ 140 x 37 myke (5,5")
⑤ 150 x 27 halv massiv (6"),
⑥ 150 x 30 myke (6"),

⑦ 150 x 32 luftfylte (6"),
⑧ 180 x 40 luftfylte (7"),
⑨ 180 x 40 myke (7")



Hoftebelte

Art. nr. 1551066
HMS nr. 138819



Bord inkludert monteringskit

Art. nr. 5206727 Bord S
HMS nr. 08676
Art. nr. 5206725 Bord M
HMS nr. 08678
Art. nr. 5206725 Bord L
HMS nr. 08678



Krykkeholder

Art. nr. 5106390
HMS nr. 9414



Tramperør

Art. nr. 1493346

Tekniske data



Invacare XLT Active	355 - 480 mm	400 / 450 / 500	400 - 520 mm	200 - 490 mm	380 - 505 mm	0 - 14°
Invacare XLT Dynamic	355 - 500 mm	400 / 450 / 500	400 - 500 mm	200 - 490 mm	355 - 485 mm	0 - 14°
Invacare XLT Swing	330 - 505 mm	400 / 450 / 500	390 - 520 mm	200 - 490 mm	280 - 510 mm	0 - 14°

trinn på 15 mm 40 mm justerbar



Invacare XLT Active	± 10°	Setebredde + 200mm	610 - 1050mm	830 - 1030 mm	9.8 kg	135 kg
Invacare XLT Dynamic	± 10°	Setebredde + 200mm	610 - 1050mm	730 - 880 mm	9.8 kg	135 kg
Invacare XLT Swing	± 10°	Setebredde + 200mm	610 - 1050mm	820 - 1230 mm	11.3 kg	135 kg



Invacare XLT overholder ISO 7176-19 spesifikasjoner. Bemerk at det kan være særlige betingelser med hensyn til tilbehør. For detaljerte opplysninger om transport i buss eller bil sittende i rullestolen, vennligst se brukermanual. Denne finnes også på www.invacare.no.

Invacare XLT Active	6 kg	Crashtestet ISO 7176-19
Invacare XLT Dynamic	6 kg	
Invacare XLT Swing	6 kg	

Rammefarge



Blå




Rød



Sort (standard)



Grå

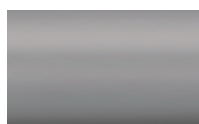

Titan*
(Ikke for Swing)



Orange*

* Tilgjengelig som spesialfarge

Standard konfigurasjon XLT Active 75° og Dynamic 90°:

- Faste kjørehåndtak
- Høydejusterbar, nedfellbar, låsbar og vinkeljusterbar rygg med velcro
- Velcro setetrekk for posisjonering
- Saksebremser
- Avtagbare klesbeskyttere
- Drivhjul 24" luftfylte dekk
- Svinghjul 5" medium hard (125 x 27 cm)
- 3° camber
- Titanramme i antrasitt sort, 75 grader
- Fast fotbøyle i aluminium
- Innsvingbare tippesikringer 2 stk.
- Rammefarge: antrasitt sort

Standard konfigurasjon XLT Swing:

- Faste kjørehåndtak
- Velcro setetrekk for posisjonering
- Høydejusterbar, nedfellbar, låsbar og vinkeljusterbar rygg med velcro
- Avtagbare og høydejusterbare klesbeskyttere
- Avtagbare høydejusterbare benstøtter 80°
- Oppfellbare vinkelfaste fotplater
- Standard pull-bremser
- Drivhjul 24" luftfylte dekk
- Svinghjul 5" medium hard (125 x 27 cm)
- 3° camber
- Innsvingbare tippesikringer 2 stk.
- Rammefarge: antrasitt sort

Trekk



Sort Jemima