



Mobil trappeklatrer

Med hjelp fra en ledsager, kan **Alber scalamobil** trygt og lett ta seg opp alle typer trapper. Dette kraftfulle tilbehøret kan moteres på et stort antall manuelle rullestoler. Det innovative ErgoBalance-håndtaket er ergonomisk utformet for å gi en sikker og enkel håndtering. De integrerte IQ-sensorene overvåker vinkelen på klatingen, og bidrar dermed til riktig håndtering og økt sikkerhet. Økt aksjonsradius kombinert med forbedret fremkommelighet gir økte muligheter for rullestolbrukere.



Patentert klatremekanisme

Med **scalamobil**s patenterte klatremekanisme er det mulig å komme opp og ned alle former for trapper. Belastning for ledsager er marginal. Systemet er designet for å gi så behagelig og skånsom overgang som mulig mellom trinnene. **scalamobil** kan klatre opp til 300 trinn på et fulladet batteri. På grunn av det kompakte hjulklatresystemet og myke hjul, vil ikke **scalamobil** gjøre skade på trappen. Det slitesterke materialet på hjulene gir lang levetid.

Sikkerhet og komfort

scalamobil er montert med ergonomiske håndtak og har sikkerhetsbremses på alle 4 hjul. De ergonomiske håndtakene er designet for å gi et godt, behagelig og sikkert grep, og sikkerhetsbremsene bremser trappeklatreren i god tid før den når kanten av et trappetrinn. Til sammen gir det ledsager og bruker sikkerhet og komfort.

Bærbar

scalamobil passer inn i alle biler fordi den lett kan demonteres til små og lett håndterlige komponenter. Motordelen har et integrert bærehåndtak. Kun to små låsesplinter må brukes for å montere eller

demontere **scalamobil**. **scalamobil** kan brukes til nesten alle manuelle rullestoler, og kun små beslag må moteres på stolen for å kunne bruke **scalamobil**.

Egenskaper



Transportklar scalamobil

De kompakte og lette komponentene er enkle å transportere.



ErgoBalance-håndtak

Ergonomisk utformet for komfortabel og trygg håndtering.



Stort og tydelig display

Alle viktige funksjoner vises direkte på displayet.



Batteripakke

Lett å montere eller demontere ved utskiftning eller transport.

Egenskaper



Sikkerhetsbrems


På alle fire hjulene. Stopper automatisk på trappekanten.



Batterilader

Automatisk lader med indikator for ladestatus.

Tilbehør

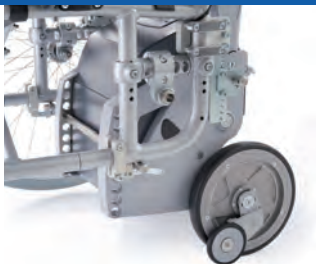

Beslag til rullestol

Den unike beslagteknologien gjør at nesten alle type rullestoler kan få montert og demontert systemet i løpet av !



Billader

Lader med automatisk frakobling til anvendelse i bilder og busser. 12-13 volts inngang.



Hoftebelte

Ekstra sikkerhet for brukeren.
Art. nr. 1456343



Hodestøtte

Gir stabilitet for nakke og hode under trappeklatring. Justerbar i høyde og dybde.
Art. nr. 1520455



Alber scalacombi S36

Inneholder integrert oppfellbart sete og rygg. **scalacombi** anvendes typisk av brukere som ikke har behov for en rullestol, men som har bruk for hjelp til å komme opp og ned trapper. Ideel til bruk ved trange plassforhold, smalle trapper eller lignende.



Scalaport X7

En universal løsning til anvendelse i forbindelse med manuelle rullestoler uten monteringsbeslag.

Tekniske data

scalamobil	maks. 19	opp til 300 (avhengig av brukers vekt)	24 V / 3,4 Ah	178 W	2,7 kg	200 mm (mulighet 250 mm)	110 mm

scalamobil	klatreenhet: 17,4 kg kjørehåndtak: 4,9 kg	140 kg*

* Trappeklatrerenes testede maksimal brukervekt kan aldri være høyere enn den manuelle rullestolens maksimale brukervekt. Ledsagerens fysikk bør også tas i betraktning.



Hovedprodukt		
Invacare art.nr	HMS art.nr	Beskrivelse
1520731	174014	scalamobil
1520417	174506	scalacombi

Standard konfigurasjon:

- **Scalacombi:** Komplet med sete, batteri og lader
- **Scalamobil:** Komplet med universalfeste for manuell rullestol, batteri og lader