

Invacare® | ACS 2



Kontroll... ut til fingertuppene

Invacare **Advanced-Control-System ACS 2** er etterfølgeren til den fremgangsrike **ACS**, og kontrollerer alle funksjoner på den elektriske rullestolen, alt fra kjøre- og sitteinnstillinger til lys og andre vesentlige funksjoner. Med **ACS 2** introduseres nye elektronikk- og aktuatormoduler for å møte nye behov som høye kliniske krav, renovering og kostnadsoptimalisering. Brukeren vil verdsette innførelsen av en LCD-skjerm i farge, og serviceteknikeren får en spillfunksjon som forenkler omprogrammering eller service. Modulene til **ACS 2** er i høy grad tilbakekompatible, og erfarne brukere kan overføre sin kunnskap direkte til denne nyheten.

ACS2 styreboks og powermodul inneholder spillfunksjonalitet. Det vil si at det er en kopi av kjøreprogram både i styreboks og powermodul. Hvis en av delene byttes, kan kopien lastes over slik at programmering ikke er nødvendig.



Yes, you can.®



Enkel programmering

I sin enkleste konfigurasjon kan en elektrisk rullestol styres med bare to **ACS 2** moduler: Den nye styreboksen **REM550** har en LCD-skjerm i farge med menyveiledning, samt en speillfunksjon som forenkler programmering. De nye elektronikkmodulene har integrert lysfunksjon og støtter speillfunksjonen.

Modulkontroll

- Velg mellom 2 eller 4 funksjoner på modulen som styrer aktuatoren.
- Hastigheten på respektive aktuator står i proporsjon til joystickutslaget og man kan kombinere opp til 12 aktuatorer ved å kombinere ACT-modulene.
- Flere aktuatorer kan programmeres til å operere samtidig.
- Mulighet for å programmere "intelligent kontroll" av hastighet, stopp etc.

Meget fleksibel

Et utvalg av 4 grunnstyrebokser (Master), 3 elektronikk-og 2 aktuatormoduler, gjør **ACS 2** meget fleksibel. Den store fleksibiliteten og det store utvalget av styrebokser, elektronikk og aktuatormoduler gir den beste funksjonen til brukeren. Det er også en god økonomisk løsning da man kan velge funksjoner utifra de individuelle behov. Oppgraderinger kan gjøres når som helst. En "Master" manøverboks kan erstattes

med en annen fra **ACS**-familien; ledsagerstyring, eksterne joysticks og brytere kan legges til for å gjøre livet enklere for brukeren. Hovedstyring, scanner og minijoystick er ytterligere tillbehør som finnes tilgjengelig.

ACS 2 modulene seriekoples med BUS-kabler som er tilbakekompatible, dette gjelder også arbeidsverktøy som hånd-programmeren og PC software wizard.

Komponenter



REM550

- Standard styreboks
- LCD fargeskjerm
- Speilfunksjon av kjøreprogram

Invacare art. nr SP1523444
HMS art.nr 167713



REM G90A

- Kompakt styreboks
- Enkelt skifte mellom kjøre- og elfunksjoner
- Intelligent aktuator kontroll
- Uttak til eksterne brytere

Invacare art.nr DX-REMG90A
HMS art.nr 143472



REM G90T

- Kompakt styreboks
- Enkelt skifte mellom kjøre- og elfunksjoner
- Intelligent aktuator kontroll
- Uttak til eksterne brytere
- Med vippebryter

Invacare art.nr DX-REMG90T
HMS art.nr 159440



REM 24SD

- Tradisjonell styreboks
- Enkelt skifte mellom kjøre- og elfunksjoner
- Uttak til eksterne brytere

Invacare art.nr DX-REM-24SD
HMS art.nr 022404



Intuitiv ledsagerstyring IDC

- Trinnløs justerbar hastighet
- Nødstoppfunksjon

Invacare art.nr SP1509875
HMS nr 164780

Holder

Invacare art.nr SP1521488
HMS nr 167717



Ekstern joystick

- Alternativ joystick
- Kan plasseres fritt

Invacare art.nr DX-RJM
HMS art.nr 018534



Håndkontroll ARC5

- Separat kontroll for opp til 5 el-funksjoner
- Individuelle trykknapper
- Kan plasseres hvor som helst

Invacare art.nr DX-ARC5-AS
HMS art.nr 018530



Ekstern ladeplugg

- For enklere tilgang til lading

Invacare art.nr DX-ACC3
HMS art.nr 159441



Ledsagerstyring

Art nr HMS art. nr.
1423651 066432 Ledsagerstyring
1423650 066437 holder Kontur



Forgreiner

- Mulighet for å koble til flere moduler

Invacare art.nr DX-SKT-X4
HMS art.nr 067615



iPortal

- Muliggjør styring av Apple-enheter med joystick. Inneholder også USB laderuttak.

Invacare art. nr. DJ-BTINT-HID-ACC
HMS art. nr. 194059



BUS kabel

- Kan velge ulike lengder etter behov



Yes, you can.®

Komponenter



G91 S

- Displaypanel
- Håndterer alle typer eksterne joysticker

Invacare art.nr DX-REMG91S
HMS art.nr 167731



Styreboks REM34

- Lutende panel gir et godt overblikk
- Knappestyrte elfunksjoner med LED display
- Tute, batteriindikator og magnetlås

Invacare art.nr DX-REM34
HMS art.nr 022403



Bordstyring REM41D

- Monteres som bord- eller midtstyring
- Knappestyrte elfunksjoner med LED display
- Tute, batteriindikator og magnetlås

Invacare art.nr DX-REM41-S
HMS art.nr 18531



Joystick-tilbehør

Bredt utvalg av alternative styreknotter. Se tilbehørsoversikt.



Mini-joystick

- Fire brytere beveger joysticken i fire retninger
- Den femte bryteren brukes ved å presse ned joystick
- Kan enkelt monteres for hånd- eller hakebetjening

Invacare art.nr SWTA5020
HMS art.nr 143477



Fingerstyring

- Rullestolen manøvreres med liten kraft av en finger
- Kan monteres alle vinkler


Invacare art.nr DX-RJM-VIC-CCD



Heavy Duty Joystick

- Forsterket joystick
- Tåler hard behandling
- 8 styringsretninger

Invacare art.nr DX-RJM-HD
HMS art.nr 018535

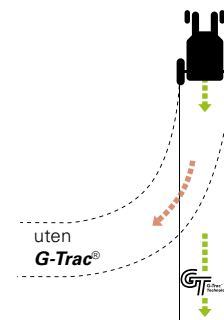

G-Trac®

Forbedrer retningsstabilitet og veigrep. Gjør stolen enklere å kjøre og forhindrer skrens. Kontakt din lokale Invacare-representant for detaljer.

Oppsett ledsagerstyring

Art nr	Beskrivelse	Storm ^{®4} Intuitiv ledsagerstyring montert fra fabrikk og ettermontert (Bruker- styrt REM550 montert foran)	Storm ^{®4} KUN ledsa- gerstyrt med INTUITIV led- sagerstyring	Storm ^{®4} KUN ledsa- gerstyrt med FORUS ledsa- gerstyring	TDX [®] SP2 Intuitiv led- sagerstyring ettermontert	TDX [®] SP2 KUN ledsa- gerstyrt med Intuitiv ledsa- gerstyring	TDX [®] SP2 KUN ledsa- gerstyrt med FORUS ledsa- gerstyring
1423651	Ledsagerst B30			✓			✓
51824	Feste DX-REM41		✓	✓		✓	✓
1423650	Feste contur Storm3		✓	✓		✓	✓
GJS0055	Joystick forlenger			✓			✓
SP1527930	Styreboks DX-REM41		✓	✓		✓	✓
GSM63003	Busskabel 30 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GSM63020	Busskabel 2m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SP1537966	Holder forgreining busskabel	✓	✓	✓			
SP1537967	Forgreining buss kabel dx-skt-4x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SP1509875	Intuitiv ledsagerstyring ACS	✓	✓		✓	✓	
SP1521488	Feste Intuitiv ledsagerst. ACS	✓	✓		✓	✓	