

Robin®



Perfekt balanse og komfort



Takløfteren *Invacare Robin* foretar forflytninger på den mest innovative måte, også med tanke på pleiepersonalet. Den er designet med to parallelle stropper, som gir stabilt løft og god kontakt mellom brukeren og personalet, samtidig som det ivaretar pasientens komfort og trygghet. Uten behovet for en løftebøyle kan forflytningen foregå med verdighet.



Komfort

Designet med to parallelle løftestropper gir svært god stabilitet i forflytningen. Slow start/stopp-funksjonen gjør forflytningen mer skånsom for brukeren. Motoren har to hastigheter slik at forflytningen kan utføres raskere. Konfigureringen med to parallelle stropper eliminerer behovet for løftebøyle, og tilpasser seg brukerens vekt og fasong.

Trygg og verdig forflytning

Personlig kontakt er viktig. Fraværet av en løftebøyle reduserer faren for å komme nær delene på løfteutstyret. Dette forsterker følelsen av en unik og verdig måte å forflytte personer på.



Enkel å arbeide med - lett å anvende

Vårt patenterte stropesystem gjør det lettere for pleiepersonalet å montere seilet korrekt, og med den enkle låsemekanismen er sikkerheten høy. Motorenheten kjøres enkelt via skinnerystemet i rett posisjon. Den brukervennlige håndkontrollen har tydelige funksjonstaster, og er lett å anvende. Et blått lys på undersiden av motorenheten lyser når løfteren er i bruk. Lyset vil blinke ved lavt batterinivå.


Egenskaper og tilbehør



**Nødstop og
nødsenkning**



**Selvjusterende
stroppeinnrulling**

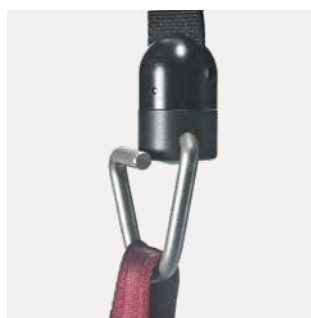

**Automatisk sikrede
løftekroker**



**Snappås til
håndkontroll**

Egenskaper og tilbehør



Robin

Det unike stropesystemet uten bruk av løftebøyle.



Robin Mover

Med integrert framdrift.



Blått lys indikerer at motoren er i bruk. Lyset blinker ved lavt batterinivå.



Lad motoren gjennom håndkontrollen når den ikke er i bruk.



Eksternt reservebatteri

Art.nr 1444014



Betjeningsknapper på løftmotoren



Vekt

Enkel å montere og å bruke.
Art.nr 1493132



Flexiscope

Breder ut løftebåndene for å gi større avstand mellom løftekrokene.
Art. nr 1446269-7012






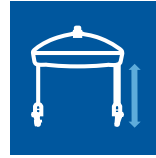
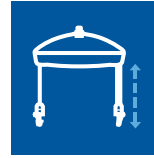


Planløft

Gir god forflytning ved horisontalt leie.
Art. nr 1504765-7012



① **Håndkontroll**
Med symboler på knappene.
② **Robin Mover håndkontroll**
Med symboler for opp/ned og retning.


Tekniske data

	Lengde motor	Bredde motor	Høyde motor	Lengde stropper	Regulering av lengde, stropper	Produktvekt	Maks. brukervekt
Robin	 470 mm	 250 mm	 190 mm	 2,5 meter	 30 mm/s (85 kg), 40 mm/s (0 kg)	 7 kg	 200 kg
Robin Mover	470 mm	250 mm	310 mm	2,5 meter	30 mm/s (85 kg), 40 mm/s (0 kg)	9,5 kg	200 kg



Bariatrisk bruk

Rammefarge



hvit/grå



Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 Oslo



Yes, you can.®



© 2020 Invacare International GmbH. All rights reserved. All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. Robin - NO - 04/2020