

NordBed™ Optimo-serien



ERGOMOVE™-TEKNOLOGI | UTMERKET TIL GJENBRUK | SELVSTENDIG



Sengene fra **NordBed Optimo-serien** er ideelle for bruk i hjemmepleie og kommunale korttidslager. Med komfort i særklasse og enkel bruk, fremmer **NordBed Optimo** selvstendighet og sikrer pasientene bevegelighet. Trykkavlastning er kjernen for **ErgoMove-teknologien**. **NordBed Optimo 90** sin enkle utforming gjør at både pasienten samt pleiere og teknikere med enkelhet kan betjene sengen. **NordBed Optimo Wide** sikrer pasienter med høyere kroppsvekt ekstra plass og egner seg godt for dem som trenger mer plass til å bevege seg i sengen.

ErgoMove-teknologi

NordBed Optimo har **ErgoMove-teknologi** som gir pasienten aktiv sittestilling med rygglenstilbakeføring ved hjelp av et tastetrykk. I aktiv sittestilling kan pasienten enkelt spise, drikke og lese samtidig som trykkfordelingen opprettholdes.

Løfteegenskapene bidrar til en naturlig bevegelse av liggeflaten i samspill med kroppens fasong. Sammen med den automatiske liggeflatereguleringen, sikrer det at pasienten forblir i den samme stillingen og motvirker friksjon og forskyvning.



Up-and-Out™

For en trygg og smidig forflytning, samt økt selvstendighet og bevegelighet, er pasientene i stand til å manøvrere **Up-and-Out**-funksjonen kun ved hjelp av et tastetrykk. Ved hjelp av innstillingene vil liggeflaten automatisk justeres til en passende posisjon for å forenkle inn- og utstigning av sengen, i tillegg til å forebygge friksjon og forskyvning.



6

UNIKE EGENSKAPER

1

ErgoMove-teknologi

- ▶ Løfter pasienten komfortabelt til en aktiv sittestilling.

2

Enkel håndtering

- ▶ Demonteres enkelt for frakt og lagring. Ideell for gjenbruk.

3

Flere størrelser

- ▶ Tilgjengelig i bredde 90, 105 og 120 cm.



4

Up-and-Out

- ▶ Sikrer en trygg og smidig forflytning

6

Optimalisert madrass understøttelse

- ▶ Ifølge antropometrisk måling, for økt komfort

5

Design

- ▶ Bredt utvalg av endegavler med treutførelser og farger.

Øvrige egenskaper og tilbehør

▶ RememberMe™:

- Programmerbar håndkontroll med LCD
- **ErgoMove** og **Up-and-Out** kan tilpasses pasientens behov

▶ Integriert liggeflateforlenger

- Forlengbar med opp til 10 cm ved hode- og fotenden

▶ Anti-Trendelenburg og Trendelenburg-funksjon

- Anti-Trendelenburg gir økt komfort for pasient ved god redistribusjon av trykket i aktiv posisjon
- Ved tilvalg av Trendelenburg-funksjon kan dette benyttes ved medisinsk behandling og sikre god pleie ved akutte situasjoner

▶ Under-bed-light

- Lyset kan enkelt slås av og på med håndkontrollen
- Forebygger mot fall og uhell
- Et Out-of-bed-light kan også slå seg på automatisk ved utstigning

Egenskaper og fordeler



◀ Transport og lagring

NordBed Optimo 90 og 105 cm kan demonteres i kun 5 deler. På **Optimo** 90 veier ingen av delene mer enn 20 kg. Dette sikrer enkel og praktisk frakt og håndtering for pleiere og teknisk personale. Monteringen er enkel og intuitiv, og sengen kan flyttes uten behov for transportstativ. **NordBed Optimo** 120 cm kan demonteres i tre deler og enkelt flyttes med en tralle.



◀ Laget for gjenbruk

Sengene i **NordBed Optimo-serien** kan tilpasses maskinvask.






◀ Håndkontroll

- De oftest anvendte knappene har forskjellige farger, som er nøye valgt ut av eksperter, for enkelt å skille mellom funksjonene.
- Hver enkelt knapp lyser når den blir trykket på, for å hjelpe pasienten både på dagtid og kveldstid.
- Hovedknappene er plassert øverst på håndkontrollen for enkel manøvrering. Øvrig justering gjøres enkelt med de andre knappene.
- Håndkontrollen er låsbar som standard.

Dette er **NordBed Optimo**-serien

NordBed Optimo er tilgjengelig i forskjellige vekt-kategorier og størrelser

	Demontert	Maks brukervekt	Sengens tyngste del
<p>NordBed Optimo 90 <i>Gir selvstendighet og sikrer bevegelse</i></p> 	5 Deler	200 kg	20 kg
<p>NordBed Optimo 105 <i>Bredere seng tilpasset pasienter som trenger mer plass til forflytning i sengen</i></p> 	5 Deler	200 kg	25 kg
<p>NordBed Optimo 120 <i>Ekstra komfort for større personer</i></p> 	3 Deler	250 kg	70 kg

En rekke konfigurasjoner som åpner for mange muligheter

Tekniske data ▼


Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Bredde
utvendig
Bredde
innvendig ▼



Lengde
utvendig
Lengde
innvendig ▼

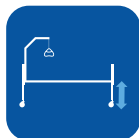

Høyde-
regulerbar ▼



Inndeling
liggeflate ▼



Klaring under
sengen ▼



Lårvinkel ▼

NordBed Optimo 90	100 / 90 cm	213 / 200 cm	31 - 81 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°
NordBed Optimo 105	115 / 105 cm	213 / 200 cm	31 - 81 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°
NordBed Optimo 120	130 / 120 cm	213 / 200 cm	31 - 81 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°



Leggvinkel ▼



Anti-
Trendelenburg /
Trendelen-
burg ▼



Maks.
brukervekt ▼



Samlet vekt ▼



Sengens
tyngste del ▼




Maskinvaskbar
▼

NordBed Optimo 90	19°	+/- 15°	200 kg / SWL 235 kg	100 kg	20 kg	Yes
NordBed Optimo 105	19°	+/- 15°	200 kg / SWL 235 kg	100 kg	25 kg	Yes
NordBed Optimo 120	19°	+/- 15°	250 kg / SWL 285 kg	130 kg	70 kg	Yes

NB: Senge må ikke benyttes av personer under 12 år, eller personer med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Rammefarge ▼

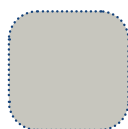

Aluminiumsgrå

Treverk ▼



Bøk



Eik



Umbra



Bøk/lyseblå



Lyseblå



Hvit

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 OSLO



Yes, you can.®