

# SoftCloud™

Vekseltrykkmadrasser



ALLSIDIG | INTUITIVT DESIGN | KOMFORT



# Invacare SoftCloud-serien

---

Vekseltrykk-teknologi anbefales for å oppnå forebygging og håndtering av trykksår døgnet rundt, kombinert med individuell overvåkning, reposisjonering og sårpleieprogram.

Helsepersonell møter ofte situasjoner hvor pasienten ikke selv er i stand til reposisjonering. Under disse omstendighetene anbefaler EPUAP å bruke et aktivt støtteprogram som en del av trykksårforebyggingen.

Invacare **SoftCloud** madrasser og overmadrasser består av aktive støtteflater av høy kvalitet, designet for pasienter med svært høy risiko for å utvikle trykksår. Det vekslende trykket er designet for å omfordele trykk flere ganger hver time, selv om pasienten ikke beveger seg.



---

"Bruk en aktiv støtteoverflate (overmadrass eller madrass) for personer med høy risiko for trykksår når hyppig manuell reposisjonering ikke er mulig" (EPUAP,2014)

---

**NYE**

**EGENSKAPER**

**1**

### Intuitivt design

- ▶ En moderne og intuitiv kontrollenhet



**2**

### Automatisk justering

- ▶ Sørger for klinisk riktig støtte for å sikre pasientens komfort





3

### Maks. fast-knapp

- ▶ Gir en fast overflate for enklere sengetøyskift og reposisjonering av pasient.



#### ▶ Håndtak

For enkel madrasshåndtering og transport.

#### ▶ Sikkerhetsremmer

Tillater sengen å være løst festet til madrassen samtidig som tilgangen til HLR-sikringen er fri.

#### ▶ Trekk med glidelås

360-graders glidelås på toppen av trekket forenkler fullstendig fjerning av trekket ved vask.

#### ▶ Hengslet rygg

Madrassen er konstruert for å hindre at luftcellene glir ned når hjertebrettet heves, og for å motvirke friksjon (gjelder kun SoftCloud Pro).

#### ▶ Permanent avlasting av hælen

De fem hælcellene på SoftCloud Pro tillater permanent avlasting av pasientens hæl. Denne funksjonen er ideell for de fleste pasienter med eksisterende hælssår.

#### ▶ Kabelstyringsystem

Ingen etterfølgende strømkabler.

#### ▶ Stropp

Dersom det oppstår en situasjon hvor det er behov for HLR, skal man dra i den gule stroppen merket CPR. Madrassen tømmes da umiddelbart for luft i bryst- og hodedelen.

#### ▶ Transportmodus

En transportklemme kan festes på slangen under transport, for å sikre at luften holder seg i madrassen når den er frakoblet pumpen.



# SoftCloud-serien

Serien består av fire alternativer, som alle er enkle i bruk:



## SoftCloud Top

- ▶ Overmadrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 12 minutter
- ▶ 1 av 2 Syklus
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

## SoftCloud Air

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 12 minutter
- ▶ 1 av 2 Syklus
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

## SoftCloud Ace

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 10 minutter
- ▶ 1 av 3 Syklus
- ▶ Dampgjennomtrengelig trekk med sveisede sømmer
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

## SoftCloud Pro

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 10 minutter
- ▶ 1 av 3 Syklus
- ▶ Permanent oppblåste luftvegger gir fast sidestøtte med en stabil forflytningsplattform
- ▶ Egen hældel for sensitive hæler
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

## Intuitive kontrollenheter

Kontrollenhetene til **SoftCloud** har et intuitivt display som kan brukes til å justere komfortnivåer ved å gi enten en 1 av 2 eller 1 av 3 vekslende trykkmodus sammen med et statisk alternativ.

Videre tillater en automatisk detekteringsfunksjon i kontrollenheten å automatisk registrere trykk fra kroppen, og justerer trykknivået deretter. Kontrollenhetene har både visuelle alarmer og lydalarmer som aktiveres ved lavt trykk eller strømbrudd. Det er også mulig å skru av alarmene ved rengjøring.



## Tekniske data ▼


For mer informasjon om produktet samt produktets brukermanual, se [www.invacare.no](http://www.invacare.no)



Bredde ▼



Lengde ▼

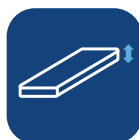

Høyde ▼



Maks. brukervekt ▼

	Bredde ▼	Lengde ▼	Høyde ▼	Maks. brukervekt ▼
<b>SoftCloud Top</b>	83-88 cm	200 cm	13 cm	200 kg
<b>SoftCloud Air</b>	83-88 cm	200 cm	18 cm	200 kg
<b>SoftCloud Ace</b>	83-88 /103-116 cm	200 cm	20 cm	220 kg/ 350 kg
<b>SoftCloud Pro</b>	83-88 cm	200 cm	20 cm	220 kg



Dybde ▼



Bredde ▼



Høyde ▼

	Dybde ▼	Bredde ▼	Høyde ▼	Art.nr	Madress, dymanisk luft	Madressmål
<b>Kontrollenhet 1</b>	12 cm	25 cm	24 cm	1630815	SoftCloud Top, Overmadress inkl.pumpe	88x200x13
<b>Kontrollenhet 2</b>	12 cm	29 cm	25 cm	1630814	SoftCloud Top, Overmadress inkl.pumpe	83x200x13
				1630823	SoftCloud Pro, madress inkl.pumpe	88x200x20
				1630823+1421564	SoftCloud Pro m/pumpe + forlengerkloss	88x210x20
				1630822	SoftCloud Pro, madress inkl.pumpe	83x200x20
				1630822+1487853	SoftCloud Pro m/pumpe + forlengerkloss	83x210x20
				1630817	SoftCloud Air, madress inkl.pumpe	88x200x18
				1630816	SoftCloud Air, madress inkl.pumpe	83x200x18
				1630819	SoftCloud Ace, madress inkl.pumpe	88x200x20
				1630818	SoftCloud Ace, madress inkl.pumpe	83x200x20
				1630820	SoftCloud Ace, madress inkl.pumpe	103x200x20
				1630821	SoftCloud Ace XL, madress inkl.pumpe	116x200x20

## Farge ▼



Mørk blå

Fargen kan variere litt fra fargen vist ovenfor.

## Regulatoriske data ▼

### Madrasen er produsert i henhold til:

European Standard: BS EN 597-1 Cig  
European Standard: BS EN 597-2 Match  
BS7177:1996 Crib 5.

### Kontrollenhet

Lydnivå: ≤ 30 dB

## Annen informasjon ▼

Denne madrassen vil bidra positivt i en komplett pleieplan for trykksårforebyggende omsorg.

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo



Yes, you can.®