



Invacare[®] | **Soft Tilt**

Støtte og posisjonering – til fordel for
bruker og pleier



Invacare **Soft Tilt**, er et unikt og innovativt nytt system utviklet for automatisk reposisjonering av bruker, samt for å hjelpe pleiepersonalet med daglig stell av bruker og seng.

Soft Tilt er enkel å montere på sengen **SB® 755**. Den beveger seg smidig sammen med sengens eksisterende bevegelige deler samt valgte madrass.

- Automatisert trykkavlastning
- Forenkler pleiearbeidet
- Øker brukers og pleiers komfort



Automatisert trykkavlastning

Soft Tilt kan programmeres til å automatisk vende pasienten i ulike intervaller og vinkler gjennom natten. Dette gir trykkavlastning og forebygger utvikling av trykksår. Ved automatisk innstilling vil vingene aldri heve høyere enn 30 grader, for å sikre optimal sikkerhet og komfort når brukeren sover.

Forenkler pleiearbeidet

Soft Tilt kan benyttes manuelt av en pleier. Dette forenkler arbeid som pleie og stell av bruker, spesielt om pleier jobber alene.

En meget enkel håndkontroll tillater pleier å heve vingene opp inntil 60°. Dette gjør det enkelt å komme til med forflytningshjelpemidler og slynge eller seil, og ved personlig pleie.


Ved bruk i kombinasjon med sengens bevegelige deler kan **Soft Tilt** benyttes til å forenkle inn- og utstigning av sengen. Brukeren kommer seg fra liggende- til stående posisjon med minimal anstrengelse. Dette beskytter pleieren mot potensielle ryggskader.

Øker brukers og pleiers komfort

Takket være de stille, rolige og automatiserte bevegelsene til **Soft Tilt**, kan brukeren nyte en mer komfortabel og uforstyrret søvn.

I tillegg gir den pleieren fordeler ved å jobbe i et mer komfortabelt arbeidsmiljø samt minimerer risiko for ryggskader som normalt oppstår ved forflytning og pleie.



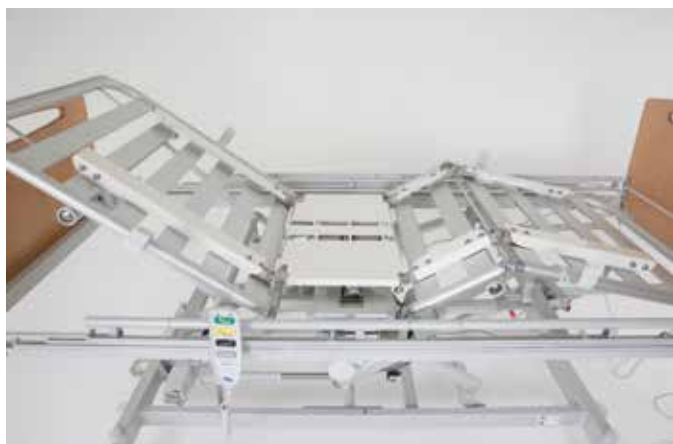

Liggeflate

Fungerer optimalt sammen med sengens bevegelige liggeflate. Sikrer behagelige bevegelser og posisjonering av bruker samt hjelp til forflytning.



Komfortabel, automatisert trykkfordeling

Ved bruk av de automatiserte programmene vil den andre vingen heve litt for å gi ekstra støtte og komfort for brukeren. Straks brukeren oppnår ønsket posisjon vil den andre vingen gå tilbake til horisontal posisjon.



Manuell tilpasning

Ved bruk av håndkontroll, kan vingene heves opp til 60 grader. Dette gir mulighet for enklere håndtering av bruker, for eksempel pleie og tilrettelegging av forflytningshjelpemidler.



Programmerbar kontroll boks

Kontroll boksen har et forhåndsprogrammert (auto) program samt muligheter for å tilpasse to egne programmer for individuell tilpasning. Når programmet er lagret, kan de automatiserte bevegelsene aktiveres med kun et tastetrykk.



Utviklet for komfort

Soft Tilt kan bli programmert til å vende brukeren forsiktig fra en side til den andre, når begge sidene er hevet.



Enkel håndkontroll






Håndkontrollen er meget enkel å anvende for manuell kontroll.



Trekk

Blått trekk og med elastiske stropper som sikrer at madrassen holdes på plass. Kan maskinvaskes opp til 80 grader.

For mere informasjon om dette produktet inkludert bruker manual, vennligst se www.invacare.no

	Maks vinkel i manuell modus	Maks vinkel i automatisert modus	Tid i automatisert modus	Maks brukervekt	Tyngste del av produktet
					
Soft Tilt	60 °	30 °	0 - 180 minutter	165 kg SWL 185 kg	15 kg


NB
Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år, eller pasienter med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Samsvarer med IEC 60601-2-52

Art. nr.	Produktbeskrivelse
1605514	Soft Tilt komplett (til SB755)
1605518	Trekk til Soft Tilt

Rammefarge

Hvit



Vennligst merk at fargen kan variere fra den viste ovenfor

Soft Tilt er produsert av GDV Technology på vegne av Invacare.

Tlf.: +47 22 57 95 00
Fax: + 47 22 57 95 01
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway

Trusted Solutions,
Passionate People

