

Dacapo Top

**Rammeavtale: Madrasser med
trykksårforebyggende egenskaper**



Dacapo

Invacare **Dacapo** tilbyr et bredt utvalg av standard-, komfort- og trykkfordelende madrasser.

Dacapo-sortimentet er utformet for å passe markedets tilbud av pleiesenger, samt tilgodese kravene til hygiene og miljøvennlighet.

Madrassene er flammehemmende i samsvar med europeisk standard EN597-1 og EN 597-2.

Egenskaper



◀ Inkontinenstrekk

Alle **Dacapo**-madrassene har inkontinenstrekk i polyuretanbelagt polyester. Allergitestet og innsatt med middel mot støvmidd.

- ▶ 100 % vanntett
- ▶ Dampgjennomtrengelig
- ▶ Pustende og skånsomt mot huden
- ▶ Fireveis strekkbart
- ▶ Kan vaskes på 95°



◀ Skum som raskt kommer tilbake til opprinnelig form

Polyuretanskum varierer i cellestruktur og tetthet. Skum med relativt uniform, tett cellestruktur gir god støtte under belastning, samtidig som det kommer raskt tilbake til sin opprinnelige form når det er uten belastning.



◀ Enkel å håndtere

Trek med to håndtak som forenkler håndtering.



◀ Glidelås

Trekket har glidelås på tre sider som er dekket av dryppkant.

Dacapo Top

PRISFORHANDLET POST 1

Dacapo Top er en trykkfordelende overmadrass av høy kvalitet som kombineres med en standardmadrass. Madrassen er produsert i viskoelastisk skum som påvirkes av kroppstemperatur, og former seg etter brukerens konturer og bevegelser. Skummet tillater brukeren å synke ned i materialet slik at trykket fordeler seg over en større flate. Mange brukere med muskel- og leddsmærter kan oppleve smertelindring på denne madrassen. Den åpne cellestrukturen i det viskoelastiske skummet minimerer utvikling av varme og fukt, noe som øker komforten betydelig.



- ▶ 70 mm viskoelastisk skum
- ▶ Tetthet 50 kg/m³

Tekniske data ▾



Total vekt ▾


Top

5 - 7,5 kg



Maks. brukervekt ▾

130 kg

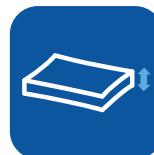

Høyde ▾

70 mm



Vask ▾

95°

Tetthet (kg/m³) ▾

50

Europeisk Standard EN 597-1 og Europeisk Standard EN 597-2 gjelder for alle Dacapo-modeller med polyuretanbelagt trekk.

HMS nr.	IVC art. nr.	Overmadrass m/ inkontinens trekk	Materiale	Produktbeskrivelse
191105	60131582	Overmadrass Dacapo Top b105 l200 h7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
191107	60131583	Overmadrass Dacapo Top b120 l200 h7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
191109	60131580	Overmadrass Dacapo Top b80 l200 h7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
191110	60131579	Overmadrass Dacapo Top b85 l180 h7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
023581	60131581	Overmadrass Dacapo Top b85 l200 h7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
202797	60133221	Overmadrass Dacapo Top b85 l220 h7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
191115	60131578	Overmadrass Dacapo Top b90 l200 h7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
191116	60131584	Overmadrass Dacapo Top b90 l215 h7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk

*Flere størrelser kan bestilles ved forespørsel