

Essential

Touch



Vendbar og trykkfordelende, komfortabel skummadrass



Yes, you can.®

Invacare **Essential Touch** er en vendbar skummadrass som er praktisk, solid og gir god trykkfordeling og liggekomfort.

Forebygger trykksår

- ▶ Madrassen har en nøkkelhull-formet profilering, der hver utskårede enhet er fleksibel og beveger seg slik at kroppen kan synke ned i materialet. Dette bidrar til optimal trykkfordeling og liggekomfort.

Vannrett trekk

- ▶ Polyuretantrekket i fireveis stretch bidrar til å redusere friksjon og shearing. Stoffet er pustende og vannrett. Trekket har to håndtak på den ene siden som forenkler håndtering. Innsiden av trekket er hvitt, slik at det er enkelt å undersøke trekkets tilstand.




Profilering på begge sider

- ▶ Madrassen har tosidig profilering og kan vendes og brukes på begge sider. Dette bidrar til å øke produktets levetid.



Glidelås på tre sider

- ▶ Gjør det enkelt å undersøke madrassen og fjerne trekket for vask.

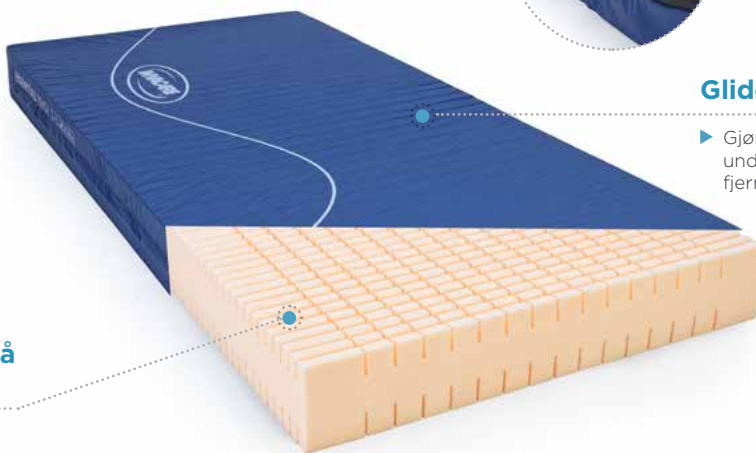

Tekniske data ▼

	Art. nr.	Størrelser	Maks. brukervekt	Vaskbart trekk	Skumtetthet
	Artikkelnr. ▼	Størrelser ▼	Maks. brukervekt ▼	Vaskbart trekk ▼	Skumtetthet (kg/m ³) ▼
Essential Touch	1631830	200 x 83 x 15 cm	150 kg	95°	40-42
	1631831	200 x 88 x 15 cm			
	1631884	220 x 83 x 15 cm			
	1631885	220 x 88 x 15 cm			

Sertifisert iht.:
EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS 7177: Crib Source 5

1. Merk! En madrass kan ikke alene forhindre eller helbrede trykksår, den skal alltid inngå i en komplett pleieplan.

For mer informasjon om produktene og produktenes brukermanual, vennligst se www.invacare.no.



Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®