

# Alber® *scalacombi*®

alber



Mobil trappeklatrer



Med hjelp fra en ledsager, kan **Alber scalacombi** trygt og lett ta seg opp alle typer trapper. Det innovative ErgoBalance-håndtaket er ergonomisk utformet for å gi en sikker og enkel håndtering. De integrerte IQ-sensorene overvåker vinkelen på klatringen, og bidrar dermed til riktig håndtering og økt sikkerhet.

Økt aksjonsradius kombinert med forbedret fremkommelighet gir økte muligheter for rullestolbrukere.



### Patentert klatremekanisme

---

Med **scalacombi** patenterte klatremekanisme er det mulig å komme opp og ned de fleste typer trapper. Belastning for ledsager er marginal. Systemet er designet for å gi så behagelig og skånsom overgang som mulig mellom trinnene. **scalacombi** kan klatre opp til 300 trinn på et fulladet batteri. På grunn av det kompakte hjulklatesystemet og myke hjul, vil ikke **scalacombi** gjøre skade på trappen. Det slitesterke materialet på hjulene gir lang levetid.

### Sikkerhet og komfort

---

**scalacombi** har ergonomisk håndtak og sikkerhetsbrems på alle hjul. De ergonomiske håndtakene er designet for å gi et godt, behagelig og sikkert grep, og sikkerhetsbremsene bremser trappeklatreren i god tid før den når kanten av et trappetrinn. Til sammen gir det ledsager og bruker sikkerhet og komfort.



## Egenskaper



### Transportklar scalacombi

De kompakte og lette komponentene er enkle å transportere.



### ErgoBalance-håndtak

Ergonomisk utformet for komfortabel og trygg håndtering.



### Stort og tydelig display

Alle viktige funksjoner vises direkte på displayet.



### Batteripakke

Lett å montere eller demontere ved utskiftning eller transport.

## Egenskaper



### Sikkerhetsbremser

På alle fire hjulene. Stopper automatisk på trappeskanten.



### Batterilader

Automatisk lader med indikator for ladestatus.



### Beslag til rullestol

Scalamobil kan også monteres på bruker sin rullestol. Vi har et stort utvalg av braketter som er testet på forskjellige manuelle rullestoler. Ta kontakt med oss dersom du tror dette kan være løsningen for deg.



### Billader

Lader med automatisk frakobling til anvendelse i bilder og busser. 12-13 volts inngang.

## Tilbehør



### Hoftebelte

Ekstra sikkerhet for brukeren.  
Art. nr. 1456343



### Skulderbelte

Rullebelter som festes i kryss. Bruker sin overkropp holdes på plass og gir en økt følelse av trygghet.  
Art no 1564990



### Scalacombi S39

Scalacombi S39 er kan forsere trappetrinn opp til 25 cm.  
Art. nr. 1521110





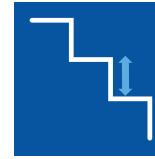





### Scalaport X7

En universal løsning til anvendelse i forbindelse med manuelle rullestoler uten monteringsbeslag. Kan monteres på scalamobil. Bruker sin rullestol kjøres inn i vuggen.

## Tekniske data

Se [www.invacare.no](http://www.invacare.no) for brukermanual og mer informasjon om produktet.

	Rekkevidde	Batterikapasitet	Motorkraft	Vekt batteri		
						
<b>scalacombi</b>	opp til 300 (avhengig av brukers vekt)	24 V / 3,4 Ah	178 W	2,7 kg	200 mm (mulighet 250 mm)	110 mm

	Total vekt	Maks. brukervekt
		
<b>scalacombi</b>	klatreinheit: 17,4 kg kjørehåndtak: 4,9 kg	140 kg*

## Hovedprodukt

Art. nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
1520417	174506	Scalacombi prisforhandlet konfigurasjon
1457274		Scalacombil S39 - høyde trinn opptil 25 cm
1520731		Scalamobil S35 m/scalaport (Universal feste / vugge for MRS)
1520415		Scalamobil S35. Husk monteringskit 1467178 (oppgi stoltype)

### Standard konfigurasjon:

- **Scalacombi:** Komplet med sete, batteri, nakkestøtte og lader



Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo

