

NordBed Kid



**Sikkerhet og god komfort
for barn i ulike stadier**

SIKKER | REGULERBAR | KOMFORTABEL

INVACARE
Yes, you can.®

NordBed Kid

En trygg, konfigurertbar seng som kan tilpasses barnet

Vår nye NordBed Kid er den ideelle sengen, for bruk i hjemmet og på institusjoner

Tilpasning til det enkelte barns behov

NordBed Kid er designet for barn fra 3-12 år eller 75-154 cm høye. De er tilgjengelig i tre ulike lengder med et utvalg av ulike sidegrinder.

Utvalget sidegrinder består av følgende: doble sammenleggbare dører, senkbare og faste sider, med sprinkler eller pleksiglass i høyde 40 cm eller 80 cm. Se total oversikt lenger ned.

Liggeflaten, med justerbar rygg, lår og benstøtte, er designet etter antropometrisk måling og gir anatomisk støtte og god komfort.

Polster med hygienetrek for ekstra beskyttelse for barnet er også tilgjengelig i en delikat grønn farge.

Sikkerhet

I utviklingen av NordBed Kid, har sikkerhet vært ekstremt viktig. Fra sikker låsemekanisme, doble sammenleggbare dører, til oppbevaringsboksen for håndkontrollen som sikrer at den er utenfor barnets rekkevidde. NordBed Kid samsvarer med den nye EU-sikkerhetsstandard EN5063: 2017.

Trygt arbeidsmiljø for pleieren

NordBed Kid er høyde justerbar fra laveste posisjon ved 30cm som tillater barnet selv å forflytte seg, til 80cm som gir en god arbeidshøyde for pleieren. Sentralbremser (valgfritt), senkbare sider med sentrert utløsermekanisme, full elektrisk liggeflate er utviklet for å sikre et trygt og komfortabelt arbeidsmiljø for pleieren.



Egenskaper NordBed Kid



Håndkontroll

- ▶ Knappene på håndkontrollen har farger som gjør de lett gjenkjennelige
- ▶ Knapperne kan låses med en medfølgende magnetnøkkel



Sikker oppbevaringsboks

- ▶ Håndkontrollen kan enkelt og sikkert låses inne i oppbevaringsboksen, som sikrer at det kun er pleieren som kan styre sengen.

Dørlås

- ▶ Doble sammenleggbare dører med en lås på toppen, som er enkel for pleieren å betjene.
- ▶ Designet for å sikre at det ikke er fare for skade på barnet, mens barnet er i sengen.

Valg av sidegrinder

- ▶ Utvalget av ulike grinder gjør det mulig å tilpasse sengen til barents behov
- ▶ Utvalget inneholder doble sammenleggbare dører, senkbar side og fast side, med sprinkler eller pleksiglass
- ▶ Høydealternativer i 40 cm og 80 cm



Justerbar liggeflate

- ▶ Liggeflaten er designet etter antropometrisk måling, for økt støtte og meget god komfort for barnet

Høydejusterbar

- ▶ Fra kun 30cm høyde som tillater enkel forflytning av barnet selv, til 80cm arbeidshøyde for pleier



Sikkerhetsstandard EN50637:2017

Designet er i samsvar med de nye EU-sikkerhetsstandardene for senger



Design

Moderne, hjemmelig design med et lyst og moderne bøk farget treverk



Utvalg av størrelser

Tilgjengelig i lengdene Small, Medium og Large

Designet for komfort og sikkerhet

NordBed Kid tilbyr god komfort, samtidig med at den møter den strenge EU standarden

Sidegrinder

NordBed Kid kan tilpasses med ulike sidegrinder basert på barnets behov. Sidegrindene er designet med økt styrke og stabilitet for å oppfylle kravene til standarden EN50637:2017. Nedenfor vises de ulike alternativene som er tilgjengelige.

Doble sammenleggbare dører

- ▶ Dørene kan åpnes delvis eller helt for å gi enkel tilgang og samtidig opprettholde sengens stabilitet og sikkerhet for barnet
- ▶ Låsen er designet for å sikre at barnet ikke får påført skader mens barnet er i sengen
- ▶ Siden senkes med én bevegelse for enkel tilgang
- ▶ Enkel å utløse, tillater pleier å forbli foran barnet
- ▶ Gir god sikt igjennom siden

Fast side

Polster

- ▶ Beskyttende polster med hygienetrekk kan benyttes på alle sider også ved bruk av senkbar og sammenleggbargrind

Sidegrind / Polster

	Fast side sprinkel/ pleksiglass	Senkbar side sprinkel/ pleksiglass	Doble sammenleggbare dører sprinkel/ pleksiglass	Polster
NordBed Kid S	80cm		80cm	✓
NordBed Kid M	40cm/80cm	40cm	40cm/80cm	✓
NordBed Kid L	40cm/80cm	40cm	40cm/80cm	✓



Tekniske data ▼


Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Innvendig
bredde
Utvendig
bredde ▼



Lengde innside
Lengde
utvendig ▼

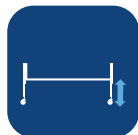

Høydejusterbar
▼



Liggeflate
mål ▼



Frihøyde ▼



Rygg vinkel ▼

Small	90/80cm	140/146cm	30-80cm	62-7-16-48cm	15cm	0-70°
Medium	90/80cm	160/166cm	30-80cm	67-13-18-55cm	15cm	0-70°
Large	90/80cm	179/185cm	30-80cm	78-15-23-57cm	15cm	0-70°



Lår vinkel ▼



Legg vinkel ▼



Maks
brukervekt ▼




Total vekt (uten
endegavel) ▼



Tyngste del av
produktet ▼

Small	0-12°	0-24°	70kg	86kg	33kg
Medium	0-12°	0-30°	70kg	95kg	40kg
Large	0-12°	0-30°	70kg	97kg	42kg

Farger ▼

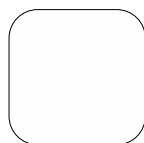

Hvit
sengeramme
RAL: 9016



Bøk (treverk)

Merk at fargen kan variere noe fra de vist
ovenfor

Regulatoriske data ▼



Testet av TÜV mot
Standard EN50637:2017

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 Oslo



Yes, you can.®