



ELEKTRISKE DRIVAGGREGAT FRA **ALBER**



Ny rammeavtale for elektriske drivaggregat

Våre bidrag til bedre mobilitet!

Alber er markedsleder internasjonalt på brukervennlige og praktiske hjelpemotorer til manuelle rullestoler. Invacare tilbyr sammen med Alber unike og allsidige løsninger for å imøtekomme brukerens behov. De aller fleste av våre rullestoler kan også kombineres med hjelpemotorer fra alber, og med dette tilføre ekstra kraft og rekkevidde til en manuell rullestol.

Innholdsfortegnelse

Elektriske drivaggregat fra Alber



Post 15
Alber e-motion

Alber e-motion M25 er elektriske drivhjul som kan monteres på de aller fleste manuelle rullestoler. Denne hjelpemotoren gir den ekstra kraften som ofte trengs for å forsure hverdagslige hindre.

3 - 6



Post 16
Alber Smoov

SMOOV er en nyskapende, diskre samt praktisk hjelpemotor. SMOOV har lav egenvekt og er lett å håndtere. SMOOV kan raskt og enkelt festes til rullestolen din når du ønsker det.

7 - 10



Post 17
Alber e-fix

e-fix gjør din manuelle rullestol motorisert og hjelper deg å komme rundt på egenhånd, du trenger bare å manøvrere ved hjelp av et styrepanel.

11 - 14



Post 18
Alber Viamobil

Viamobil er en kraftig hjelpemotor som bistår ledsager med å forsure stigninger, hindre og nedoverbakker trygt. Viamobil plasseres enkelt under rullestolen med hurtigkobling slik at bevegelsesplassen for ledsager sine ben blir god.

15 - 18



Alber e-motion Duo Drive

Alber e-motion DuoDrive er elektriske drivhjul har de samme funksjonene som e-motion M25, og enda litt til. DuoDrive fjernkontrollen muliggjør aktivering av en aktiv fartshjelper som vil hjelpe deg å holde den samme farten enten det er i oppover, bortover eller nedoverbakker, uten å berøre drivringene!

19 - 23



Alber e-pilot

e-pilot monteres raskt og enkelt, og forvandler din manuelle rullestol til et sporty og funksjonelt kjøretøy.

24 - 27

Alber® e-motion®



Elektriske drivhjul



Yes, you can.

Post 15

En manuell rullestol veier lite og er ofte et godt alternativ, men noen områder blir utilgjengelig på grunn av hindringer, og mye bruk kan føre til belastningsskader på armer og skuldre.

De nye elektriske drivhjulene fra Alber gjør det enklere å forsure hindringer samtidig som den gir en rekke terapeutiske fordeler.

Frihet til forflytning

Allerede ved lett berøring av drivringene blir elektromotorene aktivert og stolen beveger seg. Alber **e-motion** er særlig nyttig ved kjøring over lengre distanser, opp bakker og når hektiske dager skal forseres. Alber **e-motion** hjelper også til med å bremse, og lett berøring av drivringene aktiverer bremsefunksjonen. Batteri teknologien er moderne, og det benyttes Lithium Ion batterier som har stor kapasitet og lang levetid.

Følsomheten på sensorene kan justeres individuelt på høyre og venstre hjul. Sensitivitet og hvor mye kraft som skal tilføres ved berøring av drivhjulene kan enkelt programmeres ved hjelp av en app på smarttelefonen. Smart funksjonalitet slik som hold ved bakkestart gjør hverdagen litt enklere.

Terapeutiske fordeler

Mange rullestolbrukere vil oppleve smerter i armer og skuldre etter lang tids bruk av manuell rullestol. **E-motion** forebygger slike plager fordi belastningen på ledd og muskulatur reduseres samtidig som det kreves bevegelse.

Reisevennlig

E-motion kan smidig og greit tas med på reiser, både i bil, på buss, båt, tog eller fly. **E-motion** tilfredsstiller og overholder de internasjonale reglene for IATA.



Transportvennlige hjul som passert de fleste manuelle rullestoler

Hvert hjul veier kun 7,8 kg, og **e-motion** har hurtigkobling på hjulet slik at systemet enkelt kan demonteres for transport. **e-motion** kan monteres på de aller fleste manuelle rullestolene som er på markedet ved hjelp av individuelle monteringskit tilpasset de forskjellige rullestolene. De manuelle hjulene som originalt følger med den manuelle rullestolen kan også bygges om slik at de fremdeles kan benyttes.

Egenskaper ▼



Enkelt å transportere e-motion

Kompakte komponenter med lav vekt



Drivringene

Drivringene aktiverer motorene for assistanse. Sensitiviteten kan justeres i 7 trinn individuelt på hjulene



Batteriene

Moderne Lithium-Ion batterier gir lang rekkevidde og holdbarhet. Av/på bryteren er også ladepunktet, og har en magnetisk ladeplugg

Hovedprodukt

Art-nr	HMS-nr	Beskrivelse
1592670	285346	E-motion M25 Diameter 22" Fjernkontroll, Right Run dekk sort
1592652	268821	E-motion M25 Diameter 24" Drivringer i rustfritt stål, Fjernkontroll Tire Marathon Plus Evo dekk sort
1592658	252477	E-motion M25 Diameter 25" Drivringer i rustfritt stål, fjernkontroll Right Run dekk sort

e-motion Mobility App ▼

Med Bluetooth integrert i systemet, kan bruker og teknisk personell nå også kommunisere enkelt med **e-motion** ved hjelp av en smart telefon. Dette åpner opp for ny funksjonalitet og nye muligheter

Funksjonaliteten er delt opp i 3 kategorier

- Profesjonell pålogging for terapeuter og teknisk personell (kostnadsfritt)
- Kjøreparameter kan tilpasses individuelt til bruker

Bruker tilgang (gratis)

- Batteri indikator, hastighet og tilbakelagt distanse
- Lagre turer ved hjelp av GPS
- Funksjon for utlading av batterier (nødvendig ved flytransport)
- Visning av feilkoder med hint og tips til løsning

Mobility Plus

Mobility Plus aktiverer ytterligere funksjonalitet:



Maksimum hastighet økes til 8,5 Km/h



Fjernstyring av systemet



Registrering av antall drivingsberøringer



All funksjonalitet fra fjernkontrollen åpnes



Tekniske data ▼

For mer informasjon om produktet samt produktets brukermanual, se www.invacare.no



Hastighet ▼

e-motion

6 km/h
Oppgraderbar til 8,5 m/Mobility Plus



Rekkevidde ▼

25 km
ISO 7176



Motorkraft ▼

2*80 Watt



Vekt ▼

15,6 kg
Tyngste del 7,8 kg



Maks brukervekt ▼

150 kg



SMOOV

fra Alber



SMOOV

Diskret og praktisk drivagregat med imponerende krefter.



Yes, you can.

Post 15

SMOOV er en nyskapende, diskre samt praktisk hjelpemotor. **SMOOV** har lav egenvekt og er lett å håndtere. **SMOOV** kan raskt og enkelt festes til rullestolen din når du ønsker det.



Ekstra krefter i hverdagen

SMOOV er for deg som er aktiv og har en travel hverdag. **SMOOV** forebygger og reduserer belastning av armer og skuldre, samtidig som den gir ekstra fart og spenning i hverdagen. **SMOOV** er mektig, da den kan kjøre med en hastighet opp til 10 km/t og har en rekkevidde på ca. 20 km. **SMOOV** gir deg fleksibilitet, og gjør hverdagen din mindre utfordrende.

Når design og vekt er viktig


SMOOV er diskre og lett, men samtidig sterk og funksjonell. **SMOOV** kan bli din nye følgesvenn, som følger deg på dine reiser når du har behov for å spare energi eller når du ønsker ekstra fart. **SMOOV** tar deg dit du skal - med stil.

SMOOV oppfyller flyselskapenes krav til litiumbatterier. Det betyr at du kan ta **SMOOV** med deg når du skal ut og oppleve verden.



Smoov og smarttelefoner - en smart kombinasjon

Smarttelefonen har blitt en vanlig del av hverdagen vår og Alber har utviklet en app kompatibel med **SMOOV**, kalt "**SMOOV® O10**". Appen er kompatibel med både Apple og Android smarttelefoner. Det er raskt og enkelt å koble telefonen med **SMOOV** via Bluetooth. Appen gir deg flere alternativer og funksjoner, men **SMOOV** kan også enkelt brukes uten å være koblet til smarttelefonen.

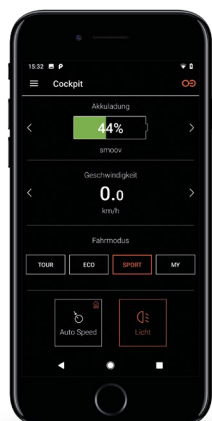

Med smarttelefonen din koblet til Smoov kan du se

- ▶ Batterikapasitet
- ▶ Hastighet
- ▶ Rekkevidde

Du har muligheten til å:

- ▶ Velge mellom ulike kjøremoduser
- ▶ Lagre informasjon fra dine kjøreturer
- ▶ Se statusmeldinger og diagnoser
- ▶ Få detaljert informasjon om din **SMOOV** one og appen

Unike egenskaper

◀ Drivagregatet

Drivagregatet **SMOOV** er laget av aluminium, inneholder et kraftig Li-Ion batteri og en kraftig motor med et 360° roterbart drivhjul. Håndtaket øverst på **SMOOV** fungerer både som bærehåndtak og som sikkerhetslås, når drivenheten er montert. **SMOOV** bruker en magnetisk ladeplugg som er enkel å bruke selv med begrenset håndfunksjon. **SMOOV** er utstyrt med lys, batteriindikator og et USB-C kontakt som kan brukes til å lade kontrollen eller smarttelefonen.

◀ Kontrollenhet

SMOOV er enkel å bruke og enkel å kontrollere ved å bruke den separate kontrollenheten. Kontrollenheten er montert i en holder som kan plasseres der du synes det er enkelt å betjene. Kontrollenheten brukes til av/på, start/stopp, hastighetskontroll og for å vise batterikapasitet.

◀ Lader og ladekabel

Liten og praktisk lader, som slår seg automatisk av når batteriet er fulladet. I tillegg håndterer den flere ulike spenningsområder, noe som gjør det enkelt å reise med **SMOOV** one. Ladekabel med USB-C-standard for lading av kontrollenheten via drivenheten. Lengde ca 0,5 cm.



Monteringsbraketter

SMOOV kan monteres på både fastramme og sammenleggbare rullestoler med max. 2° cambring. For å bruke **SMOOV** trenger du et liten diskre brakett montert på rullestolen. Er det en fastrammerullestol monteres den på hjulakselen og hvis det er en foldbar rullestol monteres den på en avtagbar hjulaksel adapter.



NY

Transportbag

- Smart og praktisk reisebag for transport, beskytter og er praktisk å håndtere.



Tekniske data ▼

For mer informasjon om dette produktet, vennligst kontakt din lokale invacare representant eller se www.invacare.no.

					
	Maks. brukervekt ▼	Maks. totalvekt ▼	Maks. helling ▼	Motor ▼	Hastighet ▼
Alber SMOOV	140 kg	170 kg	16 %	250 W / max. 450 W	6 km/t eller 10 km/t* oppgradering

				
	Batterikapasitet ▼	Batterikapasitet ▼	Rekkevidde ▼	Totalvekt ▼
Alber SMOOV	36 V, 6.2 Ah	224 Wh	20 km	7,2 kg

Hovedprodukt

Art-nr	HMS-nr	Beskrivelse
1592897	269684	Smoov 6 km/h

Alber® e-fix®



Liten! Lett! Rask!



Yes, you can.

Post 17

Alber e-fix E35 og E36 er et drivaggregat laget for å kombinere fordelene ved elektrisk og manuell rullestol for innendørs og utendørs bruk. Resultatet er en elegant innestol og en praktisk, transportvennlig utestol. Alle brukere av manuell rullestol vil kunne få nytte av dette unike «to-i-ett»-konseptet. **e-fix** kan demonteres veldig enkelt, og de letthåndterlige komponentene er lette å transportere. Den integrerte drivhjulsmotoren og det diskrete designet gjør **e-fix** egnet til den med aktiv livsstil.



Lett håndterlig

Den lave vekten på hver enkelt komponent sørger for enkel transport. Drivhjulene, batteripakken og håndkontrollen kan demonteres enkelt med de patenterte hurtigkoblingsfestene. Passer i bagasjen på selv de minste biler!

Enkel å manøvrere

Alber e-fix har liten svingradius og er ideell for både innendørs og utendørs bruk. Håndkontrollen kan programmeres og forskjellige beslag kan monteres for å kunne passe til alles bruk. Den høyeffektive elektromotoren kombinert med små, effektive Li-Ionbatterier gir lang rekkevidde. Batteriene tilfredsstiller også internasjonale IATA regler, som betyr at man trygt kan ta med seg e-fix på fly. Drivhjulene kan lett frikobles og stolen kan kjøres manuelt.

Passer til nesten alle rullestoler

e-fix-komponentene kan monteres på nesten alle manuelle rullestoler og **e-fix**-drivhjulene kan byttes med vanlige drivhjul. Styreboksen har stor skjerm og tydelig fargedisplay med symboler som viser batteristatus, hastighet og andre nyttige parametere.

Nå også til barnerullestoler!

Den nye, lette og kompakte batteripakken til **e-fix E35** gjør den også velegnet til barnerullestoler.



Egenskaper ▼



Transportvennlig

De kompakte og lette komponentene er lette å demontere og transportere.



Styreboks

Med fargedisplay, smart design og LED-lys.



Lette komponenter

Drivhjul starter på 7,8 kg.



E-36, alternativet for tunge brukere

Forsterket versjon for personer som veier opp til 160 kg.

Egenskaper ▼



Ekstra lett batteripakke

Kompakte dimensjoner, svært lett og lang levetid.



Ett produkt - to bruksområder

Ved å vri på hjulet skifter man fra motor til manuell modus. Null friksjon gir samme rulleegenskaper som vanlige hjul.



«Easy-Connex» magnetisk plugg

Magnetpluggen gjør at tilkoblingen mellom batteri og ledning skjer automatisk når man fører kontakten mot batteriet.

Inkluderte komponenter ▼

Hovedprodukt

Art-nr	HMS-nr	Beskrivelse
1566293	215765	E-fix E35 24"
1566303	217628	E-fix E36 24"
1566295	217629	E-fix E35 22"



Tilbehør ▼



Komplette monteringskit tilgjengelig for ulike typer rullestoler. Se tabell i ordreguide.

Eikebeskytter 24"

Intuitiv ledsagerstyring kan leveres som tilbehør slik at bruker og ledsager kan veksle mellom hvem som skal kjøre.

Praktisk parallellforskyver gjør at styreboksen kan svinges unna dersom man skal kjøre inntil bord eller lignende



Beskyttelse for styreboks.

Tekniske data ▼

							
e-fix E35	16 km standard 22 km Tilbehør	6,0 Ah standard 7,5 Ah Tilbehør	2 x 110 W, 36 Volts	2,0 kg 2,0 kg	20%	18,9 kg (ett hjul 7,8 kg)	120 kg
e-fix E36	14 km standard 20 km Tilbehør	6,0 Ah standard 7,5 Ah Tilbehør	2 x 150 W, 36 Volts	2,0 kg 2,0 kg	15%	19,3 kg (ett hjul 8,0 kg)	160 kg

Alber® viamobil®

alber



Den sterke hjelpemotoren for rullestoler



Yes, you can.

Post 18

Alber viamobil er utstyrt med en kraftig motor som klarer en brukervekt opp til 160 kg, samtidig som den er lett å betjene og manøvrere. Stigninger og nedoverbakker opp til 18 % kan trygt forseres uten fysiske anstrengelser for ledsager. **Alber viamobil** plasseres under rullestolen og hindrer derfor ikke ledsager fra å kunne gå behagelig.

Alber viamobil hjelper til med kjøring fremover, rygging og oppbremsing ved kjøring i nedoverbakke. **Alber viamobil** er modulbasert og kan derfor enkelt demonteres og transporteres i bilen.



Dynamisk kjøring

Med den sterke motoren er **Alber viamobil** en pålitelig partner på reisen. Det integrerte fjærsystemet gir godt veigrep for drivhjulet, mens de punkteringsfrie dekkene gjør turen bekymringsfri. Med et tastetrykk senker du drivhjulet og setter motoren automatisk i gang, og motsatt hvis du vil kjøre rullestolen manuelt. Drivhjulet er plassert i linje med rullestolen, noe som gjør det veldig enkelt å manøvrere **viamobil** uten anstrengelser.

Lett å bruke, maksimal sikkerhet

Det innovative EasyConnex Magnetic Plug-systemet kobler automatisk styreenheten og laderen sammen med batteriet. Hold helt enkelt den magnetiske kontakten nær uttaket og - klikk - så er den koblet til og låst. Det store og klare displayet gir ledsageren nøyaktig informasjon om batterikapasiteten. Den unike og patenterte sikkerhetsbryteren i styreenheten gjør at **viamobil** kan stoppes direkte i kritiske situasjoner, noe som gir maksimal trygghet for både bruker og ledsager.




Transportabel

Alber viamobil kan lett demonteres i små komponenter for enklere transport. Takket være litiumlon teknikk, har det kraftfulle batteriet en vekt på kun 2,3 kg, og er dermed veldig enkel å håndtere. Batteriet tilfredsstiller også internasjonale IATA regler som vil si at det trygt kan tas med på fly. Den kobles automatisk til drivenheten ved hjelp av magnetisk kraft. **Alber viamobil** kan monteres på nesten alle manuelle rullestoler. Takket være den kompakte størrelsen, påvirkes ikke komfortrullestolens sitteinnstillinger slik som rygg og tilt. Kun små låsesplinter skal til for at **viamobil** skal kunne monteres og demonteres på rullestolen.




Alber viamobil klar for transport

De kompakte og lette komponentene er enkle å transportere.

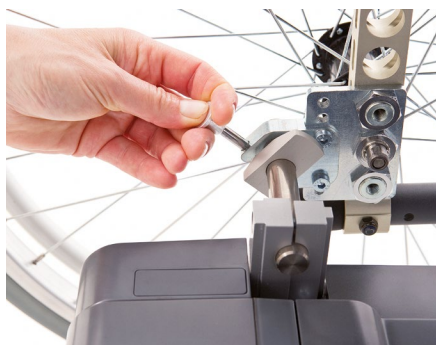

Montering

Alber viamobil monteres og demonteres raskt og enkelt i monteringsbeslagene.

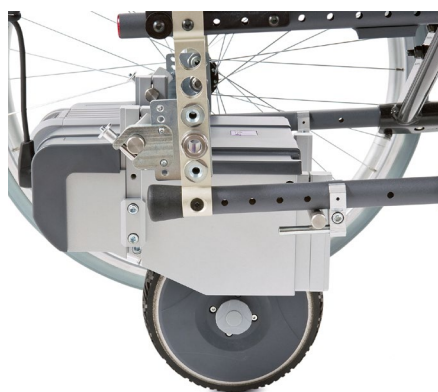

Monteringsbeslag

Vi har et stort utvalg av komplette monteringskit til de mulige manuelle rullestolene, se orversikt for komplett oversikt.



Tippesikring

Vi anbefaler å bruke tippesikringene som er utviklet spesielt for Viamobil. Invacare art. nr 1521032



Ekstra kjørehåndtak

Med ekstra kjørehåndtak montert på hjelpemotoren er det enda enklere å koble den til og fra rullestolen, samtidig som det forenkler kjøringen for ledsager. Invacare art. nr 1593406

Tekniske data ▼

Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

				
	Fart ▼	Rekkevidde ▼	Batteri- kapasitet ▼	Motorkraft ▼
viamobil	maks 5.5 km/t	20 km	36V / 6,6 Ah	150 W

				
	Vekt batteri ▼	Maks trygg helling ▼	Total vekt fra ▼	Maks. brukervekt ▼
viamobil	2,3 kg	18% (11% med 160 kg bruker)	13,5 kg (kjøreenhet: 10,3 kg)	160 kg



Hovedprodukt ▼

Art-nr	HMS-nr	Beskrivelse
1521003	176396	viamobil V25 ink. batteri og lader



Alber® e-motion® DuoDrive



Ekstra overskudd i hverdagen

Hjelpemotor til manuelle rullestoler med
fartshjelperfunksjon



Ekstra energi gjennom dagen

Enklere manøvrering

Emotion DuoDrive kan benyttes til en nesten hvilken som helst rullestol. Når rullestolen er i bevegelse vil de innebygde motorene, som sitter i drivhjulene, gi deg ønsket motorkraft ved behov, med svært liten anstrengelse. DuoDrive vil også gi deg muligheten til å opprettholde stabil fart over tid, ved bruk av fartshjelperfunksjonen, også i oppover og nedoverbakker. Du trenger ikke engang å berøre drivringene! Perfekt for lengre turer, eller om du f.eks. har med deg en coffe to go.

På denne måten beskytter man muskler og ledd.

Med en vekt på kun 7,8 kg per drivhjul, er **e-motion DuoDrive** en av de letteste hjelpemotorene på markedet.



E-motion DuoDrive passer nesten alle manuelle rullestoler: Hjulene kan ved en enkelt operasjon tas av rullestolen, slik at hjulene til den manuelle rullestolen fortsatt kan brukes ved behov.

Svært effektive elektriske motorer og litiumbatterier integrert inn i hjulnavene gir tilstrekkelig kraft og rekkevidde.



To ulike kjøremodus – det er ditt valg

Alt under kontroll

Med **e-motion DuoDrive** har du muligheten til å kjøre over lengre distanser uten å berøre drivringene ved hjelp av vår fartshjelper. Du trenger kun å styre via drivringene, hjelpemotorene gjør resten. Dette betyr at du har to ulike kjøremoduser som du kan bytte mellom når som helst, avhengig av dine behov. Fartshjelperfunksjonen kan enkelt aktiveres og deaktiveres ved hjelp av DuoDrive kontrollen.

E-motion DuoDrive bringer deg alltid trygt hjem.

Fartshjelperen er spesielt gunstig når
... du ønsker ekstra assistanse på veien.
... du skal oppover bakker. **E-motion DuoDrive** kan håndtere nesten alle bakker og du kan nå ditt mål avslappet med fartshjelperen.
... du vil ha jevn fart i nedoverbakker og gjerne ønsker en bremseassistent som opprettholder en forhåndsinnstilt hastighet.

Slik fungerer DuoDrive kontrollen

Skru på hjulet: Øk eller reduser farten på fartshjelperen

Batterimonitor av drivhjulene



1 x trykk: Fartshjelperen har startet eller stoppet

2 x trykk når ikke fartshjelperen er aktivert: veksler mellom assistentnivå 1 og 2

Bluetooth™

Innebygd litiumbatteri: varer opptil 12 timer



Ett klikk på kontrollenheten er alt som trengs for å bytte til fartshjelper mens du kjører.



Med fartshjelperen har du også en hånd fri. Ideelt når du handler eller reiser.

Egenskaper ▼



Enkelt å transportere e-motion

Kompakte komponenter med lav vekt



Drivringene

Drivringene aktiverer motorene for assistanse. Sensitiviteten kan justeres i 7 trinn individuelt på hjulene



Batteriene

Moderne Lithium-Ion batterier gir lang rekkevidde og holdbarhet. Av/på bryteren er også ladepunktet, og har en magnetisk ladeplugg

Tekniske data ▼

For mer informasjon om dette produktet, vennligst kontakt din lokale invacare representant eller se www.invacare.no.

					
	Maks. brukervekt ▼	Maks. totalvekt ▼	Maks. høyde på hindringer ▼	Motor ▼	Hastighet ▼
e-motion DuoDrive	150 kg	190 kg	Avhengig av rullestolen som brukes, med fartshjelp opptil 5,7 ° (10%)	80 Watt / 40 Nm per hjul	6 km/t 8,5 km/t ved oppgradering i app
					
	Vekt per hjul ▼	Vekt på kontrollenhet ▼	Rekkevidde ▼	Tilgjengelig hjulstørrelser ▼	
e-motion DuoDrive	7,8 kg	0,25 kg	Opp til 25 km, med fartshjelp opp til 15 km	22", 24", 25"	



Alber[®] e-pilot[®]



Sett fart på din manuelle rullestol



E-pilot monteres raskt og enkelt, og din manuelle rullestol blir forvandlet til et **sporty og funksjonelt kjøretøy**.

E-pilot tar deg raskt og sikkert frem og tilbake til jobb, besøk hos venner og familie eller rundt i byen.

Med **E-pilot** kommer man seg rundt både komfortabelt og miljøvennlig.



Perfekt i hverdagen

E-pilot er perfekt for daglige rutiner, enten man skal på jobb, en tur til byen, besøke venner og familie eller luften hunden. **E-pilot** kan gjøre hverdagen enklere, morsommere og gi mer overskudd. **E-pilot** gjør lengre turer over ujevnt terreng, grus og i oppoverbakker mulig. Den kobles enkelt av etter bruk, slik at den manuelle rullestolen kan brukes på vanlig måte.

Moderne, innovativ og lydløs

E-pilot er laget i moderne design. Den er testet og godkjent hos TÜV og er full av innovative funksjoner. Motoren er ekstra kraftig med unik akselerasjon og gode kjøreegenskaper - og den kjører helt lydløst. Batteri og kabler er integrert i et smart design. **E-pilot** er utstyrt med kraftige hydrauliske skivebremses som kan brukes med høyre eller venstre hånd.

E-pilot har USB-inngang og en flyttbar 2,4" multifunksjonell skjerm med farger og nyttig informasjon om hastighet, rekkevidde, batterikapasitet, servicemeldinger osv.





Drivenheten

En elegant drivenhet designet i aluminium. **E-pilot** er utstyrt med sikker og robust stativfunksjon, slik at det er enkelt å komme til når den skal kobles på eller av, i tillegg til at den er enkel å oppbevare når den ikke er i bruk. Batteriet og kablene er integrert i et smart og funksjonelt design. **E-pilot** er utstyrt med store, brukervennlige funksjonsknapper.



Batteri

Kraftig 13,8 Ah batteri som gir en rekkevidde på 50 km, avhengig av hvor og hvordan det kjøres, brukerens vekt og temperaturen i omgivelsene. Batteriet kan lades både når det er montert på **E-pilot** og når det ikke er montert.



Lader

Laderen kobler automatisk fra når batteriet er fulladet. Et utladet batteri lades opp på ca. 4 timer.



Multifunksjonelt display

Avtakbar 2,4" multifunksjonell fargeskjerm for nyttig informasjon om hastighet, rekkevidde, batterikapasitet, servicemeldinger osv.

Tilbehør ▼



Farger

E-pilot drivenheten er sort, og leveres med hvite deksler som standard. Deksler i andre farger kan leveres som tilbehør. Kontakt oss for mer informasjon om fargedeksler.



Klickfix® beslag

E-pilot kan leveres med Klickfix® beslag og forskjellige former for tilbehør.



Supernova frontlys

Supernova frontlys i aluminium, som gir et kraftig hvitt lys på 205 lumen.

Tilbehør ▼



Baklykter

Rød batteridrevet baklykt til montering på rullestolens rygggrø. Forventet batterilevetid er ca. 50 timer.



Sidespeil

Sammenleggbart sidespeil for montering på venstre side. Speilet er enkelt å justere og tilpasse.



Easy-grip gass

Easy-grip krever mindre krefter og gjør det enklere å vri på gasshåndtaket.



Forsterkede drivhjul

Forsterkede drivhjul designet for kjøring med høyere fart.

Tekniske data ▼

For mer informasjon om dette produktet, vennligst kontakt din lokale invacare representant eller se www.invacare.no.



Maks. brukervekt ▼

Alber e-pilot

Maks. 100 kg



Maks. totalvekt ▼

Maks. 135 kg



Maks. høyde på hindringer ▼

Opp til 10 %



Maks. helling ▼

Opp til 15 %



Drivhjulsstørrelse ▼

Hjul 16 x 3.00



Motor ▼


250 W / maks. 650 W



Volt ▼

Alber e-pilot

36 V

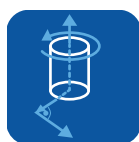

Maks. dreiningsmoment ▼

40 Nm



Hastighet ▼

10 km/t



Batterikapasitet ▼

36 V, 13.8 Ah



Batterieffekt ▼

496 Wh



Rekkevidde ▼

Opp til 50 km

●●● MADE IN GERMANY



Complies with Medical Device Directive 93/42/EEC

Tel.: 22579500
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo
Norway

