

VICAIR[®]

Adjuster O2

Den optimale puten for rullestolbrukere
med kroppsasymmetri



Tilpasser seg kroppens konturer

For optimal posisjonering og trykkavlastning



Yes, you can.[®]

Hvorfor Vicair?

Vicair sitteputer gir den optimale kombinasjonen av trykkavlastning, høy kvalitet og stabil posisjonering for brukere med middels og høy risiko for å utvikle trykksår.

Sitteputene, som er klinisk testet, kan tilpasses individuelt og krever svært lite vedlikehold. De trenger ingen daglig kontroll, og er derfor enkle å benytte både av brukere og pleiere. Vekten på putene er lav med et gjennomsnitt på mindre enn 750 gram.

Putene fra Vicair gir maksimal hudbeskyttelse, optimal postural støtte og er i tillegg svært brukervennlige. Kort oppsummert **#theperfectpackage!**

Unikt design

I Vicair sitteputer og ryggputer brukes Vicair Technology™, en unik og innovativ metode som gir en dynamisk overflate og støtte. Putene inneholder flere hundre små pyramideformede luftfylte celler, SmartCells, med lav friksjon og avrundede hjørner. Cellene glir lett mot hverandre, og former seg etter kroppens form. Resultatet gir en optimal kombinasjon av trykkavlastning, støtte og stabilitet. Putene er delt inn i flere seksjoner med ulik fyllingsrate for å minimere trykk og forskyvning.

Optimal posisjonering og trykkavlastning

Vicair sitteputer og ryggputer er klinisk testet med meget gode resultater. Putene kan brukes til å forhindre trykksår for brukere med middels eller høy risiko. De gir en høy grad av stabilitet, noe som gir komfort og bevegelsesfrihet for brukeren.

Mange muligheter

Det er flere behov som skal dekkes i sittende posisjon. Putene skal være trykkavlastende samtidig som det ofte er behov for posisjonering, som for eksempel å korrigere feilstillinger eller å forhindre at nye oppstår. For å dekke de fleste behov har Vicair en rekke ulike modeller som kan justeres individuelt. Alle sitteputene har et slitesterkt, strekkbart og komfortabelt trekk. Trekket finnes i standard og som inkontinestrekk. Til Vector O2, Adjuster O2 og Active O2 finnes et ekstra pustende trekk.

SmartCells

Tynt og følsomt materiale i en ny farge med avrundede hjørner for økt komfort. Cellene kan vaskes i vaskemaskinen på 60°.



Vicair Adjuster O2

På anbud med NAV

Vicair Adjuster O2 (6 og 10 cm) består av 5 individuelle kamre, og er designet for å tilpasse seg kroppens konturer under belastning; derav navnet Adjuster. Hvert kammer er utformet for å støtte og påvirke ulike områder av bekkenet. Vicair Adjuster O2 oppnår med det en unik balanse mellom å beskytte huden og underliggende vev rundt sitteknutene, halebeinet og trochanter, i tillegg til at puten gir optimal posisjonering og støtte av bekken og lårbein. For individuell tilpasning og ved spesielle behov kan fyllingen av hvert kammer enkelt justeres. Puten gir med andre ord muligheten til å endre tettheten i hvert kammer, noe som kan være hensiktsmessig for brukere som (1) trenger justering av en mild til alvorlig fast bekkenskjevhet eller korrigerende av en fleksibel bekkenskjevhet; (2) drar nytte av ekstra støtte av lårene, for eksempel brukere med amputasjon over kneet.

1. plass i delkontrakt 7 (10 cm)
2. plass i delkontrakt 5 (10 cm)
4. plass i delkontrakt 4 (6 cm)

- ✓ Tilpasser seg automatisk skjevheter (opp til 4 cm)
- ✓ Minimerer glidning og shear
- ✓ Følger kroppens konturer for jevn og optimal trykkfordeling

› Det avlange kammeret foran sitteknutene **hindrer fremoverglidning** | Konverterer skjær til normalkrefter

› Følger kroppens konturer for lik trykkfordeling | Gir støtte for og rundt halebeinet | håndterer bekkenasymmetri



› Gir god støtte til lårene


› Medium høy glidelåslukking for enkel justering når brukeren sitter | **Puten holder på fasongen** og gir brukeren bedre hudbeskyttelse



Kan inngå i behandlingsplan ved trykksår



100 % pustende

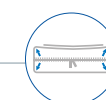

Solid og holdbar fasong



Kan maskinvaskes



Klar til bruk - rett ut av esken!

Vicair Adjuster O2 12

På anbud med NAV

Vicair Adjuster O2 12 består av 6 individuelle kamre, og er designet for å forme seg etter kroppen under belastning. Puten tilpasser seg skjevheter automatisk og kan også tilpasses den enkelte bruker ved mer ekstrem asymmetri. Tykkelsen gir ekstra gode forutsetninger for posisjonering uten at brukeren kommer i kontakt med underlaget.

4. plass i delkontrakt 7

- ✓ Tilpasser seg automatisk skjevheter (opp til 4 cm)
- ✓ Minimerer glidning og shear
- ✓ Følger kroppens konturer for jevn og optimal trykkfordeling

› Følger kroppens konturer for lik trykkfordeling | Gir støtte for og rundt halebeinet | håndterer bekkenasymmetri



› Medium høy glidelåslukking for enkel justering når brukeren sitter | **Puten holder på fasongen** og gir brukeren bedre hudbeskyttelse

› Det avlange kammeret foran sitteknutene **hindrer fremoverglidning** | Konverterer skjær til normalkrefter

› Gir god støtte til lårene

Størrelsesoversikt

Vicair Adjuster O2 6

		Bredde i cm									
		35	38	40	43	45	48	50	53		
Dybde i cm	35	245326 OAD6/ TP/3535	245331 OAD6/ TP/3835	245337 OAD6/ TP/4035	245345 OAD6/ TP/4335	245353 OAD6/ TP/4535					
	38	245327 OAD6/ TP/3538	245332 OAD6/ TP/3838	245338 OAD6/ TP/4038	245346 OAD6/ TP/4338	245354 OAD6/ TP/4538	245354 OAD6/ TP/4538				
	40	245328 OAD6/ TP/3540	245333 OAD6/ TP/3840	245339 OAD6/ TP/4040	245347 OAD6/ TP/4340	245355 OAD6/ TP/4540	245362 OAD6/ TP/4840	245368 OAD6/ TP/5040	245374 OAD6/ TP/5340		
	43	245329 OAD6/ TP/3543	245334 OAD6/ TP/3843	245340 OAD6/ TP/4043	245348 OAD6/ TP/4343	245356 OAD6/ TP/4543	245363 OAD6/ TP/4843	245369 OAD6/ TP/5043	245375 OAD6/ TP/5343		
	45	245330 OAD6/ TP/3545	245335 OAD6/ TP/3845	245341 OAD6/ TP/4045	245349 OAD6/ TP/4345	245357 OAD6/ TP/4545	245364 OAD6/ TP/4845	245370 OAD6/ TP/5045	245376 OAD6/ TP/5345		
	48		245336 OAD6/ TP/3848	245342 OAD6/ TP/4048	245350 OAD6/ TP/4348	245358 OAD6/ TP/4548	245365 OAD6/ TP/4848	245371 OAD6/ TP/5048	245377 OAD6/ TP/5348		
	50			245343 OAD6/ TP/4050	245351 OAD6/ TP/4350	245359 OAD6/ TP/4550	245366 OAD6/ TP/4850	245372 OAD6/ TP/5050	245378 OAD6/ TP/5350		
	53			245344 OAD6/ TP/4053	245352 OAD6/ TP/4353	245360 OAD6/ TP/4553	245367 OAD6/ TP/4853	245373 OAD6/ TP/5053	245379 OAD6/ TP/5353		

HMS-nummer
Artikkelnummer Invacare

Vicair Adjuster O2 10

		Bredde i cm										
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
Dybde i cm	35	245525 OAD10/ TP/3535	245530 OAD10/ TP/3835	245536 OAD10/ TP/4035	245544 OAD10/ TP/4335	245554 OAD10/ TP/4535						
	38	245526 OAD10/ TP/3538	245531 OAD10/ TP/3838	245537 OAD10/ TP/4038	245545 OAD10/ TP/4338	245555 OAD10/ TP/4538	245555 OAD10/ TP/4538					
	40	245527 OAD10/ TP/3540	245532 OAD10/ TP/3840	245538 OAD10/ TP/4040	245546 OAD10/ TP/4340	245556 OAD10/ TP/4540	245566 OAD10/ TP/4840	245575 OAD10/ TP/5040	245584 OAD10/ TP/5340			
	43	245528 OAD10/ TP/3543	245533 OAD10/ TP/3843	245539 OAD10/ TP/4043	245547 OAD10/ TP/4343	245557 OAD10/ TP/4543	245567 OAD10/ TP/4843	245576 OAD10/ TP/5043	245585 OAD10/ TP/5343	245593 OAD10/ TP/5543	245601 OAD10/ TP/5843	
	45	245529 OAD10/ TP/3545	245534 OAD10/ TP/3845	245540 OAD10/ TP/4045	245548 OAD10/ TP/4345	245558 OAD10/ TP/4545	245568 OAD10/ TP/4845	245577 OAD10/ TP/5045	245586 OAD10/ TP/5345	245594 OAD10/ TP/5545	245602 OAD10/ TP/5845	245609 OAD10/ TP/6045
	48		245535 OAD10/ TP/3848	245541 OAD10/ TP/4048	245549 OAD10/ TP/4348	245559 OAD10/ TP/4548	245569 OAD10/ TP/4848	245578 OAD10/ TP/5048	245587 OAD10/ TP/5348	245595 OAD10/ TP/5548	245603 OAD10/ TP/5848	245610 OAD10/ TP/6048
	50			245542 OAD10/ TP/4050	245550 OAD10/ TP/4350	245560 OAD10/ TP/4550	245570 OAD10/ TP/4850	245579 OAD10/ TP/5050	245588 OAD10/ TP/5350	245596 OAD10/ TP/5550	245604 OAD10/ TP/5850	245611 OAD10/ TP/6050
	53			245543 OAD10/ TP/4053	245551 OAD10/ TP/4353	245561 OAD10/ TP/4553	245571 OAD10/ TP/4853	245580 OAD10/ TP/5053	245589 OAD10/ TP/5353	245597 OAD10/ TP/5553	245605 OAD10/ TP/5853	245612 OAD10/ TP/6053
	55				245552 OAD10/ TP/4355	245562 OAD10/ TP/4555	245572 OAD10/ TP/4855	245581 OAD10/ TP/5055	245590 OAD10/ TP/5355	245598 OAD10/ TP/5555	245606 OAD10/ TP/5855	245613 OAD10/ TP/6055
	58				245553 OAD10/ TP/4358	245563 OAD10/ TP/4558	245573 OAD10/ TP/4858	245582 OAD10/ TP/5058	245591 OAD10/ TP/5358	245599 OAD10/ TP/5558	245607 OAD10/ TP/5858	245614 OAD10/ TP/6058
60					245564 OAD10/ TP/4560	245574 OAD10/ TP/4860	245583 OAD10/ TP/5060	245592 OAD10/ TP/5360	245600 OAD10/ TP/5560	245608 OAD10/ TP/5860	245615 OAD10/ TP/6060	

Vicair Adjuster O2 12

		Bredde i cm										
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
Dybde i cm	35	300640 OAD12/ TP/3535	300645 OAD12/ TP/3835	300651 OAD12/ TP/4035	300659 OAD12/ TP/4335	300669 OAD12/ TP/4535						
	38	300641 OAD12/ TP/3538	300646 OAD12/ TP/3838	300652 OAD12/ TP/4038	300660 OAD12/ TP/4338	300670 OAD12/ TP/4538	300680 OAD12/ TP/4838					
	40	300642 OAD12/ TP/3540	300647 OAD12/ TP/3840	300653 OAD12/ TP/4040	300661 OAD12/ TP/4340	300671 OAD12/ TP/4540	300681 OAD12/ TP/4840	300690 OAD12/ TP/5040	300699 OAD12/ TP/5340			
	43	300643 OAD12/ TP/3543	300648 OAD12/ TP/3843	300654 OAD12/ TP/4043	300662 OAD12/ TP/4343	300672 OAD12/ TP/4543	300682 OAD12/ TP/4843	300691 OAD12/ TP/5043	300700 OAD12/ TP/5343	300708 OAD12/ TP/5543	300716 OAD12/ TP/5843	
	45	300644 OAD12/ TP/3545	300649 OAD12/ TP/3845	300655 OAD12/ TP/4045	300663 OAD12/ TP/4345	300673 OAD12/ TP/4545	300683 OAD12/ TP/4845	300692 OAD12/ TP/5045	300701 OAD12/ TP/5345	300709 OAD12/ TP/5545	300717 OAD12/ TP/5845	300724 OAD12/ TP/6045
	48		300650 OAD12/ TP/3848	300656 OAD12/ TP/4048	300664 OAD12/ TP/4348	300674 OAD12/ TP/4548	300684 OAD12/ TP/4848	300693 OAD12/ TP/5048	300702 OAD12/ TP/5348	300710 OAD12/ TP/5548	300718 OAD12/ TP/5848	300725 OAD12/ TP/6048
	50			300657 OAD12/ TP/4050	300665 OAD12/ TP/4350	300675 OAD12/ TP/4550	300685 OAD12/ TP/4850	300694 OAD12/ TP/5050	300703 OAD12/ TP/5350	300711 OAD12/ TP/5550	300719 OAD12/ TP/5850	300726 OAD12/ TP/6050
	53			300658 OAD12/ TP/4053	300666 OAD12/ TP/4353	300676 OAD12/ TP/4553	300686 OAD12/ TP/4853	300695 OAD12/ TP/5053	300704 OAD12/ TP/5353	300712 OAD12/ TP/5553	300720 OAD12/ TP/5853	300727 OAD12/ TP/6053
	55				300667 OAD12/ TP/4355	300677 OAD12/ TP/4555	300687 OAD12/ TP/4855	300696 OAD12/ TP/5055	300705 OAD12/ TP/5355	300713 OAD12/ TP/5555	300721 OAD12/ TP/5855	300728 OAD12/ TP/6055
	58				300668 OAD12/ TP/4358	300678 OAD12/ TP/4558	300688 OAD12/ TP/4858	300697 OAD12/ TP/5058	300706 OAD12/ TP/5358	300714 OAD12/ TP/5558	300722 OAD12/ TP/5858	300729 OAD12/ TP/6058
60					300679 OAD12/ TP/4560	300689 OAD12/ TP/4860	300698 OAD12/ TP/5060	300707 OAD12/ TP/5360	300715 OAD12/ TP/5560	300723 OAD12/ TP/5860	300730 OAD12/ TP/6060	

Hold oversikten på SmartCellene

Ved individuell tilpasning av puten kan det være greit å holde oversikten over fyllingsgraden, altså hvor mange SmartCeller som er flyttet og plassert i de ulike kamrene. På nettside vår finner du derfor et **visuelt og enkelt skjema** som gir deg muligheten til nettopp dette.

Merk: Den opprinnelige fyllingsgraden vil du til en hver tid finne på merkelappen på puten.



Se vår produktvideo



Scann QR-koden med telefonen din, og se vår produktpresentasjon.



Putestørrelser Adjuster O2

Standard (Strl >53 cm, kun tykkelse 10 cm)

På forespørsel

Inch	bredde										
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
15	38	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
16	40	40	40	43	45	48	50	53	55	58	60
17	43	43	43	43	45	48	50	53	55	58	60
18	45	45	45	45	45	48	50	53	55	58	60
19	48	48	48	48	48	48	50	53	55	58	60
20	50	50	50	50	50	50	50	53	55	58	60
21	53	53	53	53	53	53	53	53	55	58	60
22	55	55	55	55	55	55	55	55	55	58	60
23	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	60
24	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Putestørrelser Adjuster O2 12

Standard

På forespørsel

Tilpasset størrelse

Inch	bredde										
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
15	38	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
16	40	40	40	43	45	48	50	53	55	58	60
17	43	43	43	43	45	48	50	53	55	58	60
18	45	45	45	45	45	48	50	53	55	58	60
19	48	48	48	48	48	48	50	53	55	58	60
20	50	50	50	50	50	50	50	53	55	58	60
21	53	53	53	53	53	53	53	53	55	58	60
22	55	55	55	55	55	55	55	55	55	58	60
23	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	60
24	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Tekniske data ▼



Størrelse ▼

Bredde og dybde mellom 35 og 60 cm. Se oversikt over kombinasjoner for ulike putehøyder



Høyde ▼

6, 10 og 12 cm



Maks brukervekt ▼

250 kg



Vekt ▼

534-900 g (avhengig av putens høyde og størrelse)



Maskinvask ▼

Maks 60°C



Trekk ▼

Vicair O2 topptrekk (standard), komforttrekk, inkontinestrekk og vendbart trekk

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østingsjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®