

Nattbord **Sven**

med høyderegulerbar spiseplate



God funksjonalitet

Norskprodusert kvalitet



Yes, you can.®

Nattbord Sven

Nattbord Sven er et nytt og moderne kvalitetsnattbord produsert i Norge, spesialdesignet for bruk på sykehus. Sven leveres nå med nye materialer i kjerne og på overflater for bedre vannbestandighet. Et robust og solid nattbord.

NYTT! Topplaten og spiseplaten er produsert med CDF som kjernemateriale. Overflaten leveres med det vannbestandige materialet melamin. Denne materialkombinasjonen gjør at det ikke er nødvendig å fjerne vanndråper fra topp- og spiseplate etter renhold, og at lett vannsøl derfor tolereres.

Forbedret ergonomi og gode grep gjør det nå enklere å bruke og transportere nattbord Sven.

NATTBORD SVEN KAN LEVERES I TO OPPBEVARINGSLØSNINGER:

- › Stor og liten skuff (standard).
- › Liten skuff og skap med én hylle.




1



Oppbevaring

Nattbord Sven leveres med to gjennomgående skuffer. Dette gjør at pasienten kan bruke nattbordet fra begge sengens sider, i tillegg til at det blir enklere å få tak i ønsket innhold fra skuffer og skap.

2

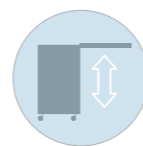

Spiseplate

Spiseplaten kan høydereguleres i 18 forskjellige høydeposisjoner (70 til 98 cm). Dette gjør at spiseplaten er meget godt egnet for bruk både ved seng og stol i stell- og spisesituasjoner. Spiseplaten har gassfjærdemping og tåler 8 kg belastning. Spiseplaten kan heves og senkes på en enkel måte.

3



Runde kanter

Topp- og spiseplate har avrundede kanter for sikkerhet og moderne design.

› Praktisk og ergonomisk håndtak for enkel manøvrering av nattbordet.

› Kroker til å henge opp veske, jakke eller lignende, som gir enda bedre oppbevaringsmuligheter for pasienten, er tilgjengelig som tilbehør.

› Stor skuff med god oppbevaringsplass som har tilkomst fra begge sider. Skuffen gir enkel og god tilkomst for pasienten, både fra rullestol og seng.

› Sven er også utstyrt med 4 hjul i høy kvalitet med dobbel kulebane og svingkrans. Hjulene kan svinges 360 grader. 2 av hjulene er låsbare.



› Låser på alle skuffer og skap kan monteres som ekstrautstyr.

› Nattbordet leveres som standard med høyderegulerbar spiseplate, men kan også leveres med spiseplate med vinkelregulering/tilt. Nattbord i denne serien kan også leveres i 110 cm.

› God og åpen plass til oppbevaring.

Tilleggsfunksjon: Vinkelregulerbar spiseplate

› Nattbord Sven med tilt av spiseplate har alle de samme funksjonene og egenskapene som Nattbord Sven med høyderegulerbar spiseplate. Forskjellen er at spiseplaten på denne modellen har tiltregulering som er enkel og intuitiv å bruke.



Materialer

CDF

CDF er et mer eksklusivt kjernemateriale som har en høyere tetthet, hardhet og er mer vannbestandig enn MDF.

Melamin (standard)

Melamin er et slitesterkt og vannbestandig materiale som legges utenpå kjernematerialet i CDF. Melamin er en hard og herdet plast som tåler mye og ikke knuser. Overflaten er vanntett.

Fenix-laminat (tilvalg)

Fenix er en eksklusiv laminat som på grunn av sin overflatestruktur forringer levevilkårene for bakterier. Denne laminatoverflaten blir lagt utenpå kjernematerialet av CDF. Overflaten er vanntett og er 0,9 mm tykk.



BÆREKRAFT OG SIRKULÆR ØKONOMI

Haugstad Møbel AS er en bærekraftig møbelfabrikk med fokus på sirkulærøkonomi som har implementert FNs bærekraftsmål i sin langsiktige forretningsstrategi. Haugstad Møbel AS har bl.a. returordning for alle møbler og innredninger som skal byttes ut av kunde. Møblene blir tatt inn i gründerfabrikken "Hubben" som er Haugstad Møbel AS sin læringsfabrikk og miljøfyrtårn.

Les gjerne mer her

HAUGSTAD
MØBEL - SKOLE Ø BARNEHAGE - KJØKKEN - KONTOR



Tekniska data ▼



Total høyde ▼

97 cm



Topplate ▼

54 x 42,6 cm



Høydeinnstilling ▼

70-98 cm



Vekt ▼

8 kg


Farger* ▼



Hvit



Bjørk

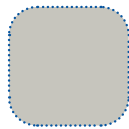

Lys Grå



Grå / Svart



Bøk



Lys eik

* Pristillegg for ulike alternativer

| Art. nr. | Produkt | Sortiment |
|----------|---|------------------|
| 60111236 | Nattbord Sven stor skuff m/høyderegulerbar spiseplate, hvit CDF | Hovedsortiment |
| 60111235 | Nattbord Sven stor skuff m/høyderegulerbar spiseplate og tilt, hvit CDF | Tilleggsortiment |
| 60111237 | Nattbord Sven stor skuff m/høyderegulerbar spiseplate, hvit CDF Fenix | Tilleggsortiment |
| 60111238 | Nattbord Sven skap skuff m/høyderegulerbar spiseplate og tilt, hvit CDF Fenix | Tilleggsortiment |
| 60111240 | Nattbord Sven stor skuff m/høyderegulerbar spiseplate og tilt, hvit CDF Fenix | Tilleggsortiment |
| 60111241 | Nattbord Sven stor skuff m/høyderegulerbar spiseplate, bøk CDF | Tilleggsortiment |
| 60111242 | Nattbord Sven stor skuff m/høyderegulerbar spiseplate og tilt, bøk CDF | Tilleggsortiment |
| 60111267 | Nattbord Sven skap skuff m/høyderegulerbar spiseplate, hvit CDF | Tilleggsortiment |
| 60111268 | Nattbord Sven skap skuff m/høyderegulerbar spiseplate og tilt, hvit CDF | Tilleggsortiment |
| 60111245 | Ipad-holder | Tilleggsortiment |
| 60111247 | Kroker | Tilleggsortiment |

For ytterligere informasjon om produktet, som eksempelvis produktets brukermanual, se vår hjemmeside www.invacare.no



Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®