

AQUATEC®

Orca

Badekarheis til alle typer badekar



Yes, you can.

Nyt et sikkert bad med Aquatec Orca badekarheis for sittende posisjon

enkelt og med kun ett tastetrykk. Den stabile, robuste rammen med forsterkede sakser og forsterket base gir høy sikkerhet. Den høye ryggen er formet for å gi nakken støtte, og bidrar til å gjøre badet komfortabelt.

- > Vedlikeholdsfri aktuator, kraftig men stillestående
- > Den ergonomisk utformede ryggen kan foldes opp og ned med én hånd
- > Rygg kan senkes til 40°
- > Den ergonomiske håndkontrollen flyter i vannet
- > Dersom batterikapasiteten i håndkontrollen er for lav, blokkeres muligheten for å senke badekarheisen
- > Avtagbar dekkmatte som kan maskinvaskes
- > Ny bunnplate med bærehåndtak gjør håndteringen enkel
- > Patenterte sugekopper som løsner lett fra badekaret
- > Praktisk holder for håndkontroll på ryggen
- > Dreneringshull i bunnplaten forenkler rengjøringen
- > Bredt sortiment av tilbehør for individuell tilpasning

PÅ ANBUD
MED NAV

Postvinner
Delkontrakt 9

Hovedprodukt (standardkonfigurasjon)

Aquatec Orca badekarheis inkl dekkmatte og lader.

Artikkel nr: 1573864

HMS nr: 211366

> Aquatec Orca med elektrisk, vinkelregulerbar rygg

> Aquatec Orca XL med elektrisk, vinkelregulerbar rygg. Meget høy brukervekt: 170 kg


> Holder for håndkontroll

> Kan også brukes uten dekkmatte



> Praktisk bærehåndtak på fremsiden av bunnplaten

> Dreneringshull i bunnplaten

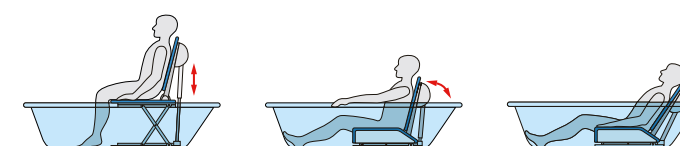

Badekarheis i drift

1

2

3



Tilbehør Aquatec Orca badekarheis




Vinkelregulerbare sideplater

Individuelt justerbare sidevanger for sikker sittestilling.

Art. nr.: **1471606** Hvit, til **Orca** (ved bestilling med badekarheis)

HMS-nr.: **199081**

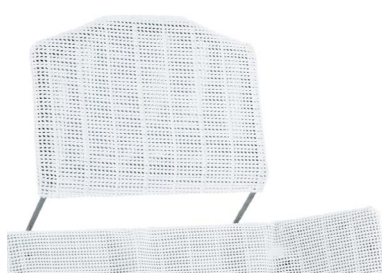

Høydejusterbar hodestøtte

For sikker støtte av hode-og nakkeområdet. Anbefales sammen med spesial rygg. Alle delene for montering av hodestøtten er inkludert.

Art.nr.: **15461** Hvit, til alle **Orca**

HMS-nr.: **199075**



Bryst- og hoftebelte

i mykt og hudvennlig materiale.

Art. nr.: **1528702** til **Orca**

HMS-nr.: **211367**



Abduksjonskloss

Forhindrer glidning fra seteoverflaten. Til alle batteridrevne badekarheiser.

Art. nr.: **1525932** Blå (ø 70 mm)

HMS-nr.: **199069**

Art. nr.: **1525933** Blå (ø 120 mm)

HMS-nr.: **199068**



Høydeadapter


Øker sittehøyden med 20, 40, og 60 mm. For alle batteridrevne badekarheiser.

Art. nr.: **15170** Høydeadapter 20 mm (4 stk i pakken) inkl. ombygningssett

HMS-nr.: **109172**

Art. nr.: **14694** Høydeadapter 20 mm (4 stk i pakken) uten ombygningssett

Tilbehør Aquatec Orca badekarheis

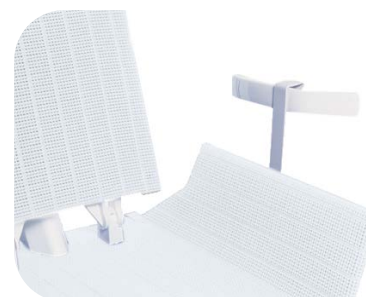

Sideplateavleder

Brukes for å gjøre sideplatene smalere slik at heisen kan passere hindringer.

Art. nr.: **15309** Til alle batteridrevne badekarheiser

HMS-nr.: **163185**



Transportbag med hjul

Hendig bag til transport av badeheisen.

Art. nr.: **14586AQT** Bag til badeheis




Spesialtilpassede sideklaffer

Forenkler overføring fra heisen.

Art. nr.: **1574239** Sideklaffer (par), inkludert hvitt trekk, til **Orca** (når bestilt sammen med heisen)

Art. nr.: **1471606** Sideklaff, uten trekk, til **Orca / Orca F** (ved ettermontering)

HMS-nr.: **199081**

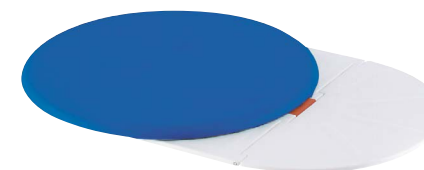

Aquatec Trans


Glideplate som forenkler forflytning inn og ut av badekaret.

Art. nr.: **4.03.002** Roterende forflytning, blå

HMS-nr.: **142889**

Tekniske data

Produkt ▼	Aquatec Orca ▼	Aquatec Orca F ▼	Aquatec Orca XL ▼
Badekarheis med dekkmatte	1573864 HMS-nr.: 211366	1471071	1573685 HMS-nr.: 211365
Dimensjoner ▼			
Setebredde uten sidestøtte	375 mm	375 mm	375 mm
Setebredde med sidestøtte	715 mm* (A)	715 mm (A)	715 mm (A)
Setedybde	590 mm (B)	590 mm (B)	590 mm (B)
Setehøyde maks	420 mm (C)	420 mm (C)	420 mm (C)
Setehøyde min	60 mm	60 mm	60 mm
Ryggbredde	360 mm (D)	360 mm (D)	360 mm (D)
Rygghøyde	665 mm (E)	665 mm (E)	665 mm (E)
Total dybde (oppreist rygg)	650 mm (F)	690 mm (F)	650 mm (F)
Total dybde (tilbakeleant rygg)	920 mm	-	920 mm
Total høyde med rygg	1075 mm (G)	1075 mm (G)	1075 mm (G)
Baseområde	580 x 285 mm	580 x 285 mm	580 x 285 mm
Tykkelse dekkmatte	3 mm	3 mm	3 mm
Annen info ▼			
Total vekt uten håndkontroll	10,8 kg	11,4 kg	11,6 kg
Total vekt uten batteripakke	-	-	-
Vekt, sete	6,6 kg	7,2 kg	7,4 kg
Vekt, rygg	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg
Vekt, håndkontroll	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg
Vekt, batteripakke	-	-	-
Brukervekt	140 kg	140 kg	170 kg
Rygg kan senkes til	40°	-	40°
Farge	Hvit	Hvit	Hvit

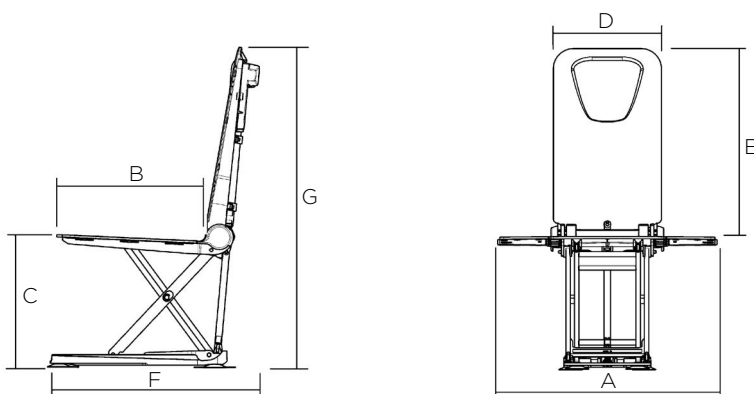

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



© 2025 Invacare International GmbH. All rights reserved. All informasjon er korrekt på trykktidspunkt.
Invacare forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. NO - 04/25



Yes, you can.®