

Küschall® COMPACT 2.0

Prisforhandlet i post 4 og 5





UNLIMIT YOUR WORLD

Hos Küschall tror vi på at alt er mulig når man virkelig ønsker det. Den pålitelige og foldbare Compact 2.0 rullestolen gir brukeren alle muligheter for en ny og spennende kjøreopplevelse. **Unlimit your world.**

KÜSCHALL COMPACT 2.0 FF OG SA

Küschall Compact 2.0 er den perfekte kombinasjonen av pålitelighet og høy kvalitet. Compact 2.0 leveres med to forskjellige frontrammer; fast front (FF) og swing away (SA) med utsvingbare benstøtter. Rammene kan lett tilpasses brukerens behov og for bedre komfort. Uansett om det er bruk for et høyere konfigurasjonsnivå eller en mer enkel aktiv rullestol passer Compact 2.0.

HYDROFORMING

Den hydroformede rammen med sine fine linjer tar designet til Compact 2.0 til et helt nytt nivå. Denne teknikken er mer enn bare design, den både styrker og øker stivheten. I tillegg får du en moderne og tidløs stol med et ergonomisk grep som letter forflytning og reposisjonering.

Küschall® COMPACT 2.0

HYDROFORMING

■ Det hydroformede designet gir en robust og sterk konstruksjon. Det ergonomiske grepet letter forflytning og reposisjonering.

BENSTØTTER

■ Benstøttene svinges lett til sides og kan fjernes (modell SA). Dette gjør det enklere å ha føttene i bakken ved forflytning og ved transport av stolen i for eksempel bil. Alternativt med fast front for aktiv kjøring, stivere ramme og lettere stol (modell FF).

FOTBRETTENE

■ De delte fotplatene har slitesterk antislip-overflate og klappes lett opp ved forflytning. Med fast front følger hel fotplate i karbon som kan felles opp.



NEDFELLBAR RYGG OG KJØREHÅNDTAK

■ Nedfellbar rygg med velcroregulering og praktiske nedfellbare kjørehåndtak. Se detaljbilder på neste side.

SAMMENLEGGBAR

■ Foldemekanismen gjør det enkelt å folde stolen ved å ta tak i ryggstropp og setetrekk. Standard konfigurasjonen har også foldbar rygg, noe som gjør stolen svært kompakt og liten.

RAMMEKRYSS

■ Rammekrysset er spesielt designet for å støtte brukere med nedsatt styrke og sikre at rullestolen enkelt kan foldes ut og settes i sammen igjen.

RETNINGSSTABIL KJØRING

■ Det er enkelt å stille inn forhjulet slik at man holder en stabil kjøreretning.

SVINGHJULGAFFEL

■ Et nytt og rent design med integrert lager reduserer ansamling av smuss - ideell for enklere vedlikehold.

EGENSKAPER



SWING AWAY FRONTRAMME

Utsvingbare og avtagbare benstøtter gir god plass til føttene, og forenkler forflytning.



FAST FRONTRAMME

Gjør stolen enda lettere og mer stabil, samtidig som den kan foldes sammen.



NYHET!

NEDFELLBAR RYGG MED VELCROREGULERING

Både Compact FF og SA leveres nå med nedfellbar, vinkeljusterbar rygg med velcrobånd som standard. Dette bidrar til bedre individuell tilpasning og komfort, i tillegg til at stolen gjøres markant mindre ved transport.



NYHET!

NEDFELLBARE KJØREHÅNDTAK

Praktiske nedfellbare kjørehåndtak er nå standard på både Compact FF og SA.



HYDROFORMET RAMME – KVALITET OG LAV VEKT

Den innovative hydroformede rammen gjør Compact 2.0 svært lett og designets utforming gir et behagelig og ergonomisk grep øverst på bensøttene. Denne detaljen gir god støtte under reposisjonering og forflytning.



FOLDBAR OG STABIL

Küschall Compact 2.0 er en særdeles stabil, robust og stiv kryssrammestol, som gir meget gode kjøreegenskaper. Rammekrysset gjør at stolen enkelt kan foldes sammen, også av brukere med nedsatt muskelstyrke.

STANDARD KONFIGURASJON COMPACT FF

DELKONTRAKT 4 - RANGERT SOM NUMMER 3

- Nedfellbar, vinkeljusterbar rygg med velcrobånd - **NYHET!**
- Nedfellbare kjørehåndtak - **NYHET!**
- Setetrekk med godt velcrofeste til ulike sitteputer - **NYHET!**
- 70° fast front
- Flip-up fotplate i karbon
- Svart klesbeskytter
- 5" everyday svinghjul - **NYHET!**
- 24" High Performance drivhjul med Maxxis Lite luft dekk og alu drivringer - **NYHET!**
- 3° camber
- Push-bremser
- Tippetrikninger, innsvingbare med hånd eller fot

STANDARD KONFIGURASJON COMPACT SA

DELKONTRAKT 5 - RANGERT SOM NUMMER 3

- Nedfellbar, vinkeljusterbar rygg med velcrobånd - **NYHET!**
- Nedfellbare kjørehåndtak - **NYHET!**
- Setetrekk med godt velcrofeste til ulike sitteputer - **NYHET!**
- 70° utsvingbare benstøtter
- Flip-up fotplater
- Kort armlen med svart klesbeskytter
- 5" everyday svinghjul - **NYHET!**
- 24" High Performance drivhjul med Maxxis Lite luft dekk og alu drivringer - **NYHET!**
- 3° camber
- Pull-bremser - **NYHET!**
- Tippetrikninger, innsvingbare med hånd eller fot



KOMPAKT OG TRANSPORTVENNLIG

Den nedfellbare ryggen gjør Küschall Compact 2.0 enda mer kompakt, og tar enda mindre plass ved transport.



COMPACT 2.0 I BIL

Compact 2.0 er krasjtestet og godkjent som sete i bil i visse konfigurasjoner. Kontakt din lokale Invacare-representant for mer informasjon.



ARTIKKELNUMRE OG HMS-NUMRE

Compact FF (fast front)											
		SD (mm)									
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
360	SB (mm)	320016	320017	320018	320019	320020	320021	320022	320023	320024	320025
		1678348	1678506	1678521	1678531	1678539	1678547	1678560	1678568	1678678	1678697
380	SB (mm)	320026	320027	320028	320029	320030	320031	320032	320033	320034	320035
		1678414	1678507	1678522	1678532	1678540	1678548	1678561	1678569	1678679	1678698
400	SB (mm)	320036	320037	320038	320039	320040	320041	320042	320043	320044	320045
		1678415	1678508	1678523	1678533	1678541	1678549	1678562	1678570	1678687	1678699
420	SB (mm)	320046	320047	320048	320049	320050	320051	320052	320053	320054	320055
		1678416	1678512	1678524	1678534	1678542	1678550	1678563	1678571	1678689	1678700
440	SB (mm)	320056	320057	320058	320059	320060	320061	320062	320063	320064	320065
		1678417	1678517	1678525	1678535	1678543	1678556	1678564	1678572	1678690	1678701
460	SB (mm)	320066	320067	320068	320069	320070	320071	320072	320073	320074	320075
		1678418	1678518	1678528	1678536	1678544	1678557	1678565	1678573	1678691	1678702
480	SB (mm)	320076	320077	320078	320079	320080	320081	320082	320083	320084	320085
		1678419	1678519	1678529	1678537	1678545	1678558	1678566	1678574	1678695	1678703
500	SB (mm)	320086	320087	320088	320089	320090	320091	320092	320093	320094	320095
		1678505	1678520	1678530	1678538	1678546	1678559	1678567	1678575	1678696	1678696

Compact SA (Swing away)											
		SD (mm)									
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
360	SB (mm)	320096	320097	320098	320099	320100	320101	320102	320103	320104	320105
		1677749	1677835	1677887	1677895	1677976	1678161	1678169	1678201	1678253	1678264
380	SB (mm)	320106	320107	320108	320109	320110	320111	320112	320113	320114	320115
		1677750	1677840	1677888	1677909	1678105	1678162	1678170	1678202	1678255	1678265
400	SB (mm)	320116	320117	320118	320119	320120	320121	320122	320123	320124	320125
		1677751	1677862	1677889	1677910	1678110	1678163	1678188	1678203	1678256	1678337
420	SB (mm)	320126	320127	320128	320129	320130	320131	320132	320133	320134	320135
		1677825	1677868	1677890	1677911	1678113	1678164	1678189	1678204	1678257	1678343
440	SB (mm)	320136	320137	320138	320139	320140	320141	320142	320143	320144	320145
		1677826	1677881	1677891	1677912	1678157	1678165	1678190	1678205	1678258	1678344
460	SB (mm)	320146	320147	320148	320149	320150	320151	320152	320153	320154	320155
		1677827	1677882	1677892	1677929	1678158	1678166	1678191	1678206	1678259	1678345
480	SB (mm)	320156	320157	320158	320159	320160	320161	320162	320163	320164	320165
		1677828	1677883	1677893	1677933	1678159	1678167	1678192	1678207	1678262	1678346
500	SB (mm)	320166	320167	320168	320169	320170	320171	320172	320173	320174	320175
		1677831	1677886	1677894	1677937	1678160	1678168	1678193	1678208	1678263	1678347

HMS-nummer
 Artikelnummer Invacare





DESIGN


1 TILGJENGELIGE RAMMEFARGER



2 LOGO-DESIGN



3 LOGO-FARGE

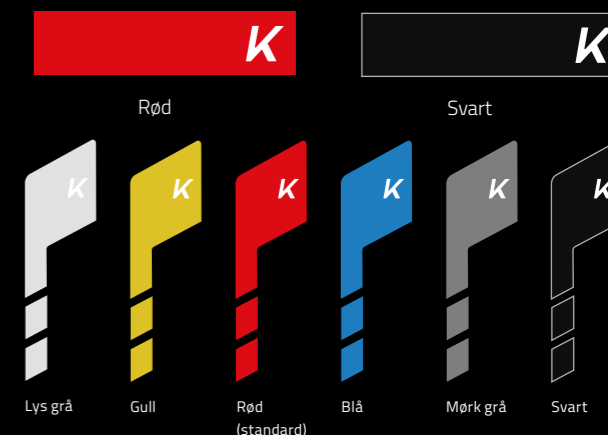

TEKNISKE DATA

SETEBREDDE

360 – 500 mm
i steg på 20 mm



SETEDYBDE

320 – 500 mm
i steg på 20 mm



LENGDE KNE TIL HÆL

200 - 510 mm
i steg på 10 mm



HØYDE RYGG

300 – 510 mm
i steg på 15 mm



VINKEL RYGG

82°/86°/90°/
94°/98°/102°



SETEHØYDE

Foran:
440 - 530 mm
(FF: fast frontramme)
370-530 mm
(SA: swing away frontramme)



FRONTRAMME-VINKEL

70° (FF og SA) / 80° (valg)



TOTAL BREDDDE

SB + 180 mm*

*Avhengig av type drivhjul.
Se detaljer under **teknisk data** på produktets egen side på nettsiden.



TOTALBREDDDE FOLDDET

ca. 290 mm



TOTAL LENGDE

70°: ca. 870 – 1220 mm
80°: ca. 850 – 1200 mm



CAMBER

0° / 3°



PRODUKTVEKT

12,9 kg (FF: fast frontramme og vinkelregulerbar rygg)
Ca 14 kg (SA: avtagbare benstøtter og vinkelregulerbar rygg)



TRANSPORTVEKT

Ca 8,9 kg (FF: fast frontramme)
Ca 9 kg (SA: avtagbare benstøtter)



MAKSIMAL BRUKERVEKT

130 kg



TESTING

Oppfyller krav til crash testing med nakkestøtte jmf ISO 7176-19



Oppgitt totalvekt og transportvekt er basert på setebredde 420 mm og setedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfigurasjonen. Vekt og dimensjon kan endres med forskjellige konfigurasjoner. For mer informasjon, se bruksanvisningen på vår hjemmeside.

MANGE MULIGHETER

Compact 2.0 har et stort spekter av både størrelser og tilbehør som dekker de fleste behov. Både setehøyde og tippunkt kan justeres etter at stolen er levert.

Compact 2.0 passer veldig godt sammen med både Matrx ryggssystem, Vicair sitteputer, seler og belter fra Bodypoint og Alber drivaggregater.



RYGGER FRA MATRX

Matrx ryggssystem er et svært ergonomisk og fleksibelt ryggssystem med mange enkle justeringsmuligheter. Ryggene fra Matrx gir optimal støtte og komfort - samtidig som de bidrar til et mer aktivt liv.



SITTEPUTER FRA VICAIR

Sitteputene fra Vicair gir den optimale kombinasjonen av hudbeskyttelse, postural støtte og brukervennlighet. Kort oppsummert: #ThePerfectPackage. Putene finnes i et stort utvalg størrelser og modeller.



BELTER OG SELER FRA BODYPOINT:

Invacare har et bredt sortiment av seler og belter fra Bodypoint som korrigerer og justerer sittestillingen på en effektiv og enkel måte.



DRIVAGGREGAT FRA ALBER

Få ekstra krefter og økt rekkevidde med et drivaggregat fra Alber montert på rullestolen din. Drivaggregatet (hjelpemotoren) vil gi deg hjelp og støtte når du trenger det, samtidig som du beskytter skuldre og armer mot unødvendig belastning og slitasje.





/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo