

# ISA™ Standard

## Aktiv personløftet



Ergonomisk aktivløfter  
fra Invacare



Yes, you can.®

# Aktivløfter fra Invacare

Invacare **Stand Assist (ISA)** er et produkt i Invacare sin løfteserie. Den er ideell til brukere som har behov for assistanse under en forflytning.

Under utviklingen har vi i Invacare hatt fokus på sikkerhet, komfort og en mer behagelig opplevelse for brukerne.

For omsorgspersoner er brukervennlighet et grunnleggende element, derfor har **ISA** lav vekt, og brukervennlig design. **ISA** kan enkelt demonteres uten verktøy og er lett å transportere.



## Smarte funksjoner ▼

### Lengderegulerbar løftebom

- ▶ Løftebommen kan enkelt lengdereguleres for å tilpasse brukerens høyde for å sikre god ergonomi.

### Ergonomisk grep

- ▶ Det unike designet er tilpasset håndens naturlige form for et godt og sikkert grep.

### Leggstøtte

- ▶ Leggstøtten reguleres enkelt med et grep i opp til seks forskjellige høyder samtidig som vinkelen på leggputen regulerer seg automatisk til brukeren.

### Ergonomiske egenskaper

- ▶ **Fotplate:** tre forskjellige høyder tilgjengelig for individuell tilpasning
- ▶ **Kjørebøyle:** ergonomisk utformet med mange grepsmuligheter, for enkel manøvrering.
- ▶ **Kroker til seil:** fleksible og sikre kroker for rask og sikker påføring av seil.
- ▶ **Hjul:** god størrelse på hjul gjør det lett å trille og enkelt å manøvrere.
- ▶ **Avrundede ben:** *ISA Standard* har buede ben for bedre manøvrering rundt stoler og toaletter.

## Teknisk data ▼

For mer informasjon om dette produktet, vennligst kontakt din lokale invacare representant eller se [www.invacare.no](http://www.invacare.no).




Løftekapasitet ▼



Lengde ▼



Bredde ▼

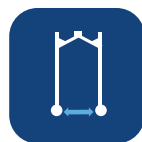

Innvendig  
bredde ▼



Innvendig  
bredde Åpen ▼



Sving Radius ▼

	Løftekapasitet ▼	Lengde ▼	Bredde ▼	Innvendig bredde ▼	Innvendig bredde Åpen ▼	Sving Radius ▼
<b>ISA<sup>STANDARD</sup></b>	160 kg	1080 mm	635 mm	495 mm	960 mm	1260 mm
<b>ISA<sup>PLUS</sup></b>	180 kg	1220 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	1400 mm
<b>ISA<sup>XPLUS</sup></b>	200 kg	1280 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	1430 mm



Produkt  
vekt ▼




Høyde med  
bom i lav/høy  
innstilling ▼



Løfteområdet  
med kort og  
lang innstilling  
av løftebom ▼




Bakkeklaring  
▼

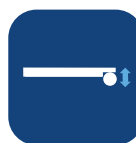

Høyde på  
ben ▼



Løfte-  
hastighet ▼

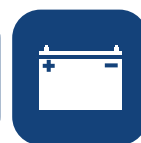

Antall løft  
per ladning ▼

	Produkt vekt ▼	Høyde med bom i lav/høy innstilling ▼	Løfteområdet med kort og lang innstilling av løftebom ▼	Bakkeklaring ▼	Høyde på ben ▼	Løftehastighet ▼	Antall løft per ladning ▼
<b>ISA<sup>STANDARD</sup></b>	48 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
<b>ISA<sup>PLUS</sup></b>	49 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
<b>ISA<sup>XPLUS</sup></b>	52 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82



## Artikkelnummer ▼

HMS.nr	Artikkelnummer	Beskrivelse
292483	1672269	Aktivløfter ISA Standard
	1656199	Aktivløfter ISA Standard med 100 mm hjul og leggrem
	1656034	Aktivløfter ISA Plus
	1656221	Aktivløfter ISA XPlus
	1682765	Aktivløfter ISA XPlus med Li-Ion batterier

## Seil ▼



### ◀ Løfteseil

- Passer for brukere med vekt bærende evne, men som ikke kan reise seg opp eller stå oppreist
- Bruker bør være klar og ha god kropp og hodekontroll
- Godt polstret for ekstra komfort
- Leveres med sklisikker materiale på baksiden



### ◀ Forflytningsseil

- Samme egenskaper som løfteseil, men har støtte for ben i tillegg

HMS.nr	Artikkelnummer	Beskrivelse
292492	60126831	Løfteseil aktiv XS
292491	60123941	Løfteseil aktiv S
292488	60123942	Løfteseil aktiv M
292489	60123943	Løfteseil aktiv L
292490	60123944	Løfteseil aktiv XL

HMS.nr	Artikkelnummer	Beskrivelse
292484	60123945	Forflytningsseil aktiv S
292485	60123946	Forflytningsseil aktiv M
292487	60123947	Forflytningsseil aktiv L
292487	60123948	Forflytningsseil aktiv XL

## Tilbehør ▼



### Forlengningsløkke

- ▲ Forleng løftestroppene for å gi flere posisjonsmuligheter. Finnes i 20 cm og 30 cm lengde.



### Fotplate

- ▲ Velg mellom høy, medium eller lav fotplate som passer til brukerens høyde (leveres med medium som standard).  
*Merk: Høy fotplate er beregnet på lave brukere, mens lav fotplate er beregnet på høye brukere.*



### Leggbånd

- ▲ Tilgjengelig som tilbehør. Leggbåndet har god polstring, er vaskbart og enkel å montere.

HMS.nr	Artikkelnummer	Beskrivelse
292494	SP1650440	Fotplate Høy (for lave personer)
292520	SP1650439	Fotplate Medium (standard)
292495	SP1650441	Fotplate Lav (for høye personer)
292498	SP1656592	Leggbånd
	60125890	Forlengningsløkke L Polyester
	60127372	Forlengningsløkke S Polyester
	AP1650026	Polstring løftebøyle ISA

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo

