

Softform Premier MaxiGlide




Utviklet for å forebygge forskyvning
og friksjon





Invacare **Softform Premier MaxiGlide** er en avansert, trykkavlastende skummadrass som gir god støtte. Den patenterte «Glide»-mekanismen sikrer at madrassen følger sengens innstillinger og gir en komfortabel madrass som minimerer forskyvning og friksjon.

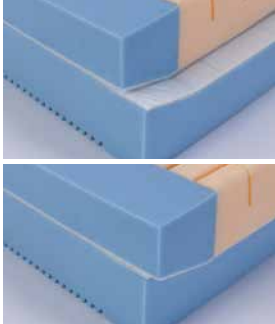

Trykksårforebyggende «Glide»-mekanisme

Madrassen består av to lag. Dersom liggeflaten justeres, blir det nederste laget liggende mens det andre følger brukeren. Dette gjør madrassen svært komfortabel og minimerer forskyvning og friksjon samt reduserer behovet for repositionering av pasient. Det øverste laget har en kjerne som er skåret i dråpeformede firkanter for tilpasset trykkfordeling. Den lar bruker synke godt ned i materialet slik at trykket fordeles over en større flate og er forebyggende og behandlende mot trykksår opp til middels risiko.

Egenskaper




Dryppkant som dekker glidelåsen

For å hindre at væske trekker inn i madrassen.



Elastisk, vannavstøtende trekk

Trekket beskytter madrassen og forlenger dens levetid. Oversiden av trekket er pustende og fireveis strekkbart for å redusere skyvkrefter og friksjon. Undersiden av trekket er forsterket for ekstra beskyttelse.

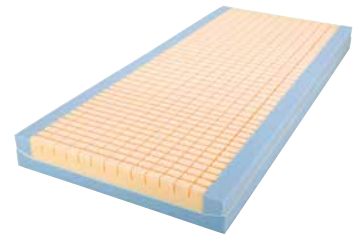

Modulbasert

Madrassen har en holdbar modulær overflate som gir effektiv trykkavlastning.

Tekniske data



Bredde:
850, 900 mm



Lengde:
2000 mm



Høyde:
152 mm



Produktvekt:
13,5 kg



Maks. brukervekt:
247,6 kg



Vask: 95°

**Softform
Premier
MaxiGlide**

Art.nr
1533984
1534012

Madrass
MaxiGlide
MaxiGlide

Madrassmål cm
90x200x14,2
85x200x14,2

Materiale
Spesialskum/polyuretan
Spesialskum/polyuretan

Produktbeskrivelse
Statisk skummadrass
Statisk skummadrass

Farge



Baltisk blå

Madrasen oppfyller følgende standarder:

Innvendig skum: BS 5852 Crib 5,
Trekk: BS 7175 Crib 5

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 Oslo

