



Post 1: Statische overmadrasser som ikke innstilles til bruker


Invacare[®]

Dacapo[®] **Top**

Fleksibilitet og komfort

Trusted Solutions,
Passionate People



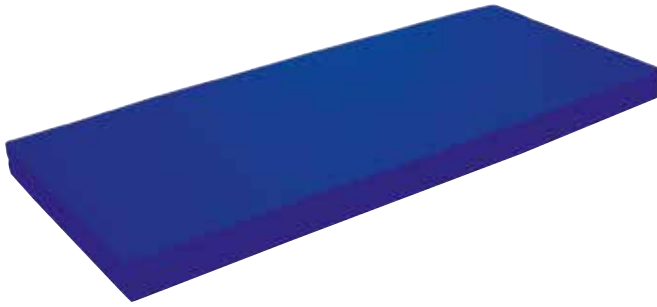

Dacapo Top - en trykkfordelende overmadrass av høy kvalitet som kombineres med en standardmadrass.

Madrassen er produsert i viskoelastisk skum som påvirkes av kroppstemperatur, og former seg etter brukerens konturer og bevegelser. Skummet tillater brukeren å synke ned i materialet slik at trykket fordeler seg over en større flate.


Mange brukere med muskel- og leddsmerter kan oppleve smertelindring på denne madrassen. Den åpne cellestrukturen i det viskoelastiske skummet minimerer utvikling av varme og fukt, noe som øker komforten betydelig.

Flammehemmende i samsvar med europeisk standard EN597-1 og EN 597-2.



Viskoelastisk skum (7 cm)

tetthet på 50kg/m³

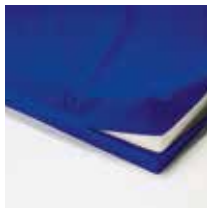

Glidelås

Glidelås på tre sider, dekket av dryppkant.

Dacapo Top trekk

- 100% vanntett
- Polyuretanbelagt polyester
- Pustende
- Toveis strekkbart
- Kan vaskes på 95 grader

Trekk

Inkontinenstrekk


Trekket består av polyuteranbelagt polyester, er toveis strekkbart og skånsomt mot huden. Stoffet er dampgjennomtrengelig og vanntett. Trekket er allergitestet og innsatt med middel mot støvmidd.

Bomullstrekk

Standard bomull, vaskbart på 40 °C.

Tekniske data

Mer informasjon om dette produktet, samt produktets bruk-sansvisning, finnes på www.invacare.no.

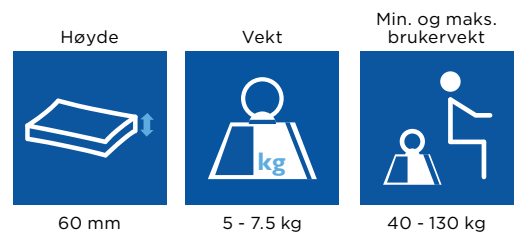

| HMS. nr. | Art. nr. | Madrasser med inkontinenstrekk | Madrassmål cm | Materiale | Produktbeskrivelse |
|----------|----------|--------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 023581 | 1516954 | Dacapo Top | 85x200x7 | Viskoelastisk skum | Overmadrass, statisk |
| 191105 | 1516942 | Dacapo Top | 105x200x7 | Viskoelastisk skum | Overmadrass, statisk |
| 191106 | 1493365 | Dacapo Top | 105x215x7 | Viskoelastisk skum | Overmadrass, statisk |
| 191107 | 1516943 | Dacapo Top | 120x200x7 | Viskoelastisk skum | Overmadrass, statisk |
| 191108 | 1493341 | Dacapo Top | 120x215x7 | Viskoelastisk skum | Overmadrass, statisk |
| 191109 | 1516944 | Dacapo Top | 80x200x7 | Viskoelastisk skum | Overmadrass, statisk |
| 191110 | 1493366 | Dacapo Top | 85x180x7 | Viskoelastisk skum | Overmadrass, statisk |
| 191111 | 1493386 | Dacapo Top | 85x190x7 | Viskoelastisk skum | Overmadrass, statisk |
| 191112 | 1493398 | Dacapo Top | 85x215x7 | Viskoelastisk skum | Overmadrass, statisk |
| 191113 | 1493224 | Dacapo Top | 90x180x7 | Viskoelastisk skum | Overmadrass, statisk |
| 191114 | 1493399 | Dacapo Top | 90x190x7 | Viskoelastisk skum | Overmadrass, statisk |
| 191115 | 1536947 | Dacapo Top | 90x200x7 | Viskoelastisk skum | Overmadrass, statisk |
| 191116 | 1493400 | Dacapo Top | 90x215x7 | Viskoelastisk skum | Overmadrass, statisk |

* For informasjon om øvrige madrasser i sortimentet, vennligst ta kontakt med Invacare.