



"The ideal match for  
my active lifestyle"

Sarah Williams

## Passer perfekt til din aktive livsstil


Invacare **MyOn<sup>HC</sup>** er designet for aktive brukere. Den har god ytelse og patentert foldemekanisme for enkel håndtering og lagring. **MyOn<sup>HC</sup>** har lav vekt, som gjør den enkel og praktisk å transportere i bil.

**MyOn<sup>HC</sup>** tilbyr:

- Patentert foldemekanisme
- Stivheten til en fastrammestol
- Trinnløse justeringsmuligheter
- Svært konfigurierbar

\* Prisforhandlet:

- Post 4: Aktiv rullestol med sammenleggbare ramme og avtakbare benstøtter

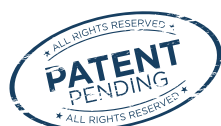

reddot award 2015  
winner



**Yes, you can.®**



### Patentert foldemekanisme



- Stolens innovative design og unike foldemekanisme reduserer stolens størrelse betydelig ved sammenlegging. Ryggen kan også felles ned, noe som gjør stolen svært kompakt.
- **MyOn<sup>HC</sup>** foldes enkelt sammen, og er dermed svært enkel å transportere eller oppbevare.



### Stivheten til en fastrammestol



- Den patenterte H-formede horisontale foldemekanismen gjør **MyOn<sup>HC</sup>** svært stabil sammenlignet med andre foldbare rullestoler på markedet.
- Foldemekanismen låser seg selv og gjør MyOn helt stiv, noe som gir svært gode kjøreegenskaper.



### Juster ryggen mens brukeren sitter i stolen

- Det patenterte ryggsystemet kan innstilles til den ønskede ryggvinkel, mens brukeren sitter i stolen.
- Den trinnløse justeringen gjør det raskt og enkelt å tilpasse ryggen perfekt til brukerens behov.
- En innebygget skala sikrer en nøyaktig justering av ryggen.



### Gjør det personlig

- Velg mellom et bredt spekter av rammefarger og kontrastfarger for å gi stolen et personlig preg
- **MyOn** har et stort utvalg av tilbehør og egenskaper som gjør den svært velegnet for brukere med ulike behov.
- **MyOn** er kompatibel med **alber** drivaggregat og ryggsystemet **Invacare Matrix**.



### Prisvinner

- **MyOn** har allerede vunnet priser for både design og funksjonalitet. Blant annet Red Dot Award for produktdesign.
- Red Dot Awards er ikke bare den største produktkonkurransen i verden, men også den mest prestisjetunge designprisen.



**reddot** award 2015  
winner



## JUSTERINGSMULIGHETER



①



②



③

## BENSTØTTER



④



⑤



⑥

## TILBEHØR



⑦



⑧



⑨

### JUSTERINGSMULIGHETER

#### ① Justerbar setedybde

Setet kan justeres trinnløst i dybden og seteflaten kan justeres med velcrostropper, noe som gir god vektfordeling.

#### ② Balansepunkt

Drivhjulet kan justeres fram og tilbake 10 cm, noe som sikrer et optimalt balansepunkt og optimale kjøreegenskaper.

#### ③ Cambring

Standard cambring av drivhjulet er 0-2°, men kan enkelt økes til 3° eller 4° om det er behov for mer retingsstabilitet.

### BENSTØTTER

#### ④ Swing-away benstøtter

Lar benstøtten svinge enten utover eller inn under stolen.

#### ⑥ Øvrige benstøtter

Velg mellom 70, 80 eller 90° benstøtte, vinkelregulerbar benstøtte, eller amputasjonsstøtte.

### TILBEHØR

#### ⑦ Ryggtrekk

Inkluderer en ryggglomme og en refleksstripe for økt synlighet

#### ⑧ Swing-away tippesikring

Tippesikringen kan lett svinges inn under stolen av ledsager eller bruker.

#### ⑨ Svinghjul

Et utvalg av hjul fra 4" til 7" er tilgjengelig, og velg gjerne en kontrastfarge på drivhjulsoppheng og svinghjuls-gaffel som passer din smak.

## ARMLENER



①



②



③

## SWING-AWAY OG AVTAGBARE ARMLENER



④



⑤

### KLESBESKYTTERE OG ARMLENER

#### ① Hjulskjerm

Lett, praktisk hjulskjerm som også fungerer som klesbeskytter.

#### ② Høydejusterbart armlene

Trinnløst justerbart armlene med en komfortabel armlenspute.

#### ③ Hemi-armlene

Hemiarmletet kan stilles inn i høyde, dybde og vinkel for å gi ekstra komfortabel støtte.

### SVINGBART OG AVTAGBART ARMLENE

#### ④ Avtagbart armlene med swing-away-funksjon.

For å forenkle forflytning kan dette armlenet svinges bakover eller tas helt av.







#### ⑤ Høydejustering






Enkel høydejustering ved å trykke på en knapp under armlensputen.

Topppnummer	HMS-nr.	Beskrivelse
1608060	226215	MyonHC sb30,5 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636768	226216	MyonHC sb30,5 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636769	226217	MyonHC sb33 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636770	226218	MyonHC sb33 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636771	226219	MyonHC sb35,5 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636772	226220	MyonHC sb35,5 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636773	226221	MyonHC sb35,5 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636774	226222	MyonHC sb38 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636775	226223	MyonHC sb38 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636776	226224	MyonHC sb38 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636777	226225	MyonHC sb40,5 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636778	226226	MyonHC sb40,5 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636779	226227	MyonHC sb40,5 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636780	226228	MyonHC sb43 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636781	226229	MyonHC sb43 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636782	226230	MyonHC sb43 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636783	226231	MyonHC sb45,5 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636784	226232	MyonHC sb45,5 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636785	226233	MyonHC sb45,5 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636786	226234	MyonHC sb48 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636787	226235	MyonHC sb48 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636788	226236	MyonHC sb48 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636789	226237	MyonHC sb50,5 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636790	226238	MyonHC sb50,5 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636791	226239	MyonHC sb53 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636805	226240	MyonHC sb53 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb

## TEKNISK DATA

							
Invacare MyOn <sup>HC</sup>	305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm	350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm	0 - 9 °	Fremre del 360-535 mm intervall 25 mm Bakre del: 360-510 mm intervall 25 mm	Fast 90° Trinnløst 90° -15°/+15°	Fast 300/325/ 350/400/425/ 450/475/500 mm Justerbart 360-400 og 410-490 mm	Faste benstøtter 80° Swing away benstøtter 70°/80° & 90° Vinkelreg. benstøtter 0-80°




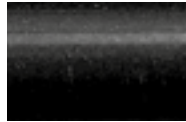






							
Invacare MyOn <sup>HC</sup>	Swing away ramme 200-510 mm Fast ramme 300-530 mm	186-227 mm 186-266 mm 205-280 mm	SB +180 mm til SB+ 250 mm	320 -380 mm	845 -1205 mm	670 -860 mm	701 -1108 mm

					
Invacare MyOn <sup>HC</sup>	7°	1050 -1380 mm	100 og 130 kg	Fra 12,3 kg	Fra 8,3 kg




MyOn overholder EN 12183:2014. Mål kan variere med 15 cm / 2°. I tillegg overholdes ISO 7176:2008 og ISO 10542 standarder. Rullestolbrukere bør alltid forflyttes til bil-/bussete og benytte bildnes belte- og sikkerhetssystem, når det er mulig. For mer informasjon om MyOn henvises det til [www.invacare.no](http://www.invacare.no). For informasjon om bruk, justeringsmuligheter og transport, vennligst se brukerveiledningen som kan lastes ned på [www.invacare.no](http://www.invacare.no).

## RAMMEFARGER

					
Pearl White (standard)	Dark Red	Pop Blue	Anthracite Black	Electric Green	Hypnotic Purple
					
Pearl Grey	Matt Black	Intense Yellow	Vibrating Orange		

## TREKK

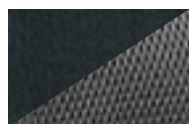

Black Nylon /  
Grey mesh

## KONTRASTFARGER



Silver Blue Purple

Velg kontrastfarger til drivhjulsoppheng og svinghjulsgafler og -lokk!

### Standard konfigurasjon MyOn<sup>HC</sup>:

- Unik foldemekanisme med låsing av ramme for optimale kjøreegenskaper samt reduksjon av energitap i ramme på grunn av økt stivhet
- Bakenforliggende kjørehåndtak
- Dybderegulerbart setetrekk
- Høydejusterbar, nedfellbar og vinkeljusterbar rygg med velcro
- Avtagbare og høydejusterbare armlener med polster (280 mm)
- Avtagbare høyderegerbare benstøtter 80°
- Oppfellbare vinkelfaste fotplater
- Standard nedfellbare push-bremser
- Drivhjul 24" lett vekt med luftfylte høytrykksdekk og aluminiumsdriving.
- Svinghjul 5" medium hard (125 x 27 cm)
- 2° camber
- Brukerbetjente innsvingbare tippesikringer 2 stk.
- Rammefarge: Pearl White