


Softform Premier Spinal



En madrass med dobbel skuminnsats
spesiallaget for ryggmargsskader



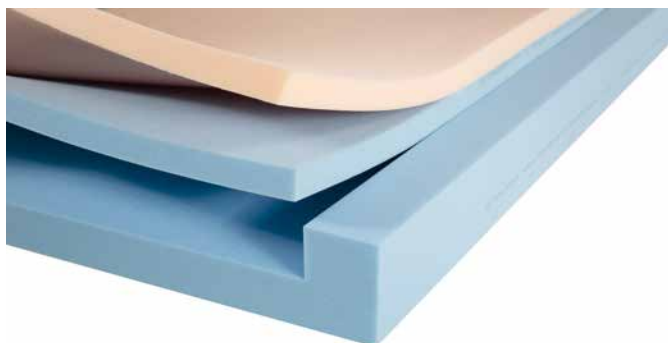

Invacare **Softform Premier Spinal** er en madrass designet spesielt for de med ryggmargsskader. Madrassen passer for dem med middels høy risiko for å utvikle trykksår. Invacare **Softform Premier Spinal** gir ekstra støtte for å dekke et bredt spekter av komfort- og justeringskrav ved ryggmargsskader. Den unike doble skuminnsetsen gir et mykere og mer komfortabelt underlag og større trykkfordeling, noe som er viktig i rehabiliteringsprosessen.



Komfort-underlag



Fast underlag

Stabil støtteflate

Grad av skade og smerte i rygg varierer og er individuelt for hver pasient. **Softform Premier Spinal** tilbyr to ulike skuminnsetser, som gir mulighet for en skreddersydd løsning uten å måtte bytte madrass. Skummet kan raskt og enkelt byttes ved sengen, og reduserer dermed ventetiden for pasienten og behovet for langvarig forflytning. Det spesialproduserte skummet ligger parallelt med sidestøttene, og fremmer effektiv pleie, håndtering og transport uten å påvirke liggestilling og trykkfordeling.

Invacare **Softform Premier Spinal** sin unike løsning med to ulike skuminnsetser gir valget mellom to stabile støtteflater med god komfort. Valget av skuminnsetser er individuelt for hver pasient, og trykkfordeling og reduksjon av shear er ivarett uansett hvilken man velger. Madrassens utforming samsvarer godt med rammen på elektriske senger. **Softform Premier Spinal** er praktisk og holdbar, og vil med sine gode trykkfordelende egenskaper være en god bidragsyter i rehabiliteringsprosessen.

Valg av madrass for riktig støtte


Overflaten er for myk



Overflaten er for hard



Riktig støtte og rett ryggrad

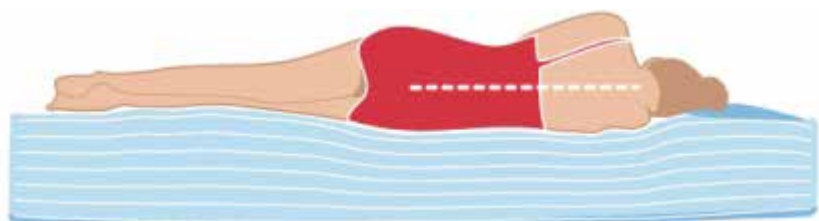

Egenskaper




Smittevern

En tynn platilon-film integrert i **Softform Premier Spinal** omgir det indre skummet og er med på å hindre væske fra å trenge igjennom. Dette gir en ekstra sikkerhet og beskyttelse mot infeksjon.

I kombinasjon med **SRT**-trekket, gir dette en dobbel beskyttelse og sikkerhet mot forurensning av madrassen.

SRT er et væskeavstøtende trekk, unikt for Invacare. Trekket er utviklet på en slik måte at det skal kunne tåle omfattende, men viktige rengjøringsprosesser i helsevesenet. **SRT**-trekket gir madrassen lenger holdbarhet.

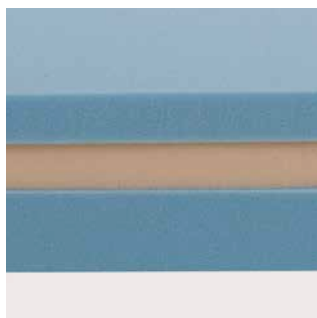


Den unike doble skuminnsatsen gir valget mellom to ulike underlag

Den blå skuminnsatsen gir en fastere overflate for ytterligere stabilitet. Når den oransje skuminnsatsen plasseres øverst vil pasienten synke ned i madrassen for økt komfort og trykkavlastning.



Krever ikke snuing eller rotering

Madrassen krever ikke snuing eller rotering, og minimerer problemer med manuell håndtering.

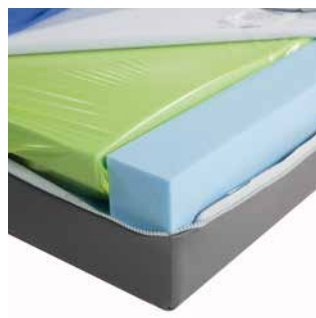

U-formet skumbase

Forenkler forflytning med effektiv sidestøtte. En robust skumbase som hindrer madrassen i å bunne ut.









Klaff som skjuler glidelåsen

En klaff beskytter glidelåsen langs hele lengden. Dette reduserer faren for væskeinntrenging og forurensning av skumkjernen.

Multi stretch, pustende og vanntett materiale med sveisede hjørner hindrer ansamling av støv og væskerester.

Tekniske data

						
Enkel	660-900mm Dobbelmadrass kan leveres ved forespørsel	1250-2100mm	152 mm	14 kg	Max. Bruklervekt: 247.6 kg	Vask: 95°

Produsert i henhold til Europeisk standard: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match.
Foam Interior: BS 5852: 1990 Crib Source 5; Cover BS7175: 1989 Crib Source 5.
Composite tested to BS 7177 Crib 5.

Farge



Blå



Artikkelnummer fås ved forespørsel.

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 Oslo

