



Post 2: Statiske overmadrasser som innstilles til bruker (voksen)

Post 3: Statiske overmadrasser som innstilles til bruker (barn)

Invacare®

Carebed - voksen og barn


Trykkfordeling basert på
statisk luft

Trusted Solutions,
Passionate People



Invacare **Carebed** gir effektiv trykkfordeling både ved forebygging og behandling av trykksår. **Carebed** kan brukes til pasienter med middels risiko for å utvikle trykksår.

Madrassen har individuell tilpasning, og er svært enkel i bruk, noe som sikrer en korrekt og enkel håndtering for pleiepersonalet. **Carebed** følger sengens innstillinger og er meget stabil og komfortabel.

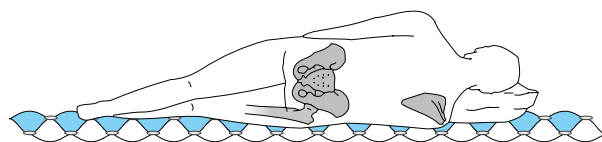

Trykkfordeling med statisk luft

Det er mange faktorer som må tas i betraktning når det gjelder utvikling av trykksår. En av de avgjørende faktorene er mottrykket underlaget gir mot kroppen over tid. Vanlige madrasser gir ofte et for høyt mottrykk. Ved immobilitet kan dette føre til at blodtilførselen stopper opp på utsatte steder, slik at vevet dør og trykksår oppstår. For å forebygge trykksår, må mottrykket reduseres.

Optimal funksjon

Carebed består av mer enn 300 separate celler fylt med luft. Luften transporteres og fordeles mellom cellene, og tilpasser seg pasientens form og vekt. Madrassen er meget enkel i bruk. Luft pumpes inn mens pasienten ligger på madrassen. Etter ca. ett minutt vil det være korrekt luftmengde i madrassen og ventilen lukker seg. Det er derfor umulig å fylle for mye luft i madrassen. **Carebed** er en anerkjent og innarbeidet madrass med gode kliniske resultater.

Produktegenskaper



Caresit

Konseptet med luftceller finnes også i seteputen **Caresit**. Kan f. eks. brukes i rullestol og i bil.



Pumpe

Den elektriske pumpen sørger for at madrassen fylles med rett mengde luft.



Vedlikeholdspumpe

Pumpen etterfyller madrassen automatisk (tilgjengelig som tilbehør).



Andre anvendelsesområder

Konseptet brukes også til barne- og operasjonsmadrasser.

Invacare **Carebed** reduserer mottrykket ved at den lar pasienten synke godt ned i madrassen. Trykket fordeles over en større flate og blodtilførselen opprettholdes.

Tekniske data

	Bredde	Lengde	Høyde	Vekt	Maks. brukervekt:
Størrelse Std	900 mm	1900 mm	100 mm	3,8 kg	150 kg
Operasjonsmadrass	480 mm	1030 /1700 /2000 mm	100 mm	1,3 - 2,3 kg	150 kg
Barnemadrass	700 mm	1600 mm	100 mm		150 kg
Pumpe				1,6 kg	150 kg
Caresit	4 størrelser, fra 400 - 450 mm	4 størrelser, fra 400 - 500 mm	60 mm	0,3 - 0,8 kg	150 kg

Mer informasjon om dette produktet, samt produktets bruksanvisning, finnes på www.invacare.no.

HMS. nr.	Art. nr.	Overmadrass, statisk luft	Madrassmål cm	Produktbeskrivelse
230226	1627437	Carebed	85x180x10	Overmadrass, statisk luft
230227	1627438	Carebed	85x90x10	Overmadrass, statisk luft
230228	1627439	Carebed	85x200x10	Overmadrass, statisk luft
230229	1627440	Carebed	85x210x10	Overmadrass, statisk luft
230230	1627441	Carebed	85x215x10	Overmadrass, statisk luft
230231	1627442	Carebed	85x220x10	Overmadrass, statisk luft
230232	1627443	Carebed	90x180x10	Overmadrass, statisk luft
230233	1627444	Carebed	90x190x10	Overmadrass, statisk luft
230234	1627445	Carebed	90x200x10	Overmadrass, statisk luft
230235	1627446	Carebed	90x210x10	Overmadrass, statisk luft
230236	1627447	Carebed	90x215x10	Overmadrass, statisk luft
230237	1627448	Carebed	90x220x10	Overmadrass, statisk luft
230238	1627449	Carebed, barnemadrass	60x140x10	Overmadrass, statisk luft
230239	1627450	Carebed, barnemadrass	65x160x10	Overmadrass, statisk luft
230240	1627451	Carebed, barnemadrass	70x160x10	Overmadrass, statisk luft
230241	1627452	Carebed, barnemadrass	75x165x10	Overmadrass, statisk luft