

Alber® viamobil®

alber



Den sterke hjelpemotoren for rullestoler



Yes, you can.

Post 18

Alber viamobil er utstyrt med en kraftig motor som klarer en brukervekt opp til 160 kg, samtidig som den er lett å betjene og manøvrere. Stigninger og nedoverbakker opp til 18 % kan trygt forseres uten fysiske anstrengelser for ledsager. **Alber viamobil** plasseres under rullestolen og hindrer derfor ikke ledsager fra å kunne gå behagelig.

Alber viamobil hjelper til med kjøring fremover, rygging og oppbremsing ved kjøring i nedoverbakke. **Alber viamobil** er modulbasert og kan derfor enkelt demonteres og transporteres i bilen.



Dynamisk kjøring

Med den sterke motoren er **Alber viamobil** en pålitelig partner på reisen. Det integrerte fjærsystemet gir godt veigrep for drivhjulet, mens de punkteringsfrie dekkene gjør turen bekymringsfri. Med et tastetrykk senker du drivhjulet og setter motoren automatisk i gang, og motsatt hvis du vil kjøre rullestolen manuelt. Drivhjulet er plassert i linje med rullestolen, noe som gjør det veldig enkelt å manøvrere **viamobil** uten anstrengelser.

Lett å bruke, maksimal sikkerhet

Det innovative EasyConnex Magnetic Plug-systemet kobler automatisk styreenheten og laderen sammen med batteriet. Hold helt enkelt den magnetiske kontakten nær uttaket og - klikk - så er den koblet til og låst. Det store og klare displayet gir ledsageren nøyaktig informasjon om batterikapasiteten. Den unike og patenterte sikkerhetsbryteren i styreenheten gjør at **viamobil** kan stoppes direkte i kritiske situasjoner, noe som gir maksimal trygghet for både bruker og ledsager.



Transportabel


Alber viamobil kan lett demonteres i små komponenter for enklere transport. Takket være litiumlon teknikk, har det kraftfulle batteriet en vekt på kun 2,3 kg, og er dermed veldig enkel å håndtere. Batteriet tilfredsstiller også internasjonale IATA regler som vil si at det trygt kan tas med på fly. Den kobles automatisk til drivenheten ved hjelp av magnetisk kraft. **Alber viamobil** kan monteres på nesten alle manuelle rullestoler. Takket være den kompakte størrelsen, påvirkes ikke komfortrullestolens sitteinnstillinger slik som rygg og tilt. Kun små låsesplinter skal til for at **viamobil** skal kunne monteres og demonteres på rullestolen.

Egenskaper ▼




Alber viamobil klar for transport

De kompakte og lette komponentene er enkle å transportere.

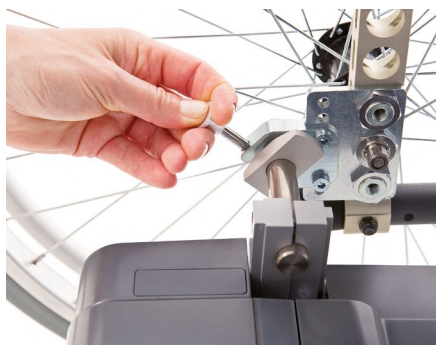

Montering

Alber viamobil monteres og demonteres raskt og enkelt i monteringsbeslagene.

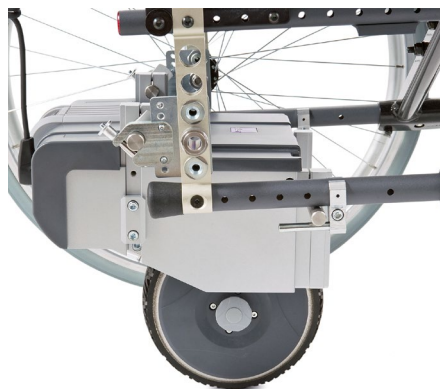

Monteringsbeslag

Vi har et stort utvalg av komplette monteringskit til de mulige manuelle rullestolene, se orversikt for komplett oversikt.



Tippesikring

Vi anbefaler å bruke tippesikringene som er utviklet spesielt for Viamobil. Invacare art. nr 1521032



Ekstra kjørehåndtak

Med ekstra kjørehåndtak montert på hjelpemotoren er det enda enklere å koble den til og fra rullestolen, samtidig som det forenkler kjøringen for ledsager. Invacare art. nr 1593406

Tekniske data ▼

Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.



Fart ▼

viamobil maks 5.5 km/t



Rekkevidde ▼

20 km

Batteri-
kapasitet ▼

36V / 6,6 Ah



Motorkraft ▼

150 W



Vekt batteri ▼

viamobil 2,3 kg

Maks trygg
helling ▼18% (11% med
160 kg bruker)

Total vekt fra ▼

13,5 kg
(kjøreenhet: 10,3 kg)Maks.
brukervekt ▼

160 kg



Hovedprodukt ▼

| Art-nr | HMS-nr | Beskrivelse |
|---------|--------|------------------------------------|
| 1521003 | 176396 | viamobil V25 ink. batteri og lader |

Tel.: 22579500
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo
Norway



Yes, you can.®